

# coway

## Coway MC-B02 Mine Plus Massage Chair โคเวย์ เอ็มซี-บี02 ไมน์ พลัส เก้าอี้นวดไฟฟ้า

รุ่น MC-B02 (Mine Plus)

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้ได้หากแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับที่ระบุในแผ่นป้ายแสดงค่าพิกัด เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนใช้งาน

## เรียนลูกค้า Coway

ขอขอบคุณที่ใช้บริการเก้าอี้นวด Coway

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดเพื่อการใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

คุณสามารถดูคู่มือผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ในระหว่างใช้งาน

**ข้อบ่งใช้:** ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ขี้โครงและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ขี้โครง

---

## III ก่อนใช้งาน

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย	4
2. ชื่อชิ้นส่วน	11
3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน	12

---

## III วิธีการใช้งาน

1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก	16
2. วิธีการใช้งาน	19
3. การเลือกโหมดการนวด	21
4. วิธีใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม	22

---

## การบำรุงรักษา III

1. วิธีการทำความสะอาด	26
-----------------------	----

---

## III อื่นๆ


1. การแก้ไขปัญหา	28
2. ข้อมูลจำเพาะ	29
3. การรับประกัน	30

# 1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย

**!** คำเตือน: ระบุถึงกรณีที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้หากละเมิดคำแนะนำ


**!** ข้อควรระวัง: ระบุถึงกรณีที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้เมื่อละเมิดคำแนะนำ

## ปลั๊ก

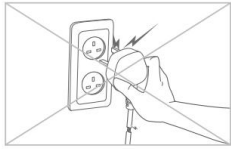


อย่าใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุดหรือเด้ารับหลวม

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

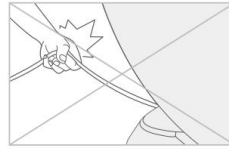

อย่าดึงปลั๊กไฟเพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

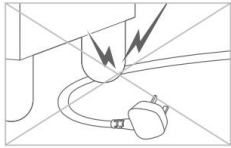


ห้ามจบปลั๊กไฟมากเกินไปหรือวางไว้ใต้ของหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการเสียรูป

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้




เมื่อบริเวณไฟฟ้าสัมผัสน้ำ ให้ถอดปลั๊กไฟและเปิดให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

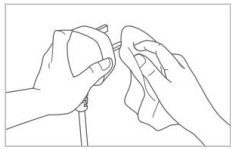


เช็ดฝุ่นละออง น้ำ ฯลฯ บนขาปลั๊กไฟและบริเวณที่สัมผัสกับขาให้หมด

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

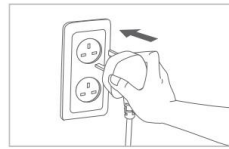


โปรดแน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ 220-240 V~, 50/60 Hz

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

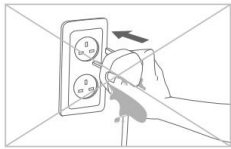


อย่าสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

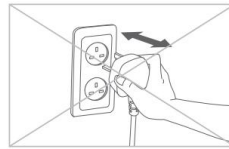


ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟซ้ำๆ

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

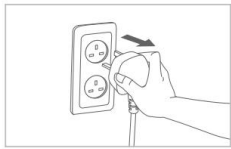


โปรดอย่าลืมนถอดสายไฟออกในขณะที่ซ่อมแซมหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

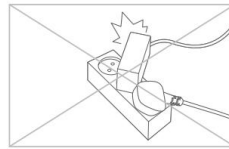


ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายเครื่องเข้ากับเต้าเสียบไฟเพียงช่องเดียว ควรใช้เต้าเสียบแยกสำหรับผลิตภัณฑ์เสมอ

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้

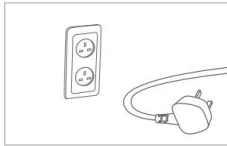

หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานควรถอดแอดปเตอ์ไฟออก

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

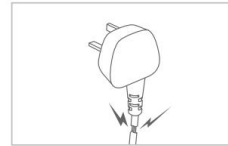

หากปลั๊กไฟชำรุด อย่าพยายามเปลี่ยนปลั๊กใหม่ แต่ให้  
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้




ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดย  
พลการ

. อาจทำให้สินค้าเสียหายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้




ห้ามจับผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือฉีดน้ำกับผลิตภัณฑ์

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

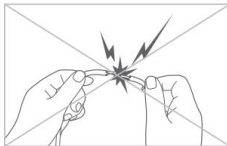


ห้ามเสียบหรือปรับเปลี่ยนปลั๊กไฟโดยพลการ

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

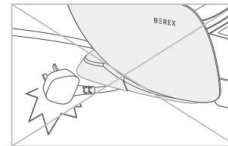


ระวังอย่าให้ปลั๊กไฟหล่นได้ผลิตภัณฑ์

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

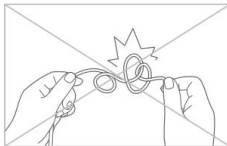

อย่าทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย อย่านำผลิตภัณฑ์เข้าใกล้  
อุปกรณ์ทำความร้อน หรืออง ตึง มัด หรือมัด  
ผลิตภัณฑ์มากเกินไป หรือวางวัตถุหนักบนผลิตภัณฑ์

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

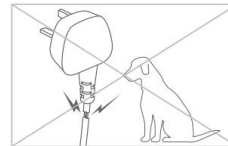

ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงกัดปลั๊กไฟ


. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

# 1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย


**!** คำเตือน: ระบุถึงกรณีที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้หากละเมิดคำแนะนำ

**!** ข้อควรระวัง: ระบุถึงกรณีที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้เมื่อละเมิดคำแนะนำ


## การติดตั้ง

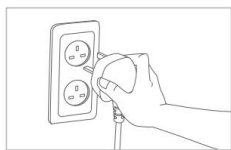

**!** ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอย่างแน่นหนาหรือไม่  
. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

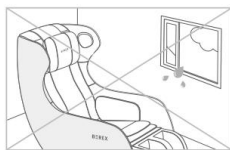

**!** ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง มีฝุ่นละอองหรือโดนน้ำกระเซ็น (ฝน)  
. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

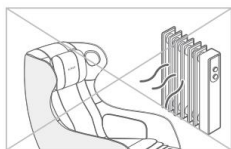


**!** ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า  
. มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้.




**!** ห้ามใช้หรือเก็บก๊าซหรือสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์  
. มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้.




**!** ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีพื้นเรียบ  
. หากติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเอียง อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

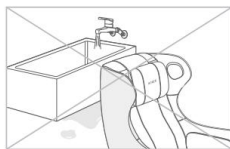


**!** ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่เปียกหรือมีความชื้น เช่น สระว่ายน้ำ หรือห้องน้ำ  
. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าลัดวงจร

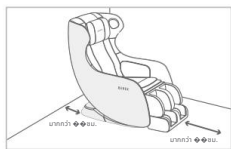

**!** ติดตั้งส่วนหลังของพนักพิงห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. และส่วนหน้าของส่วนบวดขาห่างจากผนังอย่างน้อย 50 ซม.  
. มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้า

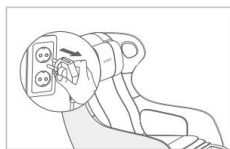


**!** หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว อย่าลืมปิดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก  
. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

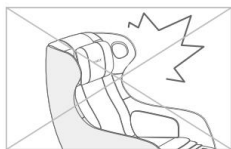


**!** ห้ามใช้แรงหรือแรงกระแทกกับผลิตภัณฑ์มากเกินไป  
. มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้า

## ในระหว่างการใช้งานโดยเด็ก (ทารก)

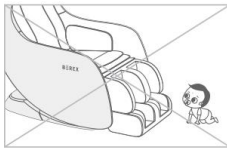

ระวังอย่าให้เด็กหรือสัตว์เลื้อยเข้าไปใต้เก้าอี้ ในส่วนด้านหลัง หรือส่วน  
ควบคุมขวา

. มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น เกิดการขีดขีด ถูกกดทับ และกระดุกหักได้

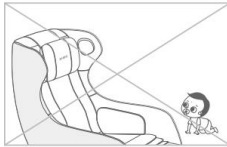

ถ้าขับเด็กๆ ไม่ให้ใช้งานผลิตภัณฑ์เพียงลำพังหรือผู้ที่ไม่  
สามารถแสดงออกได้ไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


นอกจากนี้ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

. มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้




โปรดอย่าอนุญาตให้เด็กปีนขึ้นไปหรือใช้เก้าอี้ขนาด

. มีความเสี่ยงที่จะตกหล่นหรือขีดขีด

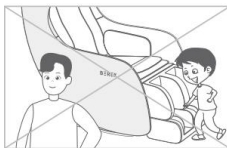


เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

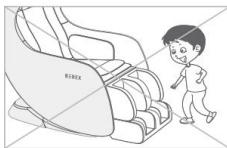

ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ด้วยตนเอง


## ในระหว่างการใช้งานโดยผู้สูงอายุ (กลุ่ม เสี่ยง)

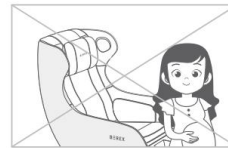

ผู้ช่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์:


. ผู้ที่มีอาการเคล็ดขัดยอกหรือมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งและหลุดจับปลิ้น

. สตรีมีครรภ์ในระยะเริ่มแรกหรือหลังคลอดบุตรทันที

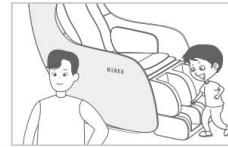

บุคคลที่ขาดความสามารถทางร่างกาย ประสบสัณผัส หรือจิตใจ (รวมถึง  
เด็ก ๆ) จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

. มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและสินค้าเสียหายได้

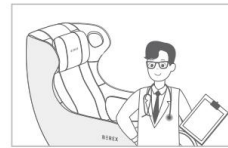

บุคคลต่อไปนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหลังจากปรึกษาแพทย์ อาจเกิดอุบัติเหตุ  
หรือเกิดสิ่งผิดปกติในร่างกายได้

. ผู้ที่ได้รับการรักษาจากแพทย์เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางร่างกาย

. ผู้ใช้ที่ลองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือเกิดผลข้างเคียง

# 1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย

**!** คำเตือน: ระบุถึงกรณีที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้หากละเมิดคำแนะนำ

**!** ข้อควรระวัง: ระบุถึงกรณีที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้เมื่อละเมิดคำแนะนำ

## ระหว่างการใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป




ห้ามใช้ฟังก์ชันการทำความร้อนเป็นเวลานาน

. มีความเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้ได้




หากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายขณะใช้ผลิตภัณฑ์ (เจ็บปวด ผื่นขึ้น คับ ฯลฯ) ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์

. มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อร่างกายและปัญหาสุขภาพ

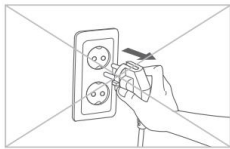

ห้ามดึงปลั๊กออกโดยใช้แรงในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

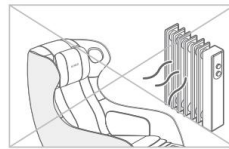


อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ที่สร้างความร้อนหรือความชื้นใกล้กับผลิตภัณฑ์

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้




ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ขัดข้อง ทำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ก่อนน้ำ หรือโดนความชื้น โปรดติดต่อศูนย์บริการ

. มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้.

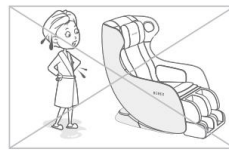


อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ขณะที่ร่างกายเปียกหลังอาบน้ำ หรือขณะที่ผมเปียกหลังสระผม

. มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้.

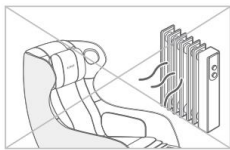

ห้ามวางผ้าห่มไฟฟ้าเหนือเก้าอี้บวด หรือใช้เครื่องทำความร้อนอื่นร่วมกัน

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

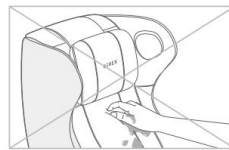

ห้ามสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะที่มือเปียก

. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต




อย่าเคลื่อนย้ายเก้าอี้บวดในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน

. มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล อุบัติเหตุ และสินค้าเสียหาย




ห้ามใช้เก้าอี้บวดนานเกิน 30 นาทีต่อครั้ง ห้ามบวดมากเกินไปหรือบวดเฉพาะจุดเกิน 5 นาที

. มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.

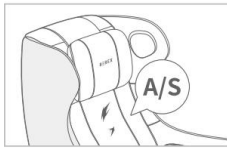

หากแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับที่และติดต่อศูนย์บริการ

· มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.

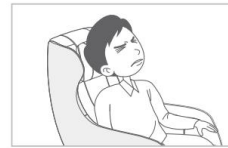

หากใช้แรงดันมากเกินไป อาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หายใจไม่ออก ฯลฯ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ดังนั้นโปรดระมัดระวังก่อนใช้งาน



ห้ามขบขบเก้าอี้สำหรับขวด

· มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์อื่นในนอกเหนือจากการใช้งาน (การนอนหลับ การกระโดด ฯลฯ)

· มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.



ลงจากเก้าอี้ทันทีเมื่อบนของผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์แล้ว

· หากก้าวลงจากส่วนขวดอาจทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดและมีเสียงดังได้



ห้ามกดลูกกลิ้งขวดโดยตรงด้วยมือหรือเหยียบด้วยเท้า

· มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและสินค้าเสียหายได้




ห้ามนั่งหรือยืนบนพนักพิงหรือที่วางเท้าของเก้าอี้ขวด

· มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและสินค้าเสียหายได้



ในการขวดบริเวณคอ ให้ใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งขวด และหลีกเลี่ยงการขวดด้วยแรงที่มากเกินไป

· มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

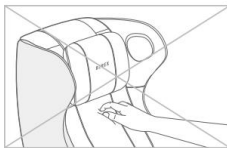

อย่าวางมือของคุณโดยตรงระหว่างลูกกลิ้งขวดในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน

· มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและสินค้าเสียหายได้



เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่สวมใส่เสื้อผ้าที่บางเกินไป เช่น เสื้อฟลอยหรือชุดชั้นใน

· มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.

# 1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย

**!** คำเตือน: ระบุถึงกรณีที่จะอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้หากละเมิดคำแนะนำ

**!** ข้อควรระวัง: ระบุถึงกรณีที่จะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้เมื่อละเมิดคำแนะนำ

## ระหว่างการใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป




ระวังอย่าให้เท้าของคุณเกี่ยวขึงกับผลิตภัณฑ์และสายควบคุม  
. มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้




ตำแหน่งให้ล้าอาจไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 155 ซม. หรือต่ำกว่า และ 180 ซม. ขึ้นไป




**!**  
น้ำหนักผู้ใช้ที่แนะนำคือ 100 กิโลกรัม หรือต่ำกว่า

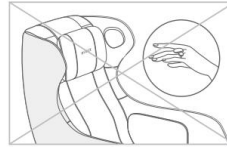

**!**  
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดถอดอุปกรณ์เสริม (สร้อยข้อมือ แหวน นาฬิกา ฯลฯ) ออกจากใช้งาน  
. มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.

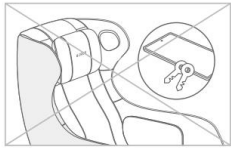


**!**  
เกล็ดของใบกระเป๋า (สารถไฟ, กระเป๋าเดินทาง, กุญแจ ฯลฯ) ให้เรียบร้อยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์  
. มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.

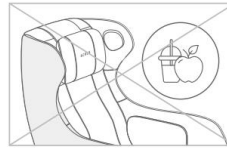

**!**  
อย่ารับประทานหรือดื่มน้ำขณะนั่งบนผลิตภัณฑ์  
. มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร่างกายและการเกิดอุบัติเหตุ.



**!**  
เมื่อใช้ลำโพงบลูทูธ อย่าใช้เสียงดังเป็นเวลานาน  
. มีความเสี่ยงต่อการเสียหายของกรังไคย

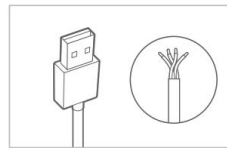

**!**  
ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนป้องกันเมื่อชาร์จโดยใช้พอร์ต USB  
. อาจเกิดไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรือระบบขัดข้องได้  
สายเคเบิลคุณภาพต่ำ หรือสายเคเบิลที่ไม่ได้รับการป้องกันโดยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
รอบ ๆ สายไฟ หรือตัดสายไฟอย่างผิดเพี้ยนอาจก่อให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยง  
ต่อสุขภาพ เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่มาจากภายนอก/ภายใน


## 2. ชื่อชิ้นส่วน

ปรับเบาะรองศีรษะด้วยมือ

คุณสามารถปรับเอนหรือถอดแผ่นรองศีรษะได้ตามต้องการ

ใบดูขนาดขาแบบปรับได้สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อจัดบริเวณที่ต้องการตั้งแต่ป้องกันหัวเข้า

### ภายนอกผลิตภัณฑ์

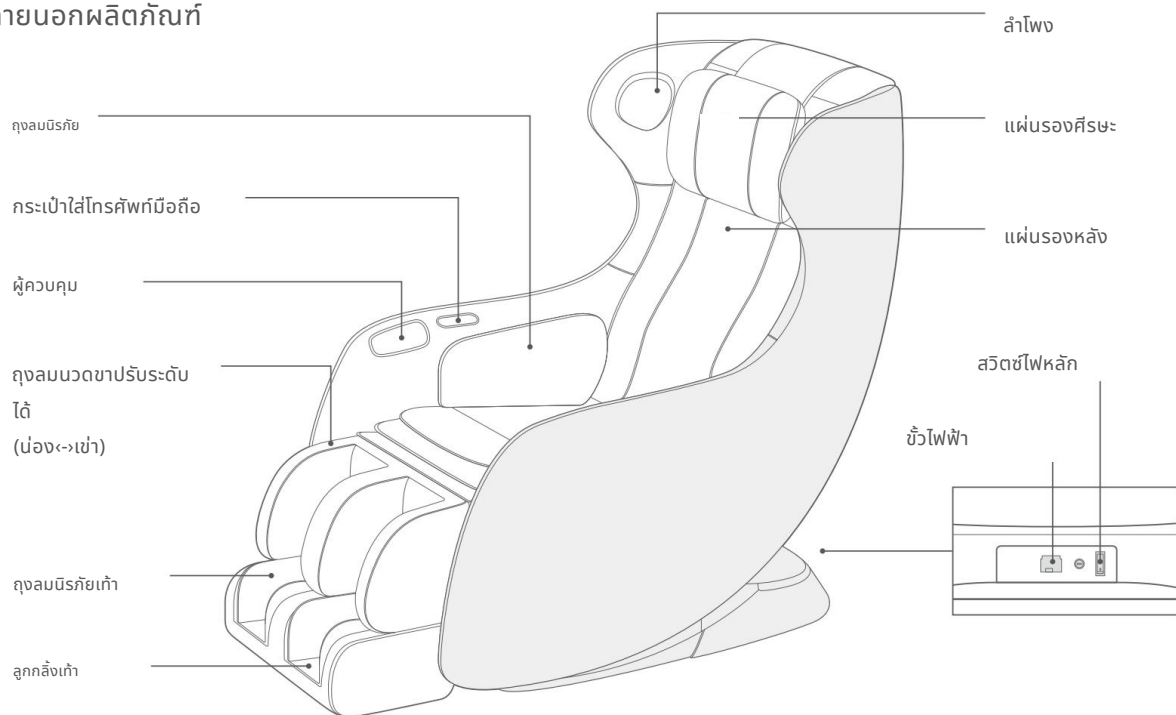

### ส่วนประกอบอื่น ๆ




คู่มือการใช้งาน



คู่มือการใช้งาน



ปลั๊กไฟ

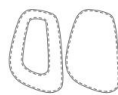

ฝาครอบลูกลมปรับศีรษะ



เบาะรองสะโพก



เบาะรองเก้าอี้

# 3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับไฟ 220-240 V~, 50/60 Hz เท่านั้น โปรดเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ 220-240 V~, 50/60 Hz ที่มีสายดิน  
เก้าอี้ชนิดจะทำงานปกติเฉพาะเมื่อเสียบปลั๊กไฟเท่านั้น

## คำเตือน

### ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้ยาและผู้ใช้ที่ต้องมีใบสั่งยา

#### • ผู้ป่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์:

- ผู้ที่ถูกบองว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้  
สินค้าที่แพทยเป็นผู้สั่งเนื่องจากโรคเส้นเลือด เส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดอุดตันรุนแรง เส้นเลือด  
อุดตันเฉียบพลัน ฯลฯ
- ผู้ที่สงสัยว่ามีภาวะกระดูกเคล็ดเฉียบพลัน (whiplash)
- ผู้ที่มีอาการเคล็ดข้อหรือมีอาการปวดหัวฉับพลัน และ  
การหลุดของเคล็ดหรือกล้ามเนื้อ
- ผู้ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ระยะแรกหรือหลังคลอดทันที
- ผู้ที่มีกระดูกสันหลัง (spine) ผิดปกติ อันเนื่องมาจาก  
อุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บในอดีต หรือผู้ที่มีกระดูกสันหลังกดข้ายกดขวา
- ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนขั้นรุนแรง
- ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวรุนแรง
- ผู้ที่มีอาการชักรุนแรงหรือโรคทางจิตเวช  
(ความผิดปกติในการรับรู้)
- ผู้ที่ใช้เครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังในร่างกาย
- ผู้ที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงความดัน  
ความรู้สึกเนื่องจากความผิดปกติของกรไหลเวียนโลหิตส่วนปลายในระดับสูงจากโรคเบาหวาน  
เป็นต้น
- ผู้ที่มีหรือกังวลเกี่ยวกับโรคกระดูกอักเสบ
- ผู้ที่มีการแสดงออกและการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำกัด
- ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาภาวะกระดูกหักที่ได้รับการวินิจฉัย
- ผู้ป่วยโรคจิตเภท หรือโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
- ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกเนื่องจากแรงกด
- ผู้ที่มีอาการอักเสบหรือบาดเจ็บที่ผิวหนังโดยตรง  
สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน
- ผู้ที่มีอาการโรคหัวใจรุนแรง
- ผู้ที่ได้รับคำแนะนำไม่ให้ใช้ตามคำตัดสินของแพทย์
- ผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดผิวหนัง (ผิวหนัง  
การผ่าตัด)
- ผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด

#### • บุคคลต่อไปนี้ควรใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากปรึกษาหารือแล้ว ก่อน.

- ผู้ที่อาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์  
เช่นสตรีมีครรภ์
- ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติเนื่องจากอาการอักเสบเฉียบพลันและหนาวสั่น
- ผู้ที่มีโรคผิวหนังเฉียบพลัน เนื่องจากภัย หรือ  
โรคผิวหนังอื่น ๆ
- ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและต้องการความมั่นคงตามสมควร
- ผู้ที่รู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติอื่นๆ ในร่างกาย
- ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน
- ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยหรือกำลังเข้ารับการรักษา  
การรักษาอาการต่างๆ เช่น อาการเวียนศีรษะหรืออาการมีของ  
ผู้ที่ประสบกับความรู้สึกเสื่อม
- ผู้ที่มีอาการไข้ หรือเป็นโรคเบาหวาน
- ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ  
การเกิดข้างของหมอบรองกระดูกเคล็ดเฉียบพลันหรือโรคตีบของกระดูกสันหลังส่วนเอว
- ผู้ที่มีอาการแพ้หรือไวต่อความร้อนมากเกินไป
- ผู้ที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรคต่างๆ  
พวกเขา



### ข้อควรระวังเมื่อเกิดความล้มเหลว

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าถอดประกอบผลิตภัณฑ์ตามดุลพินิจของคุณ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจมีข้อบกพร่องและอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ ก่อนที่คุณจะโทรติดต่อ Careline โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อดำเนินการ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เราจะจัดการให้โดยเร็วที่สุด



## ข้อควรระวัง

### ข้อควรระวังก่อนการใช้

- หากคุณมีโรคที่คุณไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ เนื่องจากอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ตรวจสอบวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์หากมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
- เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ควรเริ่มด้วยการนวดเบาๆ
- ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม “เปิด/ปิด” ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์.
- ตรวจสอบระยะเวลาการนวดของผลิตภัณฑ์
- หากฝ่าผลิตภัณฑ์ที่ฉีกขาดหรือหลุดลอกออก เสื้อผ้าหรือเส้นผมอาจมีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ควรตรวจสอบว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
- เมื่อใช้การตั้งค่าอุณหภูมิสูง ควรระมัดระวังเผาไหม้และนำไปใช้ได้กับอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามสภาพของคุณสภาพร่างกายและผิว หากคุณมีผิวแพ้ง่าย ให้ตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
- เด็ก ผู้ที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตนเองและผู้ที่มีความไวต่อผิวหนังน้อยควรระวังความเสี่ยงต่อการไหม้จากอุณหภูมิต่ำแม่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำก็ตาม (ควรสวมเสื้อหากุ๊กครั้งขณะใช้ผลิตภัณฑ์)
- ระวังพื้นผิวที่ร้อนของผลิตภัณฑ์หากคุณอ่อนไหวต่อความร้อน
- ผลิตภัณฑ์นี้มีพื้นผิวที่ความร้อน โปรดระวังหากคุณไม่ไวต่อความร้อน

### ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน

- เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและสะดวก โปรดอ่านคำแนะนำนำผู้ใช้ อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ภายในอาคารสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้กลางแจ้ง ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการทดลอง หรือเพื่อการอุตสาหกรรม
- ระวังความเสี่ยงในการตกหรือลื่นเมื่อขึ้นหรือลงจากผลิตภัณฑ์
- เมื่อจะถอดประกอบผลิตภัณฑ์ ให้ปิดเครื่องผ่านตัวควบคุมและถอดปลั๊กออก
- ระวังอย่าให้น้ำหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายติดอยู่ระหว่างตัวหลักและแผงขา
- ควรระมัดระวังในการใช้งานฟังก์ชันการทำความร้อนของผลิตภัณฑ์
- ระวังอาการอาเจียนหรือเวียนศีรษะหากใช้ทันทีหลังอาหาร ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคุณ
- ห้ามเสียบผลิตภัณฑ์อื่นหรือผลิตภัณฑ์หลายรายการเข้ากับปลั๊กไฟเพียงอันเดียวพร้อมกัน
- ห้ามวางวัตถุไวไฟ เช่น ผ้าห่ม ไรบนผลิตภัณฑ์ยกเว้นส่วนประกอบที่รวมอยู่
- สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุดการผลิต
- ใช้ลูกกลิ้งนวดโดยไม่ต้องปิดตัวการรักษาที่ทำงานที่ถูกต้อง
- ห้ามใช้เครื่องสำอางหรือยาใดๆกับผลิตภัณฑ์

### 3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับไฟ 220-240 V~, 50/60 Hz เท่านั้น โปรดเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ 220-240 V~, 50/60 Hz ที่มีสายดิน  
เก้าอี้นวดจะทำงานปกติเฉพาะเมื่อเสียบปลั๊กไฟเท่านั้น

#### ข้อควรระวัง

##### ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน

- หากคุณรู้สึกกระคายเคืองเจ็บปวดหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีและไปพบแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงกับส่วนที่ให้ความร้อนและชิ้นส่วนมอเตอร์ที่เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
- สิ่งเคาะระยะเวลาการนวดของผลิตภัณฑ์
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่าใช้ร่วมกับเครื่องสันสะเทือนหรือเสื่อไฟฟ้าอื่นๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมกันเกิน 2 คนเวลา.
- ระวังอย่าให้บริเวณการนวดของผลิตภัณฑ์เสียหาย พร้อมเครื่องประดับ (เครื่องประดับผม, สร้อยคอ, นาฬิกาข้อมือ, กำไลข้อมือ, แหวน ฯลฯ)
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและส่วนหนึ่งของพื้นที่ผลิตภัณฑ์

##### ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

- ควรระวังเนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ได้  
การใช้ผลิตภัณฑ์
- รอยชลอก รอยฟกช้ำ รอยฟกช้ำ รอยแดง รอยย่น ฯลฯ
- ความเสียหายต่อกล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท กระดูกสันหลัง และอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานและแรงกดของผลิตภัณฑ์ที่มากเกินไป
- โรคผิวหนังและแผลไหม้ เป็นต้น
- กระดูกหักและเคลื่อน เคล็ดขัดยอก ฯลฯ
- โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ/ระบบย่อยอาหาร และหายใจไม่ออก เป็นต้น

##### ตรวจสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของ ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่รอบๆผลิตภัณฑ์.
- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติโดยถอดสวิตช์ทั้งหมดตามลำดับตามคู่มือนี้
- ก่อนใช้งาน ให้ปรับเมนูขณะยกตัวให้ตรงการเอนกายและใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยการกระตุ้นที่อ่อนๆ ในตอนแรก

---

### ข้อควรระวังเมื่อเกิดความล้มเหลว

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าถอดประกอบผลิตภัณฑ์ตามดุลพินิจของคุณ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจมีข้อบกพร่องและอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ ก่อนที่คุณจะโทรติดต่อ Careline โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อดำเนินการ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เราจะจัดการให้โดยเร็วที่สุด

---

### ข้อควรระวัง

#### ไม่รับผิดชอบต่อ สิ่งต่อไปนี้:

- หากคุณไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการใช้งาน
- หากผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่โดยบุคคลที่สาม นอกเหนือจากศูนย์บริการ Coway บริษัทพันธมิตร หรือวิศวกรที่ได้รับมอบหมาย อันส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหรืออุบัติเหตุ
- หากเกิดความล้มเหลวเนื่องจากภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าผ่า ฯลฯ)


#### โปรดเก็บคู่มือผู้ใช้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

#### เมื่อจะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อย่าเคลื่อนย้ายโดยพลการและติดต่อศูนย์บริการ Coway

- อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น พื้นเป็นรอยขีดข่วนได้

# 1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก

## ผู้ควบคุม

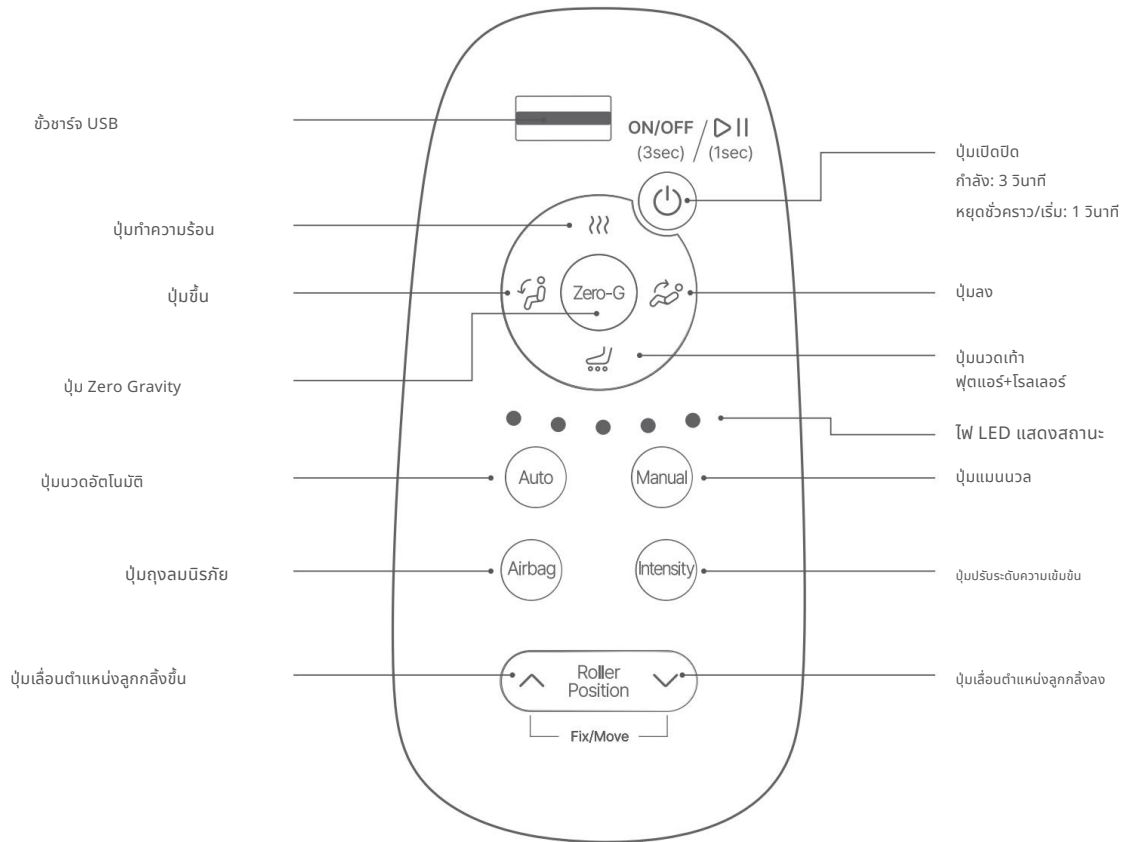

## ฟังก์ชันหลัก




### ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์
- เมื่อเปิดเครื่อง เก้าอี้จะมอนอลงในท่าเบดเริ่มต้น
- หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปในระหว่างใช้งาน ฟังก์ชันทั้งหมดจะสิ้นสุดลง และเก้าอี้และโมดูลการมวดจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
- หากกดปุ่มสั้นๆ ขณะมวด ฟังก์ชันทั้งหมดจะหยุดชั่วคราวและไฟ LED 3 ดวง (LED 1, 3, 5) จะกะพริบ
- หากกดปุ่มสั้นๆ ระหว่างช่วงหยุดชั่วคราว การมวดจะดำเนินต่อไปในสถานะก่อนหน้า โดยช่วงหยุดชั่วคราวจะโปร่นอยู่ในระยะเวลาการมวด



### ปุ่มทำความร้อน

- เปิดหรือปิดฟังก์ชันการทำความร้อน
  - ฟังก์ชันการทำความร้อนทำงานพร้อมกันที่หลัง กระดูกเชิงกราน และขา (ซ้าย/ขวา)
- ข้อควรระวัง:** มีความเสี่ยงต่อการไหม้ได้หากใช้ฟังก์ชันทำความร้อนเป็นเวลานาน
- จะทำงานครั้งละ 15 นาที และปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที

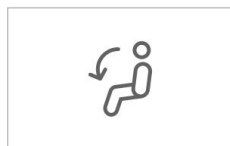

### ปุ่มขึ้น

- เก้าอี้จะตั้งขึ้นโดยกดปุ่ม



### ปุ่มลง

- มอนเก้าอี้ลงโดยกดปุ่ม



### ปุ่มมวดเท้า

- การมวดเท้าจะช่วยกระตุ้นการมวดเท้าด้วยลมและลูกกลิ้งมวดเท้า
- ● ● ● ● ● ฟุตแอร์+ลูกกลิ้งเท้า
  - ● ● ● ○ อากาศเท้า
  - ○ ○ ● ● ● ลูกกลิ้งเท้า
  - ○ ○ ○ ○ มวดเท้า ปิด



### ปุ่ม Zero Gravity

- หากคุณกดปุ่ม เก้าอี้จะลู่จากองในตำแหน่ง Zero Gravity
- หากคุณปรับมุมของเก้าอี้ในตำแหน่งเอนได้มถ่วงเป็นศูนย์ โคมองเอนได้มถ่วงเป็นศูนย์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- หากกดปุ่ม Zero Gravity อีกครั้งที่ตำแหน่ง Zero Gravity การมวดจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น




---

## 2. วิธีการใช้งาน

---


### 01. เปิดเครื่อง

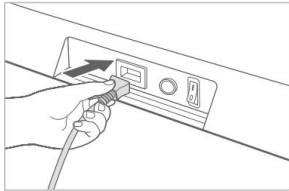

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเก้าอี้นวด



2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ

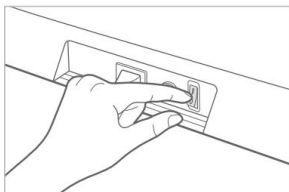

3. เปิดสวิตช์ไฟหลักที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

## 2. วิธีการใช้งาน

### 02. นั้งบนเก้าอี้นวดโดยให้ตัวตรง




การนั่งบนเก้าอี้นวดที่ถูกต้อง

นำคิ่นและหลังส่วนล่างของคุณมาใกล้กับเก้าอี้นวดให้มากที่สุดแล้วนั่งลงบนนั้น

- ห้ามลุกออกจากเก้าอี้นวดโดยใช้แรงในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ การกระทำดังกล่าวอาจใช้แรงกับผลิตภัณฑ์จนทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้ได้
- เมื่อใช้ลำโพงบลูทูธ ให้ตั้งระดับเสียงให้เหมาะสม เสียงดังมากอาจทำให้สูญเสียการได้ยินได้


### 03. กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวควบคุม

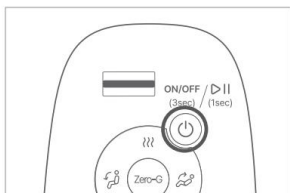

- หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะเปิดขึ้นและเก้าอี้นวดจะนอนลงในตำแหน่งการนวดเริ่มต้น ในเวลานี้ ไฟ LED บนตัวควบคุมจะสว่างขึ้นตามลำดับ
- หลังจากนั้น หากคุณกดโหมดการนวดที่ต้องการ การนวดจะเริ่มขึ้นเมื่อสัมผัสไหล่ หากไม่รู้สึกถึงไหล่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
- หากเลือกโหมดการนวดขณะเคลื่อนเข้าสู่การนวดพื้นฐาน การนวดจะเริ่มขึ้นหลังจากเคลื่อนเข้าสู่การนวดพื้นฐานอย่างสมบูรณ์

# 3. การเลือกโหมดการนวด

## 01. นวดอัตโนมัติ

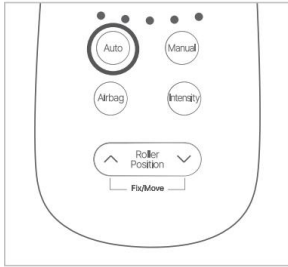

ใบโหมดอัตโนมัติ โหมดอัตโนมัติจะเป็นแสง LED

โหมดอัตโนมัติทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการผสมผสานโหมดการนวด เช่น การนวดและการแตะ เข้ากับฟังก์ชันการนวดด้วยลมขณะเคลื่อนไปยังโมดูลการนวด กดปุ่มการนวดด้วยลมบนตัวควบคุมเพื่อเลือกโหมดการนวดอัตโนมัติ 6 โหมด


- ○ ○ ○ ○ หลีกสุด Auto 1 - VITALITY
- ● ○ ○ ○ หลีกสุด Auto 2 - NECK/SHOULDER
- ○ ● ○ ○ Auto 3 - หลีกสุด RELAX
- ○ ○ ● ○ ออโต้ 4 - หลีกสุด WAIST
- ○ ○ ○ ● Auto 5 - หลีกสุด SLEEP
- ● ● ● ● หลีกสุด Auto 6 - POWER
- ○ ○ ○ ○ ปิด

• กดปุ่มอัตโนมัติบนตัวควบคุมเพื่อเลือกโหมดการนวดอัตโนมัติ 6 โหมด

• หากคุณกดปุ่ม โหมดจะถูกเลือกตามลำดับดังนี้ อัตโนมัติ 1 > อัตโนมัติ 2 > อัตโนมัติ 3 > อัตโนมัติ 4 > อัตโนมัติ 5 > อัตโนมัติ 6 > ปิด > อัตโนมัติ 1

• ระยะเวลาการนวดสำหรับแต่ละโหมดคือ 15 นาที

## 02. การนวดด้วยมือ

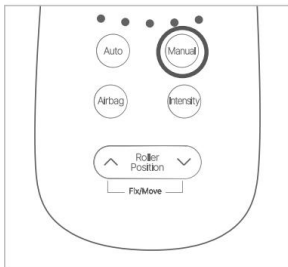

ใบโหมด Manual มันจะกะพริบ

ใบโหมดแบบมวล ผู้ใช้เลือกโหมดการนวดด้วยตนเองในขณะที่โมดูลการนวดจะเลื่อนขึ้นและลงซ้ำๆ กดปุ่มแบบมวลบนตัวควบคุมเพื่อเลือกโหมดการนวดด้วยตนเอง 6 โหมด

- ○ ○ ○ ○ คู่มือ 1 - การผสม (เกาะ + นวด)
- ● ○ ○ ○ คู่มือ 2 - การนวด
- ○ ● ○ ○ คู่มือที่ 3 - การกดจุด
- ○ ○ ● ○ คู่มือ 4 - การเกาะ
- ○ ○ ○ ● คู่มือ 5 - การแตะ
- ● ● ● ● คู่มือ 6 - รวม
- ○ ○ ○ ○ ปิด

• กดปุ่ม Manual บนตัวควบคุมเพื่อเลือกโหมดการนวดด้วยตนเอง 6 โหมด

• หากคุณกดปุ่ม โหมดจะถูกเลือกตามลำดับของ Manual 1 > Manual 2 > Manual 3 > คู่มือ 4 > คู่มือ 5 > คู่มือ 6 > ปิด > คู่มือ 1.

• ระยะเวลาการนวดสำหรับแต่ละโหมดคือ 15 นาที


## 03. นวดจบ

- ระยะเวลาในการนวดแต่ละคอร์สเริ่มต้นคือ 15 นาที
- หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลา 3 วินาทีระหว่างใช้งาน ฟังก์ชันทั้งหมดจะสิ้นสุดลง และเก้าอี้และโมดูลการนวดจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

- หากการนวดเสร็จสิ้นแล้ว เก้าอี้จะยังคงอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายจนกว่าคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
- เวลาใช้งานต่อเนื่องสูงสุดคือ 1 ชั่วโมง และเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจาก 1 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดการนวดใดก็ตาม

## 4. วิธีใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม


### 01. นวดด้วยลูกกลมนิรภัย (สามารถนวดบริเวณที่ต้องการระหว่างอุ้งเชิงกรานและขาได้)

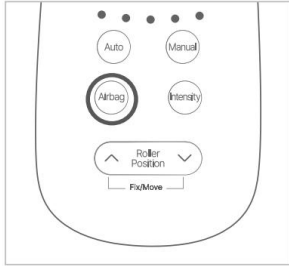

- เมื่อระบบมวลลมปิดอยู่ (โหมดแบบมวลหรือเปิดเครื่องเก้าอี้นวดและอยู่ในโหมดสแตนด์บาย)  
เมื่อคุณกดปุ่ม Airbag การนวดด้วยลมจะทำงานตามลำดับจาก ผสม (กระดูกเชิงกราน + ขา) > กระดูกเชิงกราน > ขา > ปิด > ผสม (กระดูกเชิงกราน + ขา)
- เมื่อระบบมวลด้วยลมเปิดอยู่ (โหมดอัตโนมัติ)  
เมื่อคุณกดปุ่ม Airbag ระบบจะทำงานตามลำดับ OFF > Mixed (กระดูกเชิงกราน + ขา) > กระดูกเชิงกราน > ขา > OFF




### 02. การนวดเท้า (สามารถนวดบริเวณที่ต้องการระหว่างเท้าได้)

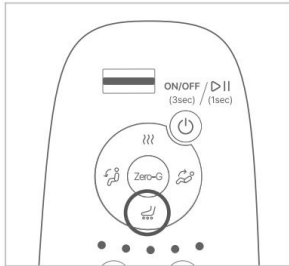

- เมื่อการนวดเท้าปิดอยู่ (โหมดแบบมวลหรือเปิดเครื่องเก้าอี้นวดและอยู่ในโหมดสแตนด์บาย)  
เมื่อคุณกดปุ่ม Foot การนวดด้วยลมจะทำงานตามลำดับของ Mixed (Foot air+foot roller) > Foot air > Foot roller > OFF > Mixed (Foot air+foot roller)
- เมื่อการนวดเท้าเปิดอยู่ (โหมดอัตโนมัติ)  
เมื่อคุณกดปุ่ม Foot มันจะทำงานตามลำดับดังนี้ OFF > Mixed (Foot air+Foot roller) > Foot air > Foot roller > OFF




### 03. การปรับตำแหน่งลูกกลิ้งนวด

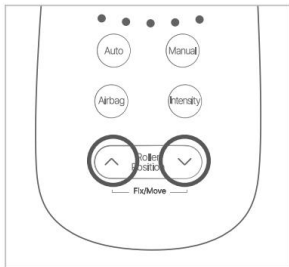

- ขณะกดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้น โนตุลการนวดจะเคลื่อนขึ้น
- ขณะกดปุ่มลดตำแหน่งลูกกลิ้ง โนตุลการนวดจะเคลื่อนลง
- หลังจากย้ายตำแหน่งลูกกลิ้งแล้ว โนตุลการนวดจะหยุดที่จุดนั้นและนวดอย่างเข้มข้น เช่นเดิมแล้ว
- ในระหว่างการนวดแบบอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง หากคุณกดปุ่ม "Roller Position Up/Down" ปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือทั้งสองปุ่มพร้อมกัน โนตุลการนวดจะหยุดที่จุดที่ต้องการและกลับสู่โหมดการนวดที่เลือกไว้ • ในระหว่างการนวดแบบคงที่ (โนตุลการนวดหยุดลง) ให้กดปุ่ม Roller Position Up/Down พร้อมกันเพื่อกลับสู่โหมดการนวดก่อนหน้า

- อย่างไรก็ตาม โนตุลการนวดแบบมวล 3 (การกดจุด) ตำแหน่งลูกกลิ้งจะไม่หยุด แต่จะเปลี่ยนทิศทาง

#### 04. การปรับความเข้มข้น (สามารถปรับความเข้มข้นของลมและลูกกลิ้งขนาดได้)

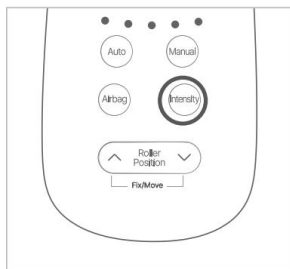


• เมื่อความเข้มข้นของการมวดเพิ่มขึ้น ความเร็วของลูกกลิ้งขนาดก็จะเพิ่มขึ้น และความเข้มข้นของอากาศก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

• ความเข้มข้นเริ่มต้นของโหมดการมวดทั้งหมดคือ 3 และหากคุณกดปุ่ม โหมดต่างๆ จะถูกเลือกตามลำดับ 4 > 5 > 1 > 2 > 3 > 4.

ความเข้มข้นถูกนำไปใช้กับโมดูลการมวดและการมวดด้วยอากาศในเวลาเดียวกัน

- ○ ○ ○ ○ ความเข้มข้น 1
- ● ○ ○ ○ ความเข้มข้น 2
- ● ● ○ ○ ความเข้มข้น 3
- ● ● ● ○ ความเข้มข้น 4
- ● ● ● ● ความเข้มข้น 5

#### 05. ฟังก์ชันการทำความร้อน (สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันการทำความร้อนได้)

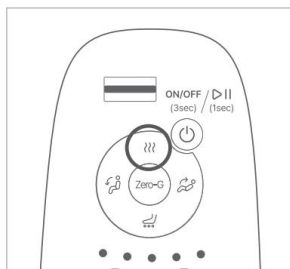

• คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันทำความร้อนได้โดยกดปุ่มทำความร้อน เครื่องทำความร้อนจะทำความร้อนที่หลัง กระตุกเชิงกราน และขา (ซ้าย/ขวา) ในเวลาเดียวกัน

• การเปิดฟังก์ชันการทำความร้อน: หากคุณกดปุ่มการทำความร้อนขณะที่ฟังก์ชันการทำความร้อนปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะ- LED จะเปิดตามลำดับจากด้านในไปด้านนอก และฟังก์ชันการทำความร้อนจะเปิดขึ้น



• การปิดฟังก์ชันการทำความร้อน: หากคุณกดปุ่มการทำความร้อนขณะที่ฟังก์ชันการทำความร้อนเปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะ- LED จะดับลงตามลำดับจากด้านนอกไปยังด้านใน และฟังก์ชันการทำความร้อนจะปิด




**!** มีความเสี่ยงต่อการไหม้ได้หากใช้งานฟังก์ชันทำความร้อนเป็นเวลานาน

---

## 4. วิธีใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม

---

### 06. การปรับตำแหน่งการนวดขา (สามารถปรับตำแหน่งการนวดขาได้)

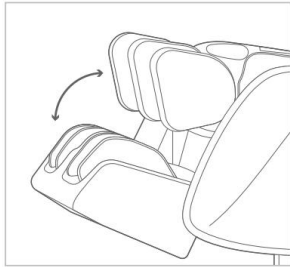

#### การปรับตำแหน่งการนวดขาด้วยลม (Manual)


- คุณสามารถจับตรงกลางของโมดูลนวดขาและเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
- โหมดการนวดสามารถเคลื่อนจากน่องไปจนถึงหัวเข่าได้

#### การปรับความยาวของการนวดเท้า (แบบแมนนวล)

- สามารถปรับความยาวของส่วนขาให้เหมาะกับสรีระของคุณได้โดยการดันลง

---


### 07. การปรับมุมของเก้าอี้นวด (สามารถปรับมุมของเก้าอี้นวดได้)

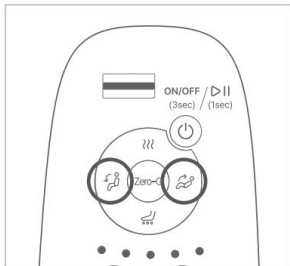

- คุณสามารถปรับมุมของเก้าอี้นวดได้โดยการกดปุ่มขึ้น/ลงบนตัวควบคุม
- หากคุณกดปุ่มลง เก้าอี้จะบอบลงในขณะที่กด ส่วนหลังและขาจะทำงานในเวลาเดียวกัน
- หากคุณกดปุ่มขึ้น เก้าอี้จะตั้งขึ้นในขณะที่กด ส่วนหลังและขาจะทำงานในเวลาเดียวกัน


---

### 08. โหมดไร้แรงโน้มถ่วง

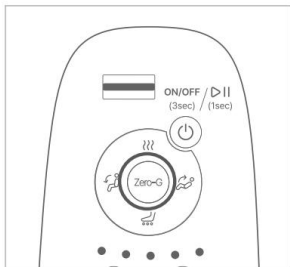

- การตั้งค่า: หากคุณกดปุ่ม Zero Gravity เก้าอี้จะเคลื่อนที่ไปยังมุม Zero Gravity ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
- การปิดใช้งาน: หากคุณกดปุ่มขึ้น/ลงในโหมด Zero Gravity โหมด Zero Gravity จะถูกปิดใช้งาน หากคุณกดปุ่ม Zero Gravity ในโหมด Zero Gravity โหมด Zero Gravity จะถูกปิดใช้งานและกลับสู่ตำแหน่งการนวดเริ่มต้น

## 09. หยุดชั่วคราว


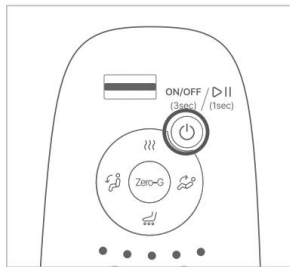


1. ในระหว่างทางกด ใช้ กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวควบคุมสั้นๆ (เป็นเวลา 1 วินาที) หากกดปุ่มสั้นๆ ขณะเปิด ฟังก์ชันทั้งหมดจะหยุดชั่วคราวและไฟ LED 1, 3, 5

- ) จะกะพริบ

2. หากคุณกดปุ่มสั้นๆ (1 วินาที) ในระหว่างช่วงหยุดชั่วคราว ข้อความจะดำเนินการต่อในสถานะก่อนหน้า เวลาในการนับจะไม่รวมในช่วงที่หยุดชั่วคราวด้วย

## 10. การปิดเครื่อง

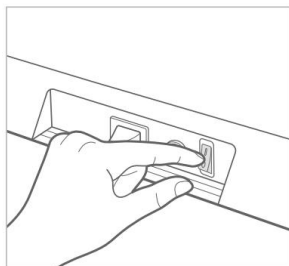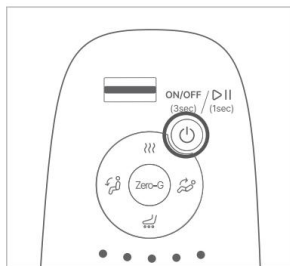

1. กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวควบคุมค้างไว้ 3 วินาที, 3 วินาทีหรือนานกว่านั้น ตำแหน่งของเก้าอี้ขนาดและลูกกลิ้งขนาดจะเลื่อนกลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ปิดสวิตช์ไฟหลักที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

## 11. การใช้ลำโพงบลูทูธ

- ในการใช้ลำโพงบลูทูธ ให้เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผ่านทางบลูทูธ
- หากคุณเปิดฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ระบบจะค้นหาตามชื่อ 'COWAY B02-\*\*\*\*\* (หมายเลขซีเรียล)'. (รหัสผ่าน: 9999)
- หากเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์อื่น ให้ปิดหรือยกเลิกการเชื่อมต่อฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพง ลงทะเบียนหรือเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่ต้องการ
- ลำโพง Bluetooth อาจไม่เข้ากันได้กับอุปกรณ์บางรุ่น

---

# 1. วิธีการทำความสะอาด

- อย่าลืมถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาด
  - ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือฉีดน้ำกับผลิตภัณฑ์
  - ห้ามใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ (กินเนอร์ ฯลฯ) สารฟอกขาว หรือผงซักฟอกที่มีคลอรีนหรือสารกัดกร่อนในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- 

## ตัวหลัก



เช็ดภายนอกและฝาปิดของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งนุ่ม

- เมื่อเปียก ให้ซับผ้าด้วยน้ำเล็กน้อย แล้วเช็ดคราบเปียกออก
- อย่าลืมเอาน้ำที่เหลือออก
- ห้ามซักผ้าคลุมผลิตภัณฑ์ในเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามรีดผ้าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยเตารีด เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

---

## ผู้ควบคุม



เช็ดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ


- เมื่อเปียก ให้ซับผ้าเล็กน้อยด้วยน้ำแล้วเช็ดสิ่งปนเปื้อนออก
- อย่าลืมเอาส่วนน้ำที่เหลือนอก
- รรจจะอย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในซ็อกเก็ต USB

---

---

---

## กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ

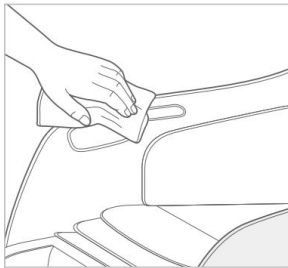

เช็ดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ

• หากมีสิ่งปนเปื้อนจำนวนมากภายใน ให้ดูดสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นออกด้วยเครื่องดูดฝุ่นแล้วเช็ดออก • หากมีความชื้นอยู่ภายใน ให้เช็ดกระเป๋าโทรศัพท์มือถือหลังจากเช็ดความชื้นออกแล้ว

# 1. การแก้ไขปัญหา

อาการ	ตรวจสอบ	มาตรการตอบโต้
เสียงดังมาก.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีเสียงเกิดขึ้นในขณะที่ฟังก์ชันการมวดด้วยลมกำลังทำงาน</li> <li>• เสียงนอกระยะหรือระยะ-ขนาดทำงาน</li> <li>• มีเสียงดังทุกที่ทุกเมื่อเคาะ</li> <li>• มีเสียงดังทุกที่ทุกเมื่อลูกกลิ้งมวดตุบ</li> </ul>	เป็นเสียงที่เกิดขึ้นขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ
ไฟไม่หมุน บน.	สวิตช์ไฟที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดได้	เปิดสวิตช์ไฟด้านหลัง
	การสัมผัสที่ไม่ดีกับเต้าเสียบปลั๊กไฟ	เสียบปลั๊กไฟและเต้าเสียบให้ถูกต้อง
	ปลั๊กไฟชำรุดและการเชื่อมต่อหลวม	ติดต่อแคร์ไลน์
	พิวส์หลุดออกจากเต้าเสียบและ Power PBA ทำงานผิดปกติ	ติดต่อแคร์ไลน์
สินค้าหยุดกะทันหันขณะมวด	ปิดสวิตช์ไฟที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ รอประมาณ 5 วินาที แล้วเปิดสวิตช์ไฟอีกครั้ง	หากกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องหลังจากทำตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้ว แต่ผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กไฟ และติดต่อศูนย์บริการ A/S
	ตรวจสอบว่าเก้าอี้มวดกลับคืนสู่ตำแหน่งเริ่มต้นหรือไม่	กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อรีเซ็ต
ไม่ว่าโหมดจะอยู่ที่ใดก็ตาม เครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อใช้เก้าอี้มวดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง	คุณใช้แรงกับลูกกลิ้งมวดมากเกินไปหรือไม่	กรุณาหมุนตัวเล็กน้อย หากผลิตภัณฑ์ทำงานปกติ ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ล้มเหลว
		* หากผู้ใช้มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไปใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดระวัง เพราะอาจเกิดขึ้นได้
ฟังก์ชันปรับเอนไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่ามีสารรบกวนรอบ ๆ ผลิตภัณฑ์หรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำจัดสารรบกวนระหว่างพนักพิงและขา และใช้งานผลิตภัณฑ์</li> <li>• มีพื้นที่ด้านหลังพนักพิงเพียงพอสำหรับการนอนลง.</li> </ul>
ระหว่างการใช้งาน ลูกกลิ้งมวดจะติดอยู่ในผ้าชั้นในหรือเตียงกลับ	แรงเสียดทานระหว่างลูกกลิ้งมวดและเบาะนั่ง	ยื่นใช้ความผิดปกติ แต่เป็นเพียงอาการชั่วคราวที่เกิดจากลูกกลิ้งมวดขณะมวด
ถุงลมบีบรั่วไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก่อเชื่อมต่ออากาศลูกกลิ้งมวดออก</li> <li>• สายไฟที่เกี่ยวกับอากาศขาด</li> </ul>	ติดต่อแคร์ไลน์

## 2. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า	โคเวย์ เอ็มซี-บี02 ไมน์ พลัส เก้าอี้นวดไฟฟ้า	
ชื่อรุ่น	MC-B02 (Mine Plus)	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์~, 50/60 เฮิรตซ์	
การใช้พลังงาน	130 วัตต์	
ขนาด	เมื่อตั้งขึ้น	1 250 มม. (กว้าง) X 740 มม. (ลึก) X 1 030 มม. (สูง)
	เมื่อวางลง	1 510 มม. 1510 มม. (กว้าง) x 740 มม (ลึก) x 770 มม. (สูง)
น้ำหนัก	58.5 กก.	
ยูเอสบี	กระแสตรง 5 โวลต์ 2 แอมป์	

• อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

---

## 3.การรับประกัน

- โปรดดูแบบฟอร์มใบสั่งซื้อของคุณสำหรับนโยบายพื้นฐานของเราสำหรับการรับประกันผลิตภัณฑ์สำหรับเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโปรดทราบว่าเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของมาเลเซีย

---

บันทึก

---

**coway**

# Coway MC-B02 Mine Plus Massage Chair

User Manual

This product cannot be used if the voltage is different from that mentioned in the rating plate. For your safety and proper use of the product, please read this User Manual before use.

## Dear Coway customers

Thank you for using the Coway Massage Chair.

Please read this user manual carefully for the correct use and maintenance of the product.

You can refer to the user manual to troubleshoot product issues while using it.

Intended use: Helps temporarily relax specific muscles and helps increase blood circulation temporarily

**coway**

User Manual

---

## III Before Use

- |                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Safety information | 4  |
| 2. Parts Name         | 11 |
| 3. Check before use   | 12 |

---

## III How to Use

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. Controller and Main Functions   | 16 |
| 2. How to Use                      | 19 |
| 3. Massage Mode Selection          | 21 |
| 4. How to Use Additional Functions | 22 |

---

## III Maintenance

- |                 |    |
|-----------------|----|
| 1. How to Clean | 26 |
|-----------------|----|

---

## III Others


- |                    |    |
|--------------------|----|
| 1. Troubleshooting | 28 |
| 2. Specification   | 29 |
| 3. Warranty        | 30 |

# 1. Safety Information


**⚠ Warning:** Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

**⚠ Caution:** Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


## Power

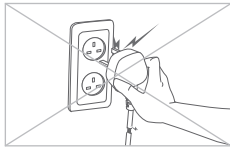

**⚠** Do not use a damaged power plug or loose sockets.  
· There is a risk of electric shock or fire.

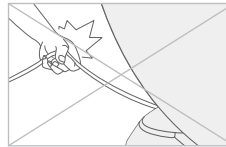


**⚠** Do not pull on the power plug to move the product.  
· There is a risk of electric shock or fire.

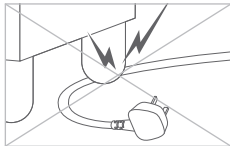

**⚠** Do not bend the power plug excessively or put it under a heavy object to avoid damage or deformation.  
· There is a risk of electric shock or fire.




**⚠** When the power area comes into contact with water, unplug the power plug and completely dry it prior to use.  
· There is a risk of electric shock or fire.

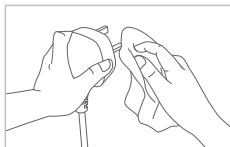


**⚠** Completely wipe off dust, water, etc., on the power plug's pins and areas of contact with the pins.  
· There is a risk of electric shock or fire.




**⚠** Be sure to insert the power plug into a 220-240 V~, 50/60 Hz outlet.  
· There is a risk of electric shock or fire.

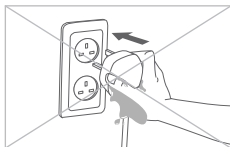


**⚠** Do not touch the power plug with wet hands.  
· There is a risk of electric shock or fire.

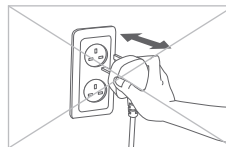

**⚠** Do not plug or unplug the power plug repeatedly.  
· There is a risk of electric shock or fire.

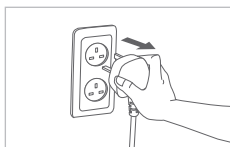


**⚠** Be sure to unplug the power cord while repairing or inspecting the product or changing its parts.  
· There is a risk of electric shock or fire.

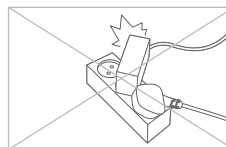


**⚠** Do not connect multiple electronic devices to one power outlet. Always use a separate outlet for the product.  
· There is a risk of electric shock or fire.


These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.  
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

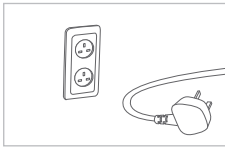


- !** If you don't use it for a long time, then disconnect the power adapter.
- There is a risk of electric shock or fire.

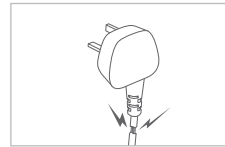


- !** If the power plug is damaged, do not attempt to replace the plug. Instead, contact the service center to replace it.
- There is a risk of electric shock or fire.

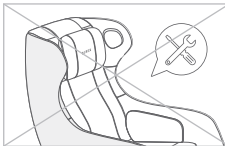


- !** Never arbitrarily disassemble, repair, or remodel the product.
- It may cause a product failure, and there is a risk of electric shock or fire.

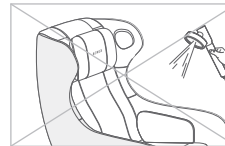


- !** Do not immerse the product in water or spray water over it.
- There is a risk of electric shock or fire.

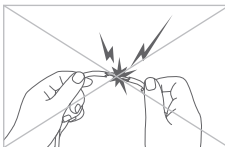


- !** Do not arbitrarily connect or modify the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.

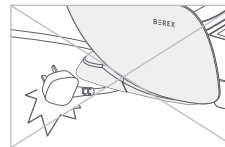

- !** Be careful not to let the power plug fall under the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

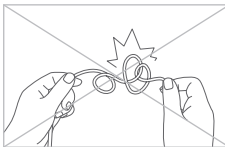

- !** Do not damage the power plug. Do not bring the product close to a heating device, or excessively bend, pull, tie, or twist it, or place a heavy object on the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

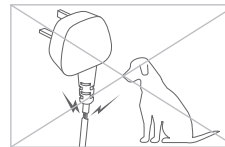


- !** Be careful not to let pets bite the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.

# 1. Safety Information


**⚠ Warning:** Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

**⚠ Caution:** Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


## Installation

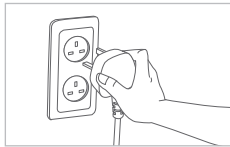

**⚠** Before using the product, check if the power is securely connected.  
· There is a risk of electric shock or fire.

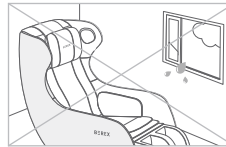


**⚠** Do not install the product in a location that is highly humid, dusty, or exposed to splashes of water (rain).  
· There is a risk of electric shock or fire.

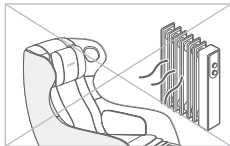


**⚠** Do not install the product near an electric heating device.  
· There is a risk of fire.




**⚠** Do not use or store flammable gas or substance near the product.  
· There is a risk of fire.

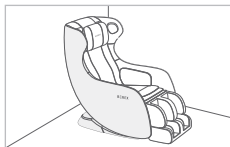


**⚠** Install the product in a place where the floor is flat.  
· If the product is installed on a tilted surface, there is a risk of bodily harm or product damage.

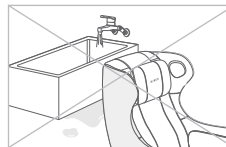


**⚠** Do not install the product in a wet or humid place such as a swimming pool or bathroom.  
· There is a risk of electric shock and short circuit.

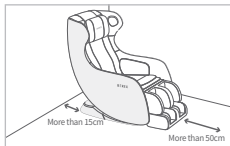

**⚠** Install the rear part of the backrest at least 15 cm away from the wall and the front part of the leg massage part at least 50 cm away from the wall.  
· There is a risk of product damage.

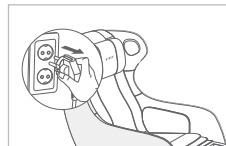


**⚠** After using the product, be sure to turn off the power button and unplug the power plug.  
· There is a risk of electric shock or fire.

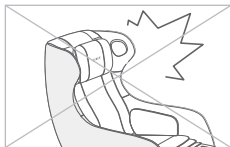

**⚠** Do not apply excessive force or shock on the product.  
· There is a risk of product damage.


These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.  
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

## During use by children (infants)

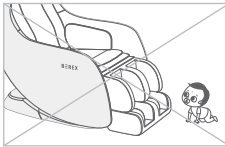

Be careful not to let children or pets get under the chair, into the rear part, or the leg control part.

- There is a risk of injury, such as getting jammed, pressure, and fracture.

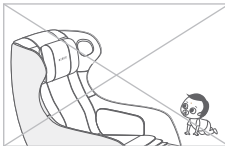


Instruct children not to use the product alone or people who cannot express themselves not to use it. Also, keep it out of reach of children.

- There is a risk of bodily harm.




Please do not allow children to climb on or use the massage chair.

- There is a risk of fall, drop, or jam.

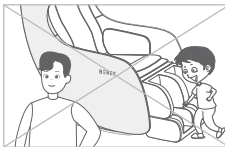


Children shall not play with the appliance.

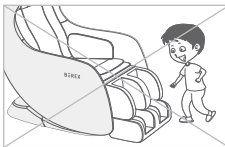


Do not allow children or people who are not familiar with how to use the product to use it alone.

## During use by elderly people (vulnerable group)

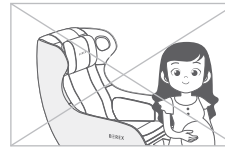


The following patients shall not use the product:

- People with sprain or symptoms of sudden contraction and disconnection of muscle.
- Pregnant women in early pregnancy or immediately after giving birth.

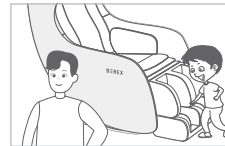

A person who lacks physical, sensory, or mental abilities (including children) need supervision or instruction when using the product.

- There is a risk of bodily harm and product failure.

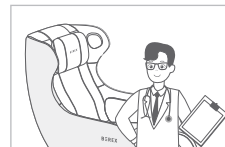

The following people should use the product after consulting a doctor. An accident may occur or something wrong with the body may occur.


- Those who receive treatment from a doctor due to an accident or illness, or who have something wrong with the body
- Users who have long-term hospital treatment or aftereffect

# 1. Safety Information

**⚠ Warning:** Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

**⚠ Caution:** Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


## During use by general users

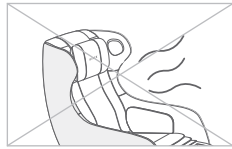


**⚠** Do not use the heating function for a long time.  
· There is a risk of burn.




**⚠** If you feel something wrong with your body while using the product (pain, rash, seizure, itching, etc.), stop using it immediately and consult a doctor.  
· There is a risk of bodily harm and health problem.

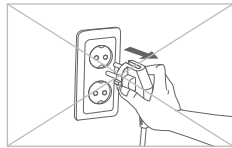


**⚠** Do not pull out the power forcibly while the product is operating.  
· There is a risk of electric shock or fire.

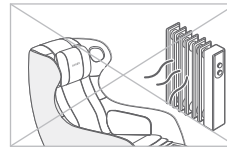


**⚠** Do not place any appliance that generates heat or moisture near the product.  
· There is a risk of electric shock or fire.

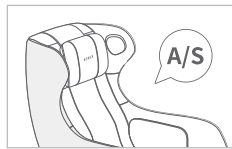


**⚠** In case of product failure, malfunction, product immersion or exposure to moisture, contact the service center.  
· There is a risk of fire.

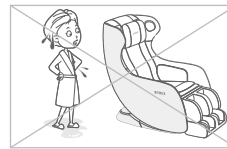

**⚠** Do not use the product while your body is wet after taking a shower, or while your hair is wet after washing your hair.  
· There is a risk of fire.

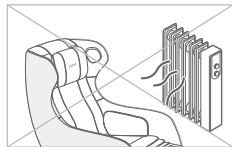


**⚠** Do not place an electric blanket over the massage chair or use other heating devices together.  
· There is a risk of electric shock or fire.

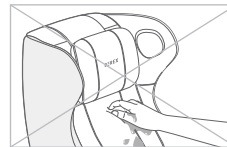

**⚠** Do not touch the product with wet hands.  
· There is a risk of electric shock.



**⚠** Do not move the massage chair while the product is operating.  
· There is a risk of bodily harm, accident, and product failure.

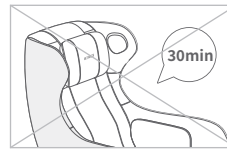


**⚠** Do not use the massage chair for more than 30 minutes per time. Do not massage too much or massage a specific body area for more than 5 minutes.  
· There is a risk of bodily harm and accident.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.  
Please carefully read the precautions and use the product correctly.



**!**  
If the sheet is torn, stop using it immediately and contact the service center.  
· There is a risk of bodily harm and accident.

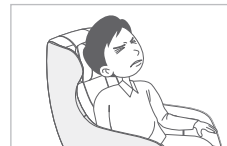

**!**  
If excessive pressure is used, there is a risk of physical injury, respiratory failure, suffocation, etc. caused by the product, so please be careful before use.



**!**  
Do not sleep on the massage chair.  
· There is a risk of bodily harm and accident.



**!**  
Do not use the product for any purpose other than use (sleeping, jumping, etc.).  
· There is a risk of bodily harm and accident.



**!**  
Get off the massage chair after the angle of the product is completely restored to the original state.  
· If you step down from the leg massage part, it may cause product failure and noise.




**!**  
Do not press the massage roller directly with your hand or step on it with your feet.  
· There is a risk of bodily harm and product failure.



**!**  
Do not sit or stand on the backrest or footrest of the massage chair.  
· There is a risk of bodily harm and product failure.



**!**  
When massaging the area around your neck, pay attention to the movement of the massage roller and refrain from massage with excessive force.  
· There is a risk of bodily harm.

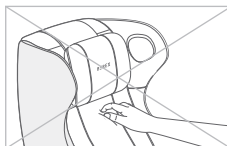

**!**  
Do not place your hand directly between the massage rollers while the product is operating.  
· There is a risk of bodily harm and product failure.




**!**  
When using the product, do not use the product while wearing clothes that are too thin, such as bare skin or underwear.  
· There is a risk of bodily harm and accident.

# 1. Safety Information

**⚠ Warning:** Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

**⚠ Caution:** Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.

## During use by general users

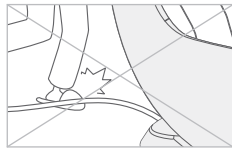


Be careful not to get your feet caught by the product and the controller cord.  
· There is a risk of bodily harm.




The shoulder position may not be correct for users with a height of 155 cm or less and 180 cm or more.




**⚠** The recommended user weight is 100 kg or less.

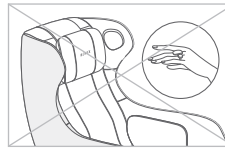


**⚠** When using the product, remove accessories (bracelets, rings, watches, etc.) before use.  
· There is a risk of bodily harm and accident.

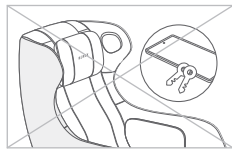


**⚠** Empty your pockets (smartphone, wallet, keys, etc.) before using the product.  
· There is a risk of bodily harm and accident.

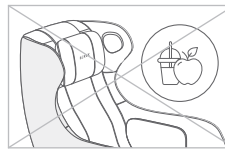

**⚠** Do not take in food or drink while using the product.  
· There is a risk of bodily harm and accident.

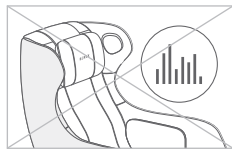

**⚠** When using a Bluetooth speaker, do not use it with huge volume for a long time.  
· There is a risk of hearing damage.

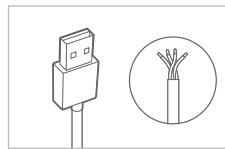

**⚠** Use a shielded cable when charging using the USB charging terminal.  
· It may cause electric shock, fire or failure.  
· Shielded cable refers to a cable that is protected by wrapping aluminum foil around the wire or densely binding the wire with copper or steel in the form of a net to suppress noise coming from the outside/inside.


## 2. Parts Name

Adjust the headrest pad by hand.

You can recline or remove the headrest pad as needed.

The adjustable leg massage module can be moved to massage the desired area from the calf to the knee.

### Product exterior

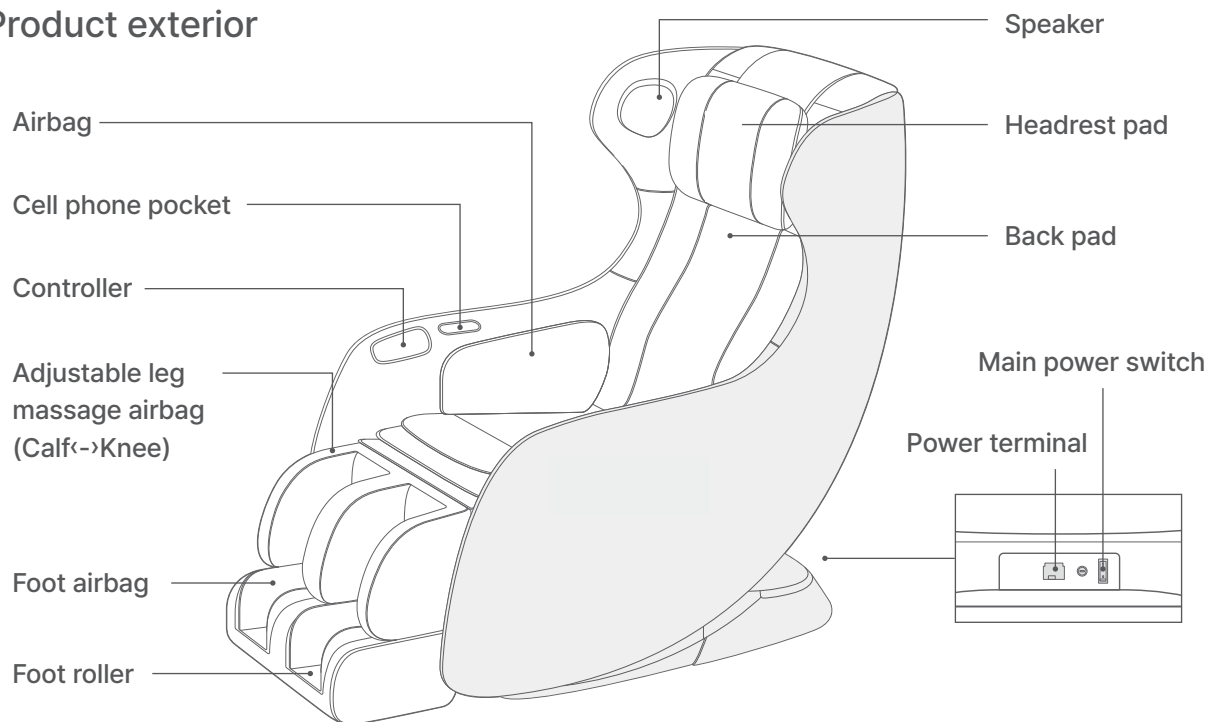


### Other components



User manual




User guide

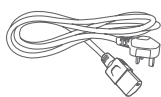

Power plug



Airbag cover

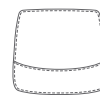

Hip cushion



Foot cushion

---

## 3. Check before use

This product is for 220-240 V~, 50/60 Hz only. Be sure to connect the power plug to a grounded 220-240 V~, 50/60 Hz outlet. The massage chair operates normally only if the power is connected.

---

### Warning

#### Patients who shall not use the product and users who need prescriptions

• **The following patients shall not use the product:**

- ① Those who have been recognized as inappropriate to use the product by a doctor due to thrombosis, embolism, severe varicose vein, acute varicose vein, etc.
- ② Those who are suspected of acute cervical sprain (whiplash)
- ③ Those with sprain or symptom of sudden contraction and disconnection of sprain or muscle
- ④ Those who are in early pregnancy or immediately after childbirth
- ⑤ Those who have backbone (spine) abnormality due to an accident or disease in the past, or a person whose backbone is bent left and right
- ⑥ Those with severe osteoporosis
- ⑦ Those with acute intestinal disease, severe heart failure
- ⑧ Those with severe seizure symptoms or psychogenic diseases (perception disorder)
- ⑨ Those who use an implantable electronic medical device such as an implantable pacemaker
- ⑩ Those who have been recognized as having a loss of thermal sense due to a high degree of peripheral circulatory disturbance due to diabetes, etc.
- ⑪ Those who have or are concerned to have osteomyelitis
- ⑫ Those who have limited expression and body movement
- ⑬ Those who are undergoing treatment for a diagnosed fracture
- ⑭ Those with schizophrenia or uncontrollable epilepsy
- ⑮ Those with a risk of bleeding due to pressure
- ⑯ Those who with inflammation or trauma on the skin directly in contact with the product during use
- ⑰ Those with severe heart conditions
- ⑱ Those who are advised against use by a doctor's judgment
- ⑲ Those who have recently undergone skin-related surgery (skin graft)
- ⑳ Those who have recently undergone surgery

• **The following people shall use the product after consulting a doctor.**

- ① Those who may have side effects due to the use of the product, such as pregnant women
- ② Those whose body temperatures are higher than normal due to acute inflammation and chill
- ③ Those who have with acute skin disease, malignant tumor, or other skin diseases
- ④ Those who receive medical treatment and need stability accordingly
- ⑤ Those who feel other body abnormalities
- ⑥ Those who have osteopenia
- ⑦ Those who have been diagnosed with or are undergoing treatment for conditions such as vertigo or dizziness
- ⑧ Those who have an impaired sense of pain
- ⑨ Those who have symptoms of fever or are suffering from cancer
- ⑩ Those who are undergoing treatment or have concerns about the recurrence of acute disc herniation or lumbar spinal stenosis
- ⑪ Those who show allergic or hypersensitivity reactions to heat
- ⑫ Those who have various diseases or are suspected of having them

---

 Precautions when a failure occurs

If a problem with the product occurs, please do not disassemble the product at your discretion. Additional product defects and accidents may occur. Before you call the Careline, check the user manual to take an action. If the problem is not solved, please contact the customer service center. We will handle it quickly.

---

 Precautions

### Precautions before use

- If you have a disease for which you shall not use the product, check with your doctor as there is a concern about side effect caused by the use of the product.
- Check how to operate the product possible side effects.
- To use the product safely, start with a low-intensity massage.
- Check the location of the "Power" button before using the product.
- Check the massage duration of the product.
- If the cover of the product is torn or peeled off, clothes or hair may curl to cause a serious accident. Check if there is any abnormality in the appearance of the product.
- When using the high-temperature setting, be cautious of burns and use in the appropriate temperature.
- Use the product at a suitable temperature based on your physique and skin condition. If you have sensitive skin, set the temperature to a lower level.
- Children, those who cannot adjust the temperature themselves, and those with reduced skin sensitivity should be cautious of the risk of low-temperature burns even when using the product at a low-temperature setting. (Always wear clothes while using the product.)
- Be cautious of the hot surface of the product if you are sensitive to heat.
- This product has a heating surface. Be careful if you are insensitive to heat.

### Precautions during use

- To use the product safely and conveniently, read the user manual thoroughly before use.
- This product is an indoor device for household use only. Do not use it outdoors, commercially, for experiments, or for industrial purposes.
- Be cautious of the risk of falling or slipping when getting on or off the product.
- When disassembling the product, turn off the power through the controller and unplug the power plug.
- Be careful not to let hands or any body parts get caught between the main body and the leg panel.
- Be careful while using the product's heating function.
- Be cautious of potential vomiting or dizziness if used immediately after a meal, depending on your physical condition.
- Do not plug other products or multiple products into a single power strip simultaneously.
- Do not place flammable objects, such as blankets, on top of the product, except for the included components.
- The color of the product may vary depending on the production batch.
- Use the massage rollers without twisting your body, maintaining a proper posture.
- Do not use cosmetics or medications on the product.

---

## 3. Check before use

This product is for 220-240 V~, 50/60 Hz only. Be sure to connect the power plug to a grounded 220-240 V~, 50/60 Hz outlet. The massage chair operates normally only if the power is connected.

---

### Precautions

#### Precautions during use

- If you feel any irritating pain or something wrong with your body, stop using the product immediately and see a doctor.
- Avoid direct skin contact with the heating part and motor moving part of the product.
- Observe the massage duration of the product.
- When using the product, do not use it together with other vibrators or electric mats.
- More than 2 persons shall not use the product at the same time.
- Make sure not to damage the massage area of the product with accessories. (hair ornaments, necklaces, wristwatches, bracelets, rings, etc.)
- Use the product according to its intended purpose and the part of the product area.

#### Possible side effects when using the product

- **Be careful as the following side effects may occur due to the use of the product.**

- ① Abrasion, contusion, bruise, stab, cut, etc.
- ② Damage to muscles, tendons, nerves, spine and etc., due to excessive use and pressure of the product
- ③ Skin diseases and burns, etc.
- ④ Fracture and dislocation, sprain, etc.
- ⑤ Respiratory/digestive disorders and suffocation, etc.

#### Check before using the product.

- Check that there are no objects, people or pets around the product.
- Before use, check that the device operates normally by pressing all the switches in order according to this manual.
- Before use, adjust the reclining angle while fully erecting the reclining, and operate the product with a weak stimulus at first.

---

 Precautions when a failure occurs

If a problem with the product occurs, please do not disassemble the product at your discretion. Additional product defects and accidents may occur. Before you call the Careline, check the user manual to take an action. If the problem is not solved, please contact the customer service center. We will handle it quickly.

---

 **Precautions**

- If you do not observe the use according to the user manual or failure to observe the precautions for use
- If a product is repaired or remodeled by a third party other than the Coway service center, partner company, or designated engineer, thereby resulting in a failure or accident
- If a failure occur due to natural disasters (fire, earthquake, flood, lightning, etc.)


**Please keep this User Manual in a safe place.**

**When moving the product, do not arbitrarily move it and contact the Coway service center.**

- It may cause damage such as scratch to the floor.

# 1. Controller and Main Functions

## Controller

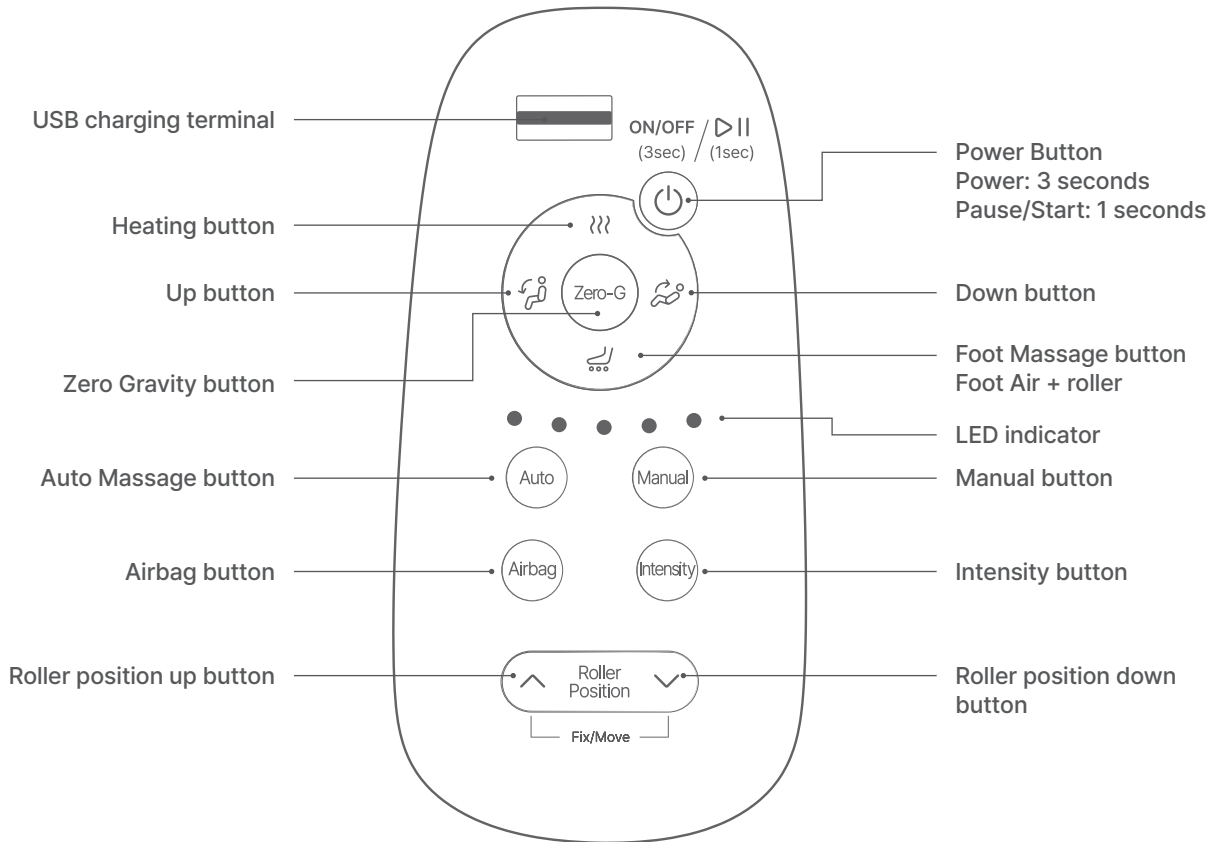

---

## Main functions



### Power/Pause button

- Press and hold the power button for about 3 seconds to turn the device on or off.
- When the power is turned on, the chair is laid down into the default massage posture.
- If you press the Power button for about 3 seconds or longer during use, all functions are ended, and the chair and massage module return to their initial positions.
- If a button is pressed briefly during the massage, all functions will pause and 3 LEDs (LED 1, 3, 5) will blink.
- If you press the button briefly during the pause, massage is resumed in the previous state. The pause is excluded from the massage time.



### Heating button

- Turn on or off the power of the heating function.
  - The heating function operates simultaneously on the back, pelvis, and legs (left/right).
- Caution: There is a risk of burns if the heating function is used for a long time.
- It operates for 15 minutes per operation and automatically turns off after 15 minutes.



### Up button

- The chair is erected while pressing the button.



### Down button

- The chair is laid down while pressing the button.



### Foot Massage button

- The Foot Massage activates the foot air massage and foot roller.
- ● ● ● ● Foot air+foot roller  
● ● ● ○ Foot air  
○ ○ ● ● Foot roller  
○ ○ ○ ○ Foot Massage OFF




### Zero Gravity button

- If you press the button, the chair is laid down into a Zero Gravity position.
- If you adjust the angle of the chair in a zero-gravity position, the Zero Gravity mode is automatically canceled.
- If you press the Zero Gravity button once more in the Zero Gravity position, the massage will return to the default position.

# 1. Controller and Main Functions

## Main functions

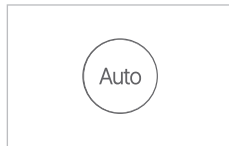

### Auto Massage button

- Press the button to select 6 automatic massage modes.
- In manual mode, the indicator blinks.

- Auto 1 - VITALITY course
- Auto 2 - NECK/SHOULDER course
- Auto 3 - RELAX course
- Auto 4 - WAIST course
- Auto 5 - SLEEP course
- Auto 6 - POWER course
- OFF



### Manual Massage button

- Press the button to select 6 manual massage modes.
- In manual mode, it blinks.


- Manual 1 - Mix (Knocking+Kneading)
- Manual 2 - Kneading
- Manual 3 - Acupressure
- Manual 4 - Knocking
- Manual 5 - Tapping
- Manual 6 - Total
- OFF



### Intensity button

- Adjust intensity of the massage.
- The initial intensity of all massage modes is 3, and if you press the button, modes are selected in the order of 4 > 5 > 1 > 2 > 3 > 4.
- The intensity is applied to the massage module and air massage at the same time.


- Intensity 1
- Intensity 2
- Intensity 3
- Intensity 4
- Intensity 5

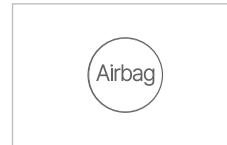

### Airbag button

- You can massage a desired area among the pelvis and legs with air massage.

- Pelvis+Legs
- Pelvis
- Legs
- Air Massage OFF

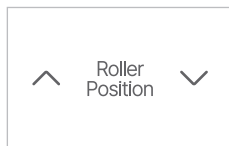

### Roller position up/down button


- You can move/fix the position of the massage roller.
- However, in manual 3 (acupressure), the Roller position do not stop but change direction.

---


## 2. How to Use

---


### 01. Turn on the power.

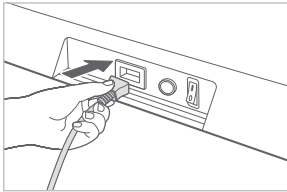

1. Insert the power plug into the massage chair.

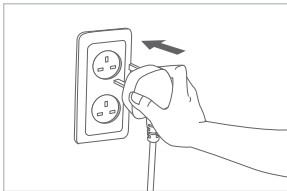

2. Insert the power plug into the outlet.

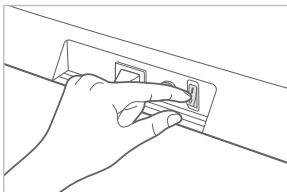


3. Turn on the main power switch on the back of the product.

---

## 2. How to Use

---

### 02. Sit on the massage chair in an upright position.

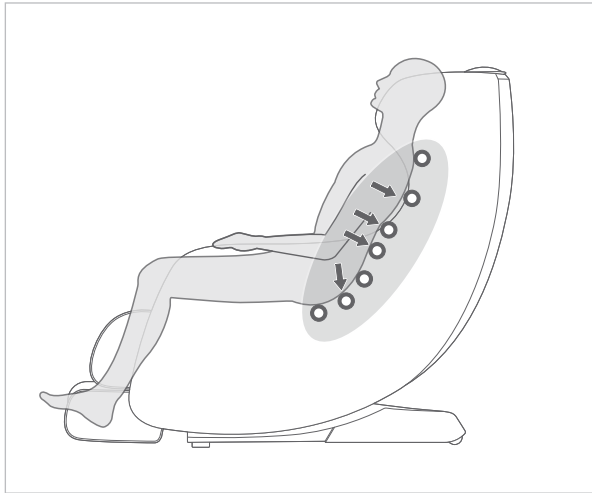

How to sit on a massage chair properly

Bring your buttocks and lower back as close as possible to the massage chair and sit on it.

- Do not forcibly get out of the massage chair while it is moving. This may apply the force to the product to cause a product failure and injury to the user.
- When using a Bluetooth speaker, set the volume appropriately. Huge noise may cause hearing loss.

---


### 03. Press the Power button on the controller.



- If you press the Power button for about 3 seconds, the power is turned on and the massage chair is laid down in the default massage position. At this time, the LED indicator on the controller turns on sequentially.
- After this, if you press a desired massage mode, the massage starts after the shoulders are sensed. If the shoulders are not sensed for a certain period, the power is automatically turned off.
- If you select the massage mode while moving to the basic massage posture, the massage starts after moving to the basic massage posture completely.

# 3. Massage Mode Selection

## 01. Auto Massage

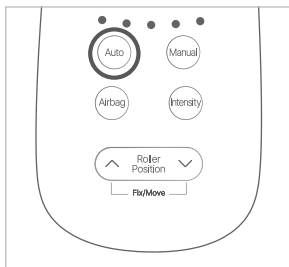


In auto mode, auto mode is LED lighting.

The automatic mode operates automatically by combining massage modes such as massage and tapping with the air massage function while moving to the massage module. Press the Air Massage button on the controller to select 6 automatic massage courses.

- ○ ○ ○ ○ Auto 1 - VITALITY course      ○ ○ ○ ○ ● Auto 5 - SLEEP course
- ● ○ ○ ○ Auto 2 - NECK/SHOULDER course      ● ● ● ● Auto 6 - POWER course
- ○ ● ○ ○ Auto 3 - RELAX course      ○ ○ ○ ○ ○ OFF
- ○ ○ ● ○ Auto 4 - WAIST course

- Press the Auto button on the controller to select 6 auto massage modes.
- If you press the button, a mode is selected in the order of Auto 1 > Auto 2 > Auto 3 > Auto 4 > Auto 5 > Auto 6 > off > Auto 1.
- The massage time for each mode is 15 minutes.

## 02. Manual Massage

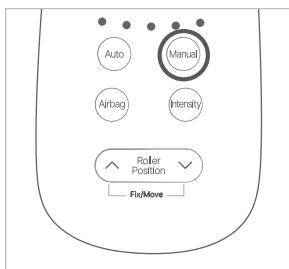

In Manual mode, it blinks.

In Manual mode, a user manually selects the massage mode while the massage module moves up and down repeatedly. Press the Manual button on the controller to select 6 manual massage courses.

- ○ ○ ○ ○ Manual 1 - Mix(Knocking+Kneading)      ○ ○ ○ ○ ● Manual 5 - Tapping
- ● ○ ○ ○ Manual 2 - Kneading      ● ● ● ● Manual 6 - Total
- ○ ● ○ ○ Manual 3 - Acupressure      ○ ○ ○ ○ ○ OFF
- ○ ○ ● ○ Manual 4 - Knocking


- Press the Manual button on the controller to select 6 manual massage modes.
- If you press the button, a mode is selected in the order of Manual 1 > Manual 2 > Manual 3 > Manual 4 > Manual 5 > Manual 6 > off > Manual 1.
- The massage time for each mode is 15 minutes.

## 03. End massage

- The massage time for each default course is 15 minutes.
- If you press the Power button for 3 seconds during use, all functions are ended, and the chair and massage module return to their initial positions.
- If the massage course is completed, the chair remains in the final position until you press the Power button.
- The maximum continuous use time is 1 hour, and the power is automatically turned off after 1 hour regardless of the massage mode.

## 4. How to Use Additional Functions


### 01. Airbag massage (You can massage a desired area among the pelvis and legs.)

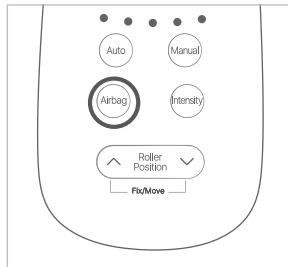

- When air massage is OFF (Manual mode or massage chair power is turned on and is in standby)  
When you press the Airbag button, the air massage operates in the order of Mixed (pelvis + Legs) > Pelvis > Legs > OFF > Mixed (pelvis + Legs).
- When air massage is ON (Auto mode)  
When you press the Airbag button, it operates in the order of OFF > Mixed (pelvis + Legs) > Pelvis > Legs > OFF.

● ● ● ● ● Pelvis+legs      ○ ○ ● ● ● Legs  
 ● ● ● ○ ○ Pelvis      ○ ○ ○ ○ ○ Air Massage Off


### 02. Foot massage (You can massage a desired area among the foots.)

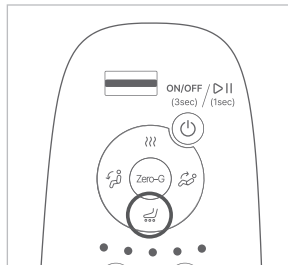

- When foot massage is OFF (Manual mode or massage chair power is turned on and is in standby)  
When you press the Foot button, the air massage operates in the order of Mixed (Foot air+foot roller) > Foot air > Foot roller > OFF > Mixed (Foot air+foot roller).
- When foot massage is ON (Auto mode)  
When you press the Foot button, it operates in the order of OFF > Mixed (Foot air+foot roller) > Foot air > Foot roller > OFF.


● ● ● ● ● Foot air+foot roller      ○ ○ ● ● ● Foot roller  
 ● ● ● ○ ○ Foot air      ○ ○ ○ ○ ○ Foot Massage OFF

### 03. Adjusting the massage Roller position

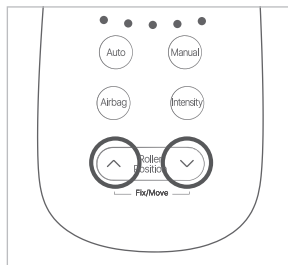

- While pressing the Roller position up button, the massage module moves upward.
- While pressing the Roller position down button, the massage module moves downward.
- After moving the Roller position, the massage module stops at that spot and intensive massage starts.
- During automatic/manual massage operation, If you press either one or both of the "Roller Position Up/Down" buttons at the same time, the massage module stops at the desired spot and resume the selected massage mode.
- During the fixed massage operation (massage module stopped), press the Roller position up/down buttons at the same time to return to the previous massage mode.
- However, in manual 3 (acupressure), the Roller position do not stop but change direction.


## 04. Adjusting the Intensity (You can adjust the intensity of air and massage rollers.)

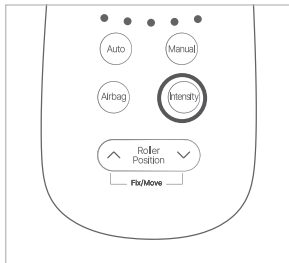

- As the massage intensity increases, the speed of the massage rollers increases and the air intensity increases.
- The initial intensity of all massage modes is 3, and if you press the button, modes are selected in the order of 4 > 5 > 1 > 2 > 3 > 4.  
The intensity is applied to the massage module and air massage at the same time.

- ○ ○ ○ ○ Intensity 1
- ● ○ ○ ○ Intensity 2
- ● ● ○ ○ Intensity 3
- ● ● ● ○ Intensity 4
- ● ● ● ● Intensity 5

## 05. Heating function (You can turn on or off the heating function.)

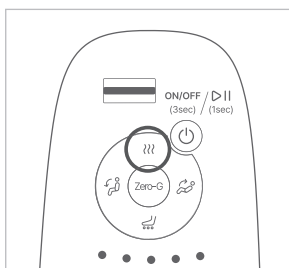

- You can turn on or off the heating function by pressing the heating button. Heating is applied to on your back, pelvis and legs (left/right) at the same time.
- Turning on the heating function: If you press the Heating button while the heating function is off, the LED indicator turns on sequentially from inner to outer, and the heating function is turned on.

Heating ON ○ ○ ○ ○ Sequential light on  
 ◀-----▶

- Turning off the heating function: If you press the Heating button while the heating function is on, the LED indicator turns off sequentially from outer to inner, and the heating function is turned off.

Heating OFF ○ ● ● ● Sequential light off  
 ●-----▶


⚠ There is a risk of burns if the heating function is used for a long time.

---

## 4. How to Use Additional Functions

---

### 06. Adjusting the position of the leg massage (You can adjust the position of the leg massage.)

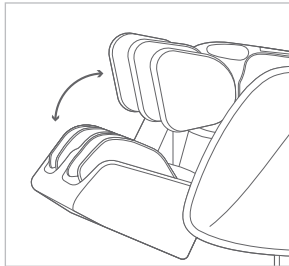

#### Adjusting the position of the leg air massage (Manual)


- You can hold the center of the leg massage module and move it to the desired position.
- The massage module can move from the calf to the knee.

#### Adjusting the length of the Foot Massage (Manual)

- The length of the leg part can be manually adjusted to fit your body type by pushing it downwards.

---


### 07. Adjusting the angle of the chair (You can adjust the angle of the massage chair.)

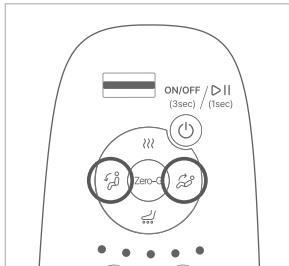

- You can adjust the angle of the massage chair by pressing the Up/down button on the controller.
- If you press the Down button, the chair is laid down while pressing. The back and legs operate at the same time.
- If you press the Up button, the chair is erected while pressing. The back and legs operate at the same time.


---

### 08. Zero Gravity mode

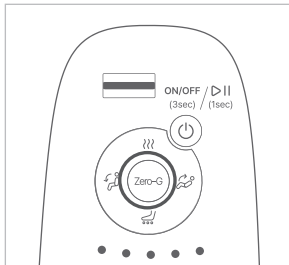



- **Setting:** If you press the Zero Gravity button, the chair moves to the Zero Gravity angle with one touch.
- **Deactivation:** If you press the Up/down button in Zero Gravity mode, the Zero Gravity mode is deactivated. If you press the Zero Gravity button in Zero Gravity mode, the Zero Gravity mode is deactivated and returns to the default massage position.

## 09. Pause

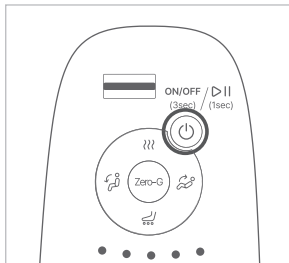

1. During the massage operation, press the power button briefly on the controller (for 1 second). If a button is pressed briefly during the massage, all functions will pause and LED 1, 3, 5 (• ○ • ○ •) will blink.
2. If you press the button briefly (1 second) during the pause, message is resumed in the previous state. The massage time is also excluded during the pause.

## 10. Turning off the power

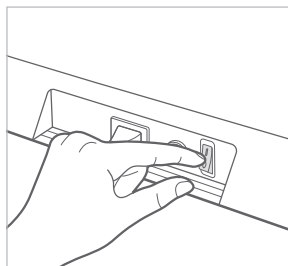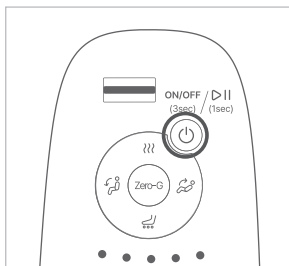

1. Press and hold the Power button on the controller for 3 seconds or longer. The positions of the massage chair and the massage roller move back to the original places.
2. Turn off the main power switch on the back of the product.

## 11. Using a Bluetooth speaker


- To use the Bluetooth speaker, connect the speaker to a smartphone, computer, etc. via Bluetooth.
- If you turn on the Bluetooth function of the device you want to connect via Bluetooth, it searches by name 'COWAY B02-\*\*\*\*\* (serial number)'. (Password: 9999)
- If Bluetooth is connected to another device, turn off or disconnect the Bluetooth function of the device connected to the speaker, register or connect the Bluetooth with a desired device.
- Bluetooth speakers may not be compatible with some device models.

---

# 1. How to Clean

- Be sure to pull out the power plug before cleaning.
  - Do not immerse the product in water or spray water over it.
  - Do not use organic solvents (thinner, etc.), bleach, or detergents containing chlorine or abrasives to clean the product.
- 

## Main body

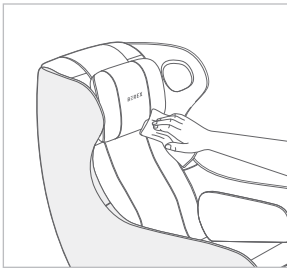

Wipe the exterior and cover of the product with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Do not wash the product cover in a washing machine. It may cause product damage.
- Do not iron the product cover with an iron. It may cause fire or product damage.

---

## Controller




Wipe with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Be careful not to allow foreign substances to enter the USB charging terminal.

---

---

## Cell phone pocket

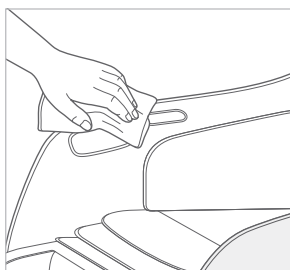

Wipe with a soft, dry cloth.

- If there are a lot of contaminants inside, absorb them with a vacuum cleaner and wipe them off.
- If there is moisture inside, wipe the cell phone pocket after removing the moisture.

# 1. Troubleshooting

Symptom	Check	Countermeasure
Noise is loud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sound occurred while the air massage function is operating</li> <li>• Gear motor noise when the massage operates</li> <li>• Rattling noise when tapping</li> <li>• Rattling sound as the massage rollers rub against each other</li> </ul>	It is a sound occurred during normal product operation.
Power does not turn on.	The power switch on the back of the product does not turn on.	Turn on the power switch on the back.
	Poor contact with the power plug socket	Insert the power plug and socket correctly.
	Damage and connection failure of the power plug	Contact the Careline.
	The fuse disconnected inside the power socket and the Power PBA malfunction	Contact the Careline.
	The Power button on the controller has not been pressed.	Press the Power button on the controller.
The product stops suddenly during the massage.	Turn off the power switch on the back of the product, wait about 5 seconds, and then turn the power switch back on. Check whether the massage chair returns to its initial position.	If the power button is pressed after taking the necessary measures and the product still does not function properly, stop using the product, unplug the power plug, and contact the A/S center.
	Regardless of the massage mode, the power is automatically turned off when the massage chair is used for 1 hour.	Press the power button to restart.
The massage roller stops suddenly during the massage.	Did you apply more force than necessary to the massage roller?	<p>Please turn your body slightly. If the product operates normally, it is not a product failure.</p> <p>* If a user whose weight is 100 kg or more uses the product, be careful. This may happen.</p>
The reclining function does not operate.	Check if there are any disturbance substances around the product.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the disturbance substances between the backrest and the legs, and the operate the product.</li> <li>• Have enough space behind the backrest to lie down.</li> </ul>
During operation, the massage roller gets caught in the inner cloth or bounces.	Friction between massage rollers and seat	This is not a malfunction because it is a temporary symptom caused by the massage rollers during message.
The airbag does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The air connection hose was disconnected.</li> <li>• The wires related to air were broken.</li> </ul>	Contact the Careline.

## 2. Specification

Product name	Coway MC-B02 Mine Plus Massage Chair	
Model name	MC-B02 (Mine Plus)	
Rated voltage	220-240 V~, 50/60 Hz	
Power consumption	130 W	
Size	When erected	1 250 mm (W) X 740 mm (D) X 1 030 mm (H)
	When laid down	1 510 mm (W) X 740 mm (D) X 770 mm (H)
Weight	58.5 kg	
USB	DC 5 V 2 A	

- There may be changes to the specifications to improve the product's performance.

---

## 3. Warranty

- Please refer to your Sales Order Form for our basic policy for the product warranty.  
For more detailed terms of the product warranty, please visit our website.  
Please note that the terms of our product warranty are subject to change from time to time in compliance with the relevant Malaysian laws and regulations.

---

# MEMO

---

|||| Before Use

|||| How to Use

|||| Maintenance

|||| Others