

coway

โคเวย์ เอ็มซี-ซี01 (เพบเบิล) เก้าอี้นวดไฟฟ้า คู่มือการใช้งาน



This product cannot be used if the voltage is different from that mentioned in the rating plate.
For your safety and proper use of the product, please read this User manual before use.

TH

เรียนลูกค้า Coway

ขอขอบคุณที่ใช้งานเก้าอี้นวด Coway

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดเพื่อการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างเหมาะสม

ท่านสามารถอ้างอิงคู่มือผู้ใช้นี้ในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

ข้อบ่งใช้: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ขั้วคราวและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ขั้วคราว

วันที่จัดทำเอกสาร 07/11/2025

Rev.0

coway

โคเวย์ เอ็มซี-ซี01 (เพนเบิล) เก้าอี้นวดไฟฟ้า
คู่มือการใช้งาน

III ไปรตตรวจสอบก่อนใช้งาน

1. ข้อมูลความปลอดภัย	4
2. ชื่อส่วนประกอบ	11
3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน	12

III ทำความเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้องและฟังก์ชันต่างๆ

1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก	14
2. วิธีการใช้งาน	17
3. การเลือกโหมดการนวด	19
4. วิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม	22

III เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดและดูแลผลิตภัณฑ์

1. วิธีทำความสะอาด	24
--------------------	----

III ทำความคุ้นเคยกับข้อมูลนี้ล่วงหน้าเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย


1. การแก้ไขปัญหา	26
2. ข้อมูลจำเพาะ	27

1. ข้อมูลความปลอดภัย


⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

พลังงาน

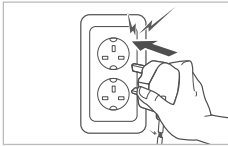


⚠ ห้ามใช้ปลั๊กที่เสียหายหรือใช้เต้ารับที่หลวม

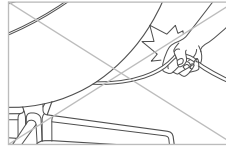

⚠ อย่าดึงปลั๊กไฟขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

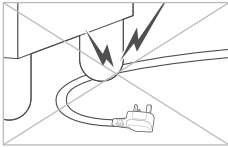


⚠ อย่าถอดปลั๊กไฟมากเกินไป หรือวางสายไฟไว้ข้างใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมากเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายหรือการบิดรูป

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้



⚠ หากบริเวณที่ต่อปลั๊กไฟสัมผัสกับน้ำ ให้ถอดปลั๊กแล้วเช็ดให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

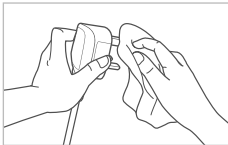


⚠ เช็ดฝุ่น น้ำ ฯลฯ บนขาปลั๊กไฟและบริเวณที่สัมผัสกับขาปลั๊กไฟให้สะอาด

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้




⚠ ทำให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ 220 - 240 V~, 50/60 Hz

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

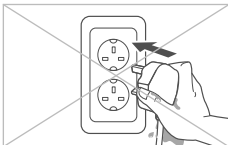

⚠ อย่าจับปลั๊กด้วยมือที่เปียก

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

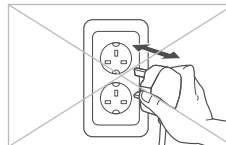


⚠ อย่าเสียบหรือถอดปลั๊กไฟซ้ำ ๆ บ่อยครั้ง

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้



⚠ ทำให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำการซ่อมแซม ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์


- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

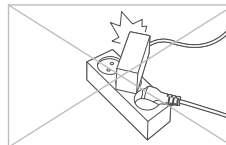


⚠ อย่าต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายเครื่องเข้ากับเต้ารับเดียวกัน ใช้เต้ารับแยกเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เสมอ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้


คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินคุณ กรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

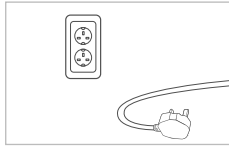


- !** หากท่านไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าออก
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

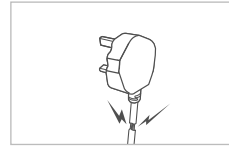


- !** หากปลั๊กไฟเสียหาย อย่าพยายามเปลี่ยนอะแดปเตอร์ โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

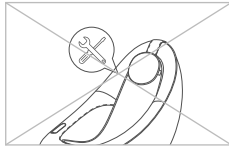


- !** ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์เองโดยพลการ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

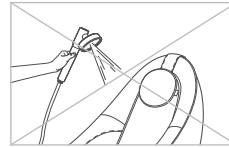


- !** อย่านำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำหรือจิดน้ำบนผลิตภัณฑ์
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

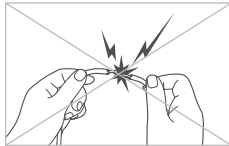


- !** อย่าต่อหรือดัดแปลงปลั๊กไฟโดยพลการ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

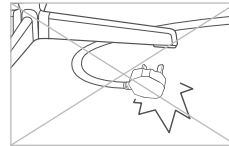

- !** ระวังอย่าให้ปลั๊กไฟหล่นลงไปข้างใต้ผลิตภัณฑ์
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

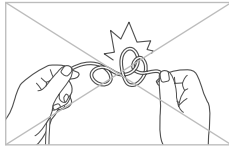

- !** อย่าทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย อย่านำผลิตภัณฑ์ไปไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อน หรือหิ้งจนถึง มัด หรือหมุนพันกัน หรือวางวัตถุหนักลงบนผลิตภัณฑ์
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

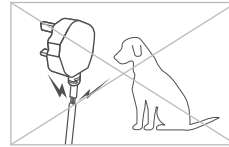


- !** ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงกัดปลั๊กไฟ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้


1. ข้อมูลความปลอดภัย

- ⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
- ⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ


การติดตั้ง

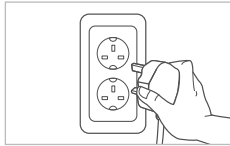

- ⚠ ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายไฟอย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

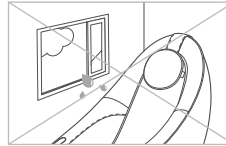

- ⚠ อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่มีความชื้นสูงมาก มีฝุ่นมาก หรือมีน้ำ (เช่น ฝน) กระเซ็น
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

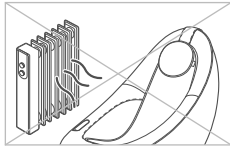


- ⚠ อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้




- ⚠ อย่าใช้หรือเก็บภาชนะหรือวัตถุไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้



- ⚠ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่พื้นราบเรียบ
- หากติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่ลาดเอียง จะมีความเสี่ยงต่อร่างกายและผลิตภัณฑ์เสียหาย

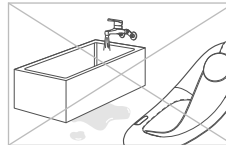

- ⚠ อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่เปียกหรือชื้น เช่น สระว่ายน้ำหรือห้องน้ำ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร

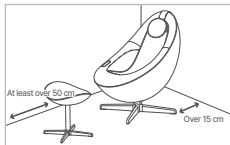

- ⚠ ติดตั้งส่วนหลังของพนักพิงให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. และให้ด้านหน้าของส่วนที่นวดห่างจากประตูอย่างน้อย 50 ซม.




- ⚠ หลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่าลืมปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้



- ⚠ อย่าใช้แรงมากเกินไปหรือกระแทกกับผลิตภัณฑ์
- มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเสียหาย

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่เด็ก(เด็กเล็ก) ใช้งาน

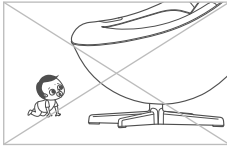


- ⚠ ห้ามให้เด็ก และผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามลำพัง และเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ




- ⚠ ควรสอนเด็กไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามลำพัง และไม่ให้ผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารหรือแสดงออกได้ใช้งานรวมถึงควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก
- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ



- ⚠ ห้ามให้เด็กปีนขึ้นบนเก้าอี้ขนาด หรือใช้งานเก้าอี้ขนาดโดยเด็ดขาด
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ

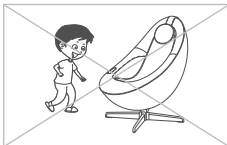


- ⚠ ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด
- มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว่ำหรือล้มได้
- มีความเสี่ยงที่จะล้มลง

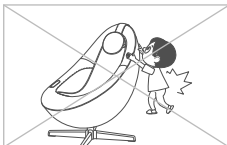

- ⚠ อย่าทำการโยนเก้าอี้ขนาด
- มีความเสี่ยงที่จะล้มลง

ในกรณีที่ผู้สูงอายุใช้งาน (กลุ่มเปราะบาง)

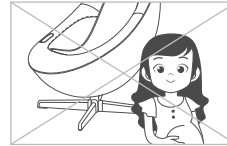

- ⚠ ผู้ป่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:
 - ผู้ที่มีกล้ามเนื้อชักขาดหรือมีอาการกล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลันและมีภาวะกล้ามเนื้อไม่เชื่อมต่อ
 - สตรีมีครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกหรือทันทีหลังจากคลอดบุตร



- ⚠ บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้ หรือสติปัญญา (รวมถึงเด็ก) ต้องได้รับการกำกับดูแลหรือคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ล้มเหลว



- ⚠ บุคคลต่อไปนี้ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หลังจากปรึกษาแพทย์ อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
- ผู้ที่กำลังรับการรักษาจากแพทย์เนื่องจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย หรือผู้ที่มีร่างกายผิดปกติ
- ผู้ใช้ที่รับหรือได้รับผลกระทบจากการรักษาในโรงพยาบาลระยะยาว

1. ข้อมูลความปลอดภัย

⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ขณะใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป




⚠ อย่าใช้ฟังก์ชันการทำความร้อนเป็นเวลานาน

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้




⚠ หากท่านรู้สึกรู้สึกว่ามีความผิดปกติกับร่างกายระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (อาการเจ็บ ปั่น ชัก คั้น ฯลฯ) ให้หยุดใช้งานทันทีและปรึกษาแพทย์

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือปัญหาสุขภาพ

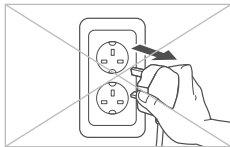

⚠ อย่าถอดปลั๊กไฟในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

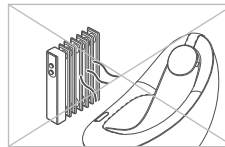


⚠ อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อนหรือสร้างความชื้นไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้




⚠ หากเกิดการขัดข้อง ทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์เปียกน้ำหรือโดนความชื้น ให้ติดต่อศูนย์บริการ

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

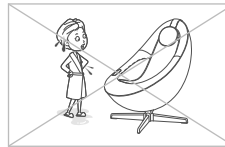


⚠ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่ตัวเปียกหลังจากอาบน้ำ หรือในขณะที่ผมเปียกหลังจากสระผม

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

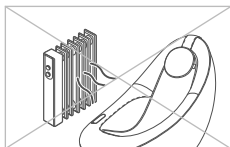

⚠ อย่าวางผ้าห่มไฟฟ้าไว้บนเก้าอี้นวด หรือใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอื่นๆ ร่วมกัน

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

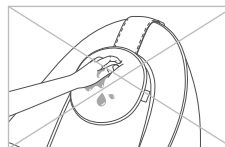


⚠ อย่าจับผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต



⚠ อย่าเคลื่อนย้ายเก้าอี้นวดในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน


- มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

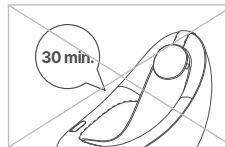

⚠ อย่าใช้งานเก้าอี้นวดติดต่อกันนานเกิน 30 นาทีในแต่ละครั้ง อย่างน้อยพัก 5 นาทีหรือนวดเฉพาะจุดในร่างกายนานเกินกว่า 5 นาที

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

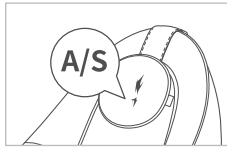


- !** หากผ้าคลุมขาด ให้หยุดใช้งานทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ



- !** อย่านอนหลับบนเก้าอี้นวด
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ




- !** อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการนวด (เช่น การนอน การกระโดด ฯลฯ)
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

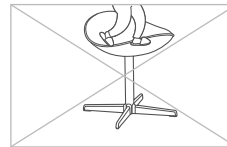

- !** อย่านั่งหรือป็นบนที่วางขา
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย




- !** อย่าใช้มือกดที่ลูกกลิ้งนวดโดยตรงหรือใช้เท้าเหยียบ
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

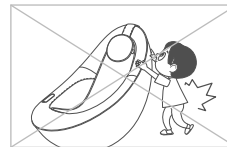

- !** อย่านั่ง ปีน หรือโหนพนักพิงของเก้าอี้นวด
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย




- !** ระหว่างการนวดบริเวณรอบคอ โปรดคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งนวด และหลีกเลี่ยงการใช้แรงนวดมากเกินไป
- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ

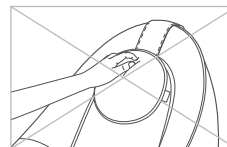

- !** อย่าวางมือไว้ระหว่างลูกกลิ้งนวดโดยตรงในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน
- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย



- !** เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่สวมเสื้อผ้าที่บางเกินไป เช่น ไม้ใส่เสื้อผ้าหรือสวมเพียงชุดชั้นใน
- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ

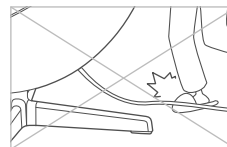

- !** ระวังอย่าให้เท้าเข้าไปติดในผลิตภัณฑ์และปลั๊กไฟ
- มีความเสี่ยงที่ร่างกายจะบาดเจ็บ

1. ข้อมูลความปลอดภัย

⚠ คำเตือน: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำแนะนำ: ระบุกรณีที่อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ


ขณะใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป



⚠ ตำแหน่งนวดบ่าและไหล่อาจจะไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ใช้งาน




⚠ น้ำหนักผู้ใช้ที่แนะนำไม่เกิน 100 กิโลกรัม

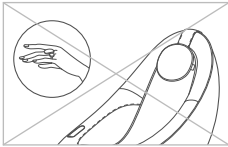

⚠ เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดเครื่องประดับ (กำไล แหวน นาฬิกา ฯลฯ) ก่อนใช้งาน

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

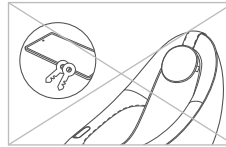

⚠ นำสิ่งของออกจากกระเป๋า (โทรศัพท์ กระเป๋าเงิน กุญแจ ฯลฯ) ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ




⚠ อย่าทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ




⚠ อย่าฟังเก้าอี้นวด

- เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรืออุบัติเหตุ

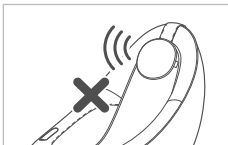

⚠ เมื่อใช้ลำโพง Bluetooth อย่าเปิดเสียงดังเป็นเวลานาน

- อาจมีผลกระทบต่อการได้ยิน

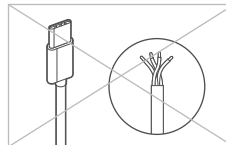


⚠ ใช้สายไฟแบบหุ้มฉนวนเมื่อจะชาร์จอุปกรณ์จากช่องชาร์จ USB

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เปล่งไหม้ หรือการทำงานล้มเหลว
- * สายไฟหุ้มฉนวนหมายถึงสายไฟที่หุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์หรือสายไฟที่หุ้มด้วยทองแดงหรือเหล็กในรูปแบบแบบตาข่ายเพื่อลดสัญญาณรบกวนจากภายนอก

2. ชื่อส่วนประกอบ

ปรับเบาะรองศีรษะด้วยมือ
ท่านสามารถปรับเอนหรือถอดพนักพิงศีรษะได้ตามต้องการ


ภายนอกของผลิตภัณฑ์

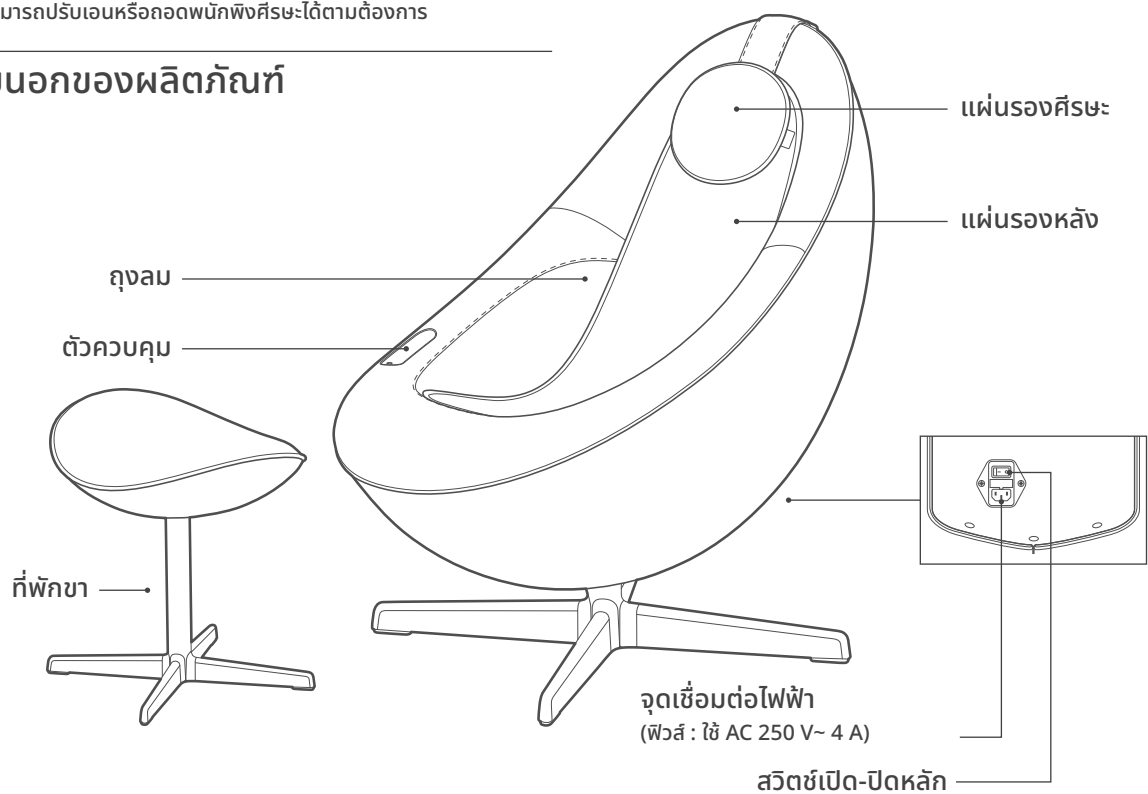


ส่วนประกอบอื่นๆ



คู่มือผู้ใช้

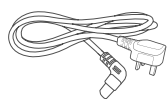

ปลั๊กไฟ

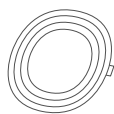

เบาะ

3. ตรวจสอบก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลต์~, 50/60 เฮิร์ตซ์ เท่านั้น กรุณาเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และรองรับไฟฟ้า 220-240 โวลต์~, 50/60 เฮิร์ตซ์เท่านั้น
หมวดจะทำงานได้ตามปกติก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วเท่านั้น

⚠ คำเตือน

ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ที่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์

- **ผู้ป่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:**
 - 1 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีภาวะลิ้มเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดอุดตัน เส้นเลือดอุดตันรุนแรง หรือเส้นเลือดอุดตันระยะเฉียบพลัน ฯลฯ
 - 2 ผู้ที่มีอาการสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่คอแบบเฉียบพลัน
 - 3 บุคคลที่มีกล้ามเนื้อเนื้อฉีกขาดหรือมีอาการกล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลันและมีภาวะกล้ามเนื้อไม่เชื่อมต่อกัน
 - 4 ผู้ที่มีโรคกระดูกในช่องโตะกระดูกหรือกระดูกหักหลังจากคลอดบุตร
 - 5 ผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุหรือโรคในอดีต หรือผู้ที่มีกระดูกสันหลังกดไปด้านซ้ายหรือขวา
 - 6 ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนระดับรุนแรง
 - 7 ผู้ที่มีโรคทางลำไส้ระยะเฉียบพลันหรือภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง
 - 8 ผู้ที่มีอาการชักรุนแรงหรือโรคทางจิตเวช (ความผิดปกติทางการรับรู้)
 - 9 ผู้ที่ใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง
 - 10 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าสูญเสียความรู้สึกต่ออุณหภูมิ เนื่องจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดส่วนปลายระดับรุนแรงจากโรคเบาหวาน เป็นต้น
 - 11 ผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคกระดูกอักเสบ
 - 12 ผู้ที่มีการแสดงออกและการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำกัด
- **บุคคลต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์**
 - 1 ผู้ที่อาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น หลงผิดตั้งครก
 - 2 ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติเนื่องจากการอักเสบเฉียบพลันหรืออาการหนาวสั่น
 - 3 ผู้ที่เป็นโรคผิวหนังระยะเฉียบพลัน เนื่องจากงอมะเร็ง หรือโรคผิวหนังอื่นๆ
 - 4 ผู้ที่กำลังรับการรักษาทางการแพทย์และจำเป็นต้องพักฟื้นร่างกายตามคำแนะนำ
 - 5 ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดปกติอื่นๆ ของร่างกาย

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังก่อนใช้งาน

- หากท่านมีโรคที่ทำให้ท่านไม่ควรใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดสอบถามแพทย์ของท่าน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ตรวจสอบวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง
- ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ให้เริ่มด้วยการการนวดระดับเบา
- ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม “Power” (พลังงาน) ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบระยะเวลาของเซสชันการนวดของผลิตภัณฑ์
- หากผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ฉีกขาดหรือลอกออก เลือผ้าหรือผอมอาจเข้าไปติดในเก้าอี้นวดและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ควรใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีการกำกับดูแล หรือได้รับคำแนะนำ
- ดูแลอย่าให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีพื้นผิวที่มีความร้อน บุคคลที่อ่อนไหวต่อความร้อนต้องระมัดระวังเมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน

- หากคุณรู้สึกเจ็บปวดระคายเคือง หรือมีความผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันทีและไปพบแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงกับส่วนที่ให้ความร้อนและชิ้นส่วนมอเตอร์ที่เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
- ฝ้าสังเกตรยะเวลาการใช้งานเมื่อทำการนวด
- เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นวดแบบสั่นหรือแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าอื่น
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่า 2 คน
- ระวังอย่าทำให้บริเวณนวดของผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์เสริมเสียหาย (เก็บตูดผม สร้อยคอ นาฬิกาข้อมือ กำไล แหวน ฯลฯ)

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

⚠ ขข้อควรระวังเมื่อเกิดความขัดข้อง

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาอย่าถอดชิ้นส่วนหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรืออุบัติเหตุได้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้ากรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานเพื่อดำเนินการเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เรายินดีให้บริการและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

⚠ ข้อควรระวัง

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

• โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาการข้างเคียงต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

- ① แผลถลอก แผลฟกช้ำ แผลเลือดคั่ง แผลถูกแทง แผลมีดบาด ฯลฯ
- ② การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท กระดูกสันหลัง ฯลฯ เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มากเกินไปหรือความแรงเกินไป
- ③ โรคผิวหนังและแผลไหม้ ฯลฯ
- ④ กระตุกหักและข้อเคลือบ ข้อแพลง ฯลฯ
- ⑤ ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ/ระบบย่อยอาหาร และภาวะหายใจลำบาก ฯลฯ

ตรวจสอบก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุ ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่รอบๆ ผลิตภัณฑ์
- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติหรือไม่ โดยการกดสวิทช์ทั้งหมดตามคู่มือฉบับนี้

Coway Thailand ไม่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือผู้ใช้หรือละเลยข้อควรระวังในการใช้งาน
- กรณีที่ผลิตภัณฑ์ ได้รับการซ่อมหรือดัดแปลงโดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ Coway บริษัทลูกค้าหรือช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ
- หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าผ่า ฯลฯ)


กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ห้ามเคลื่อนย้ายเองโดยพลการและกรุณาติดต่อศูนย์บริการ Coway

- อาจทำให้เกิดความเสียหายเช่นทำให้พื้นเป็นรอย

1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก

ตัวควบคุม

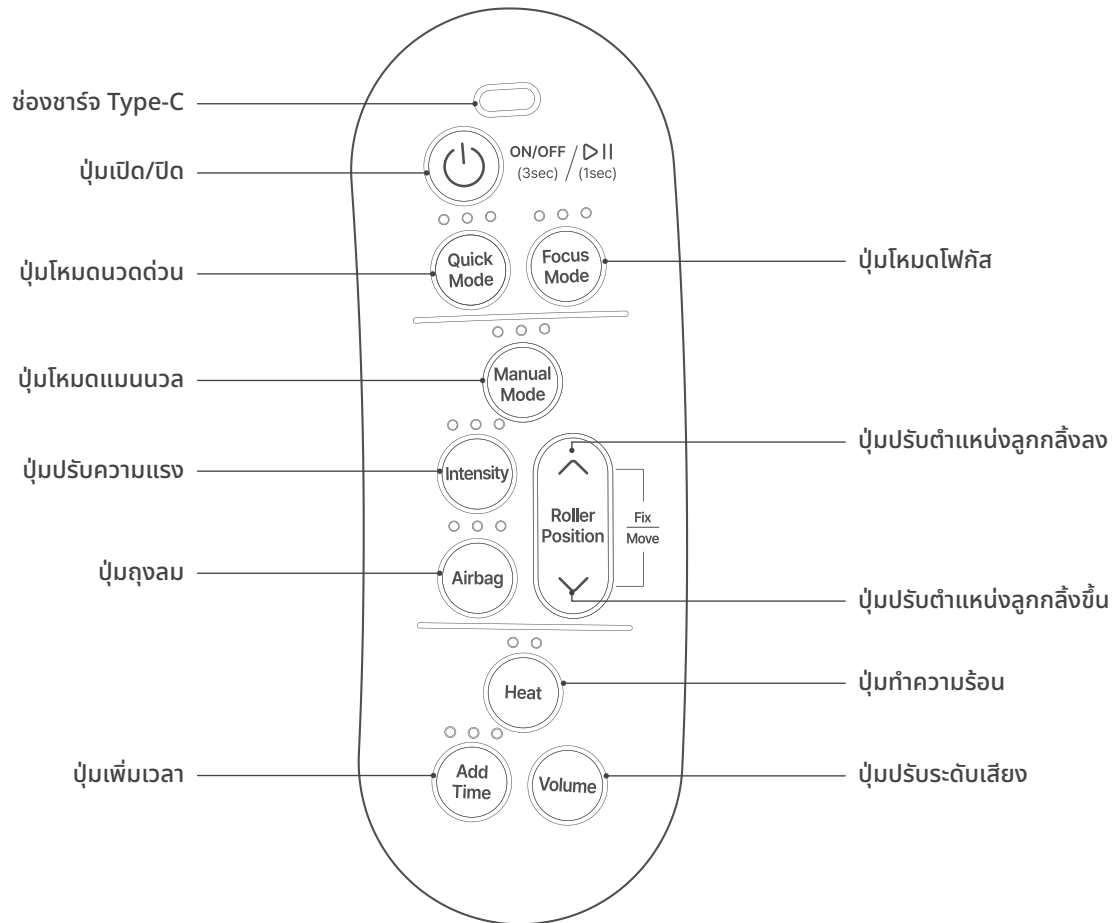


ตัวควบคุม




ปุ่มเปิด/ปิด

- กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้ประมาณ **3 วินาที** เพื่อเปิดหรือปิดพลังงานของเก้าอี้นวด หากท่านปิดพลังงาน ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดจะหยุด และเก้าอี้และโมดูลการนวดจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเริ่มแรก
- ในการหยุดการนวดชั่วคราว ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ประมาณ 1 วินาทีในสภาวะหยุดชั่วคราว การนวดจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้ง

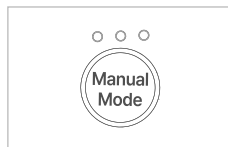

ปุ่มโหมดแมนนวล

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดนวด
 - การเคาะ
 - การกดจุด
 - การรีดเส้น
 - ผสม
 - การถู

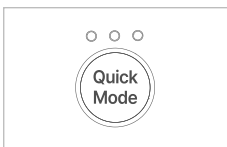


ปุ่มโหมดนวดด่วน

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดนวดอัตโนมัติ 3 โหมด
 - พิเศษ 1 - โหมด Good Morning
 - พิเศษ 2 - โหมด Good day
 - พิเศษ 3 - โหมด Good night




ปุ่มปรับความแรง

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับความแรง
- ความแรงตั้งต้นในการนวดคือระดับ 1 และหากท่านกดปุ่มนี้ ระดับความแรงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ 1 > 2 > 3 > 1
 - ความแรง 1
 - ความแรง 2
 - ความแรง 3

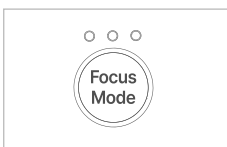

ปุ่มโหมดโฟกัส

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดนวดอัตโนมัติ 3 โหมด
 - ส่วนที่ 1 - เน้นที่คอและบ่าไหล่
 - ส่วนที่ 2 - เน้นที่หลังและเอว
 - ส่วนที่ 3 - เน้นที่กระดูกเชิงกราน

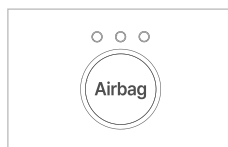


ปุ่มถุงลม

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับความแรงของถุงลม
- ความแรงตั้งต้นของถุงลมคือระดับ 1 และหากท่านกดปุ่มนี้ ระดับความแรงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1
 - ความแรง 1
 - ความแรง 2
 - ความแรง 3
 - ปิด


1. ตัวควบคุมและฟังก์ชันหลัก

ตัวควบคุม

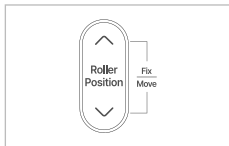

ปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้น/ลง/อยู่กับที่/ขยับ

- ท่านสามารถขยับหรือล็อก/ยกเลิกตำแหน่งของลูกกลิ้งขนาดได้
- ท่านสามารถปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งขนาดได้โดยการกดปุ่มตำแหน่งลูกกลิ้ง 'ขึ้น' หรือ 'ลง' และท่านสามารถล็อกลูกกลิ้งขนาดอยู่กับที่ได้โดยการกดปุ่ม 'ขึ้น' และ 'ลง' พร้อมกัน
- หากท่านกดปุ่ม 'ขึ้น' และ 'ลง' พร้อมกัน หรือเปลี่ยนโหมดขนาดในขณะที่ลูกกลิ้งขนาดถูกล็อกอยู่กับที่ การล็อกลูกกลิ้งขนาดจะถูกยกเลิก

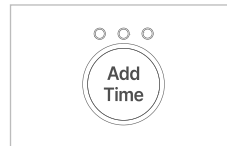

ปุ่มเพิ่มเวลา

- กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเวลานวด
 - ระยะเวลาขนาดตั้งต้นคือ 20 นาที ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้จะเพิ่มเวลานวด 20 นาที (ระยะเวลาขนาดสูงสุด 60 นาที)
- ○ ○ 20 นาที
● ● ○ 40 นาที
● ● ● 60 นาที



ปุ่มทำความร้อน

- เปิดหรือปิดพลังงานของฟังก์ชันการทำความร้อน
- สภาวะตั้งต้นของการทำความร้อนคือปิด และหากท่านกดปุ่มนี้ เครื่องจะทำงานตามลำดับ ระดับ 1 > ระดับ 2 > ปิด > ระดับ 1

- ○ ระดับ 1
● ● ระดับ 2
○ ○ ปิด

- ⚠ **ระวัง:**
มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม้หากใช้งานฟังก์ชันการทำความร้อนเป็นเวลานาน




ปุ่มปรับระดับเสียง


- กดปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียง
- ระดับเสียงตั้งต้นคือระดับ 1 และหากท่านกดปุ่มนี้ ระดับเสียงจะเปลี่ยนไปตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1

2. วิธีการใช้งาน


01. เปิดเครื่อง

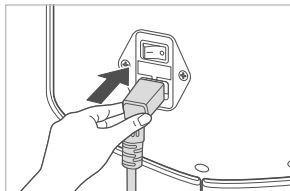

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเก้าอี้นวด

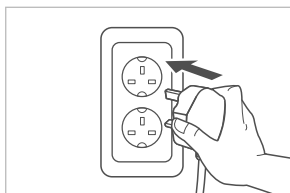


2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

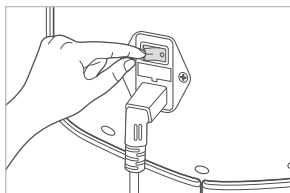

3. เปิดสวิตช์ไฟหลักที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

2. วิธีการใช้งาน


01. นั่งบนเก้าอี้ในท่างหลังตรง

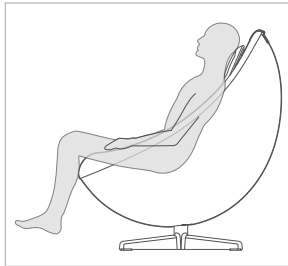

วิธีการนั่งบนเก้าอี้ในท่างหลังตรง
ขยับสะโพกและหลังส่วนล่างให้ชิดกับ
เก้าอี้จนให้มากที่สุดแล้วนั่งลง


- หลีกเลี่ยงการลุกออกจากเก้าอี้ในท่างหลังตรงขณะเก้าอี้กำลังทำงาน เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายและเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้
- เมื่อใช้งานลำโพง Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงอย่างเหมาะสม ระดับเสียงที่ดังมากอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

02. กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนตัวควบคุม

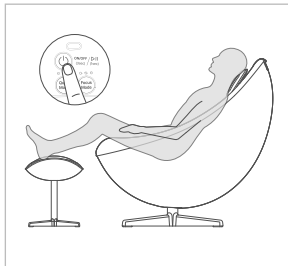

- หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะเปิด และ ไฟ LED ทั้งหมดยกเว้นไฟ LED พลังงานจะกะพริบสองครั้ง
- หากท่านเปิดเครื่อง ไฟ LED พลังงานจะเปิดขึ้นเป็นสีเขียว และอุปกรณ์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- หลังจากนั้น หากท่านกดเลือกโหมดขนาดที่ต้องการ ไฟ LED พลังงานจะสว่างขึ้นเป็นสีขาว และการนวดจะเริ่มขึ้นหลังจากตรวจจับไหล่
- หากตรวจไม่พบไหล่ ลูกกลิ้งนวดจะขยับไปที่ด้านบนและการนวดจะเริ่มขึ้น
- เมื่อท่านเปิดเครื่อง ลูกกลิ้งนวดอาจขยับเล็กน้อย
- พอร์ถชาร์จ type-C นั้นสามารถใช้งานได้เมื่อเปิดเครื่องเท่านั้น


03. การปรับความสูงของที่พักขา

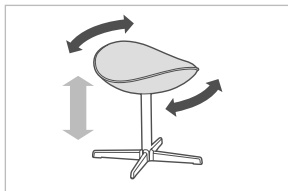

- หมุนที่นั่งของที่พักขาไปที่สองทิศทางเพื่อปรับความสูง

3. การเลือกโหมดการนอน


01. โหมดนอนด่วน

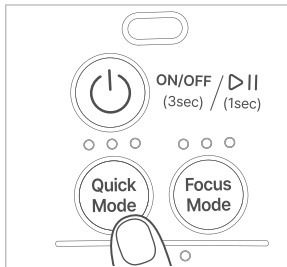

โหมดนอนด่วนจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยการผสมผสานโหมดนอนต่างๆ เช่นโหมดกุดและฟังก์ชันการนอนด้วยถุงลม กดปุ่มโหมดนอนด่วนบนตัวควบคุมเพื่อเลือกคอร์สการนอนได้ 3 แบบ

- ○ ○ พิเศษ 1 - โหมด Good Morning
- ● ○ พิเศษ 2 - โหมด Good Day
- ○ ● พิเศษ 3 - โหมด Good Night
- หากท่านกดปุ่มนี้ คอร์สจะถูกเลือกตามลำดับ โหมด Good Morning > โหมด Good day > โหมด Good Night > โหมด Good Morning
- ในโหมดนอนด่วน ถ้าอื่นวดจะทำความร้อนที่ระดับ 2 หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันทำความร้อน ให้กดปุ่มทำความร้อนเพื่อปิดฟังก์ชันทำความร้อน

02. โหมดไฟกัส

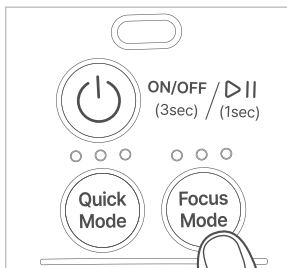


โหมดไฟกัสจะนอนบริเวณเฉพาะอย่างหนักหน่วงโดยการผสมผสานโหมดนอนต่างๆ เช่นโหมดกุดและฟังก์ชันการนอนด้วยถุงลม กดปุ่มโหมดไฟกัสบนตัวควบคุมเพื่อเลือกคอร์สการนอนได้ 3 แบบ

- ○ ○ ส่วนที่ 1 - คอและบ่าไหล่
- ● ○ ส่วนที่ 2 - หลังและเอว
- ○ ● ส่วนที่ 3 - กระดูกเชิงกราน
- หากท่านกดปุ่มนี้ คอร์สจะถูกเลือกตามลำดับ คอและบ่าไหล่ > หลังและเอว > กระดูกเชิงกราน > คอและบ่าไหล่

3. การเลือกโหมดการนวด

03. โหมดแมนนวล

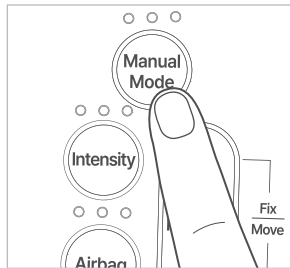

ในโหมดแมนนวล โมดูลจะขยับขึ้นและลงซ้ำๆ และผู้ใช้จะเลือกโหมดการนวดด้วยตนเอง กดปุ่มโหมดแมนนวลบนแผงควบคุมเพื่อเลือก 5 คอร์ส

- ○ ○ การทุบ
- ● ○ การกดจุด
- ○ ● การนวดคลึง
- ● ● ผสม
- ● ● การถู

• หากท่านกดปุ่มนี้ คอร์สจะถูกเลือกตามลำดับ ทุบ > กดจุด > นวดคลึง > ผสม > ถู

การวิเคราะห์รูปร่างร่างกาย

- เปิดเครื่องและวิเคราะห์รูปร่างของร่างกายเมื่อเริ่มทำงานครั้งแรก
- หากท่านต้องการจะนวดทันทีโดยไม่ต้องวิเคราะห์รูปร่างของร่างกาย ให้กดปุ่มระดับเสียงค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีในขณะที่กำลังวิเคราะห์รูปร่างของร่างกาย


การนวดหยุดชั่วคราว/เริ่มใหม่

- ในการหยุดการนวดชั่วคราว ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ประมาณ 1 วินาทีในขณะที่เครื่องหยุดชั่วคราว การนวดจะเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้ง
- เมื่อหยุดชั่วคราว ไฟ LED จะกะพริบ
- ฟังก์ชันการนวดจะหยุดลงหลังจากการนวดชั่วคราวผ่านไป 10 นาที

วิธีการหยุดการนวด

- ในการหยุดการนวด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
- ระยะเวลาสูงสุดของการนวดแต่ละครั้งคือ 60 นาที และเครื่องจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที
- เมื่อการนวดหยุดลง โมดูลการนวดจะกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มแรก
- เมื่อการนวดสิ้นสุดลง ไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นสีแดง


04. การปรับความแรงในการนวด

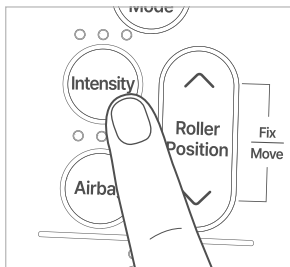

สามารถปรับระดับความแรงของลูกกลิ้งนวดได้

- หากกดปุ่มปรับความแรงบนแผงควบคุม ความแรงจะถูกเลือกตามลำดับ 1 > 2 > 3 > 1
- ท่านสามารถปรับความแรงในการนวดระหว่างการนวดพิเศษ การนวดเฉพาะพื้นที่ หรือการนวดแบบแมนนวล

05. การปรับความแรงของตุกลม

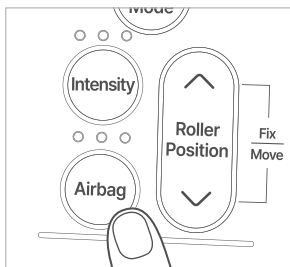


สามารถปรับความแรงของตุกลมได้

หากกดปุ่มตุกลมบนตัวควบคุม ความแรงจะถูกเลือกตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1

- ท่านสามารถปรับระดับความแรงของตุกลมระหว่างการนวดพิเศษและการนวดเฉพาะพื้นที่ได้


06. การปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งนวด

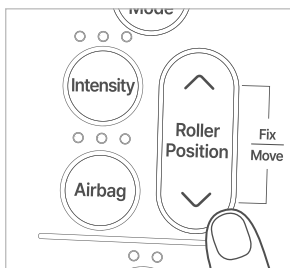

1. หากท่านกดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้นและลงพร้อมกัน หรือกดเพียงปุ่มเดียวระหว่างการนวด ตำแหน่งของลูกบอลจะล็อกอยู่กับที่
2. ในขณะที่กดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้นระหว่างการนวดแบบแรง (ลูกกลิ้งนวดล็อกอยู่กับที่) โมดูลการนวดจะขยับขึ้นบน
3. ในขณะที่กดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งลงระหว่างการนวดแบบแรง (ลูกกลิ้งนวดล็อกอยู่กับที่) โมดูลการนวดจะขยับลงล่าง
4. เมื่อการนวดแบบแรงทำงานในโหมดการนวดพิเศษหรือโหมดไฟกัส การนวดจะช้าๆ ที่ตำแหน่งดังกล่าว
5. เมื่อการนวดแบบแรงทำงานในโหมดแมนนวล โหมดแมนนวลที่เลือกจะทำงานช้าๆ ที่ตำแหน่งดังกล่าว
6. ระหว่างการนวดแบบแรง (ลูกกลิ้งนวดล็อกอยู่กับที่) ให้กดปุ่มปรับตำแหน่งลูกกลิ้งขึ้นและลงพร้อมกันเพื่อกลับไปสู่โหมดนวดก่อนหน้า
7. หากเลือกโปรแกรมนวดเฉพาะจุดหรือโปรแกรมนวดเข้มข้นเฉพาะส่วน ระบบนวดที่เลือกจะทำงาน และลูกกลิ้งนวดจะถูกปลดล็อก

4. วิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม


07. การเพิ่มเวลา

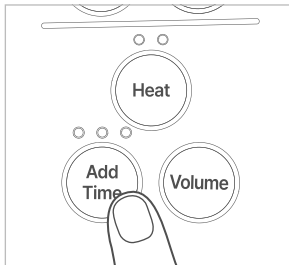

กดปุ่มเพิ่มเวลา (Add Time) เพื่อเพิ่มเวลานวด
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 20 นาที ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้จะเพิ่มระยะเวลา 20 นาที

- ○ ○ 20 นาที
- ● ○ 40 นาที
- ● ● 60 นาที
- ระยะเวลาสูงสุดของการนวดแต่ละครั้งคือ 60 นาที และพลังงานจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที

08. การใช้ฟังก์ชันทำความร้อน

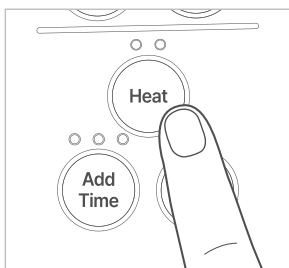


เปิดหรือปิดพลังงานของฟังก์ชันทำความร้อน

หากกดปุ่มความร้อนบนตัวควบคุม ความแรงจะถูกเลือกตามลำดับ 1 > 2 > ปิด > 1

- ○ ความร้อนระดับ 1
- ● ความร้อนระดับ 2
- ○ ปิด
- ในโหมดนวดด่วน เก้าอี้จะทำความร้อนที่ระดับ 2 หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันการทำความร้อน ให้กดปุ่มการทำความร้อนเพื่อปิดฟังก์ชันการทำความร้อน
- * ระวัง: มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม้หากใช้งานฟังก์ชันทำความร้อนเป็นเวลานาน


09. การตั้งค่าระดับเสียง

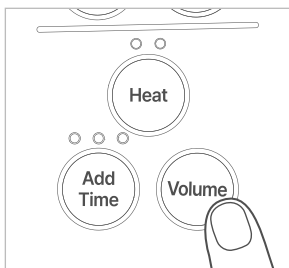


ปรับระดับเสียงของเสียงพูดแนะนำหรือปิดเสียง

หากกดปุ่มระดับเสียงบนตัวควบคุม ระดับเสียงจะทำงานตามลำดับ 1 > 2 > 3 > ปิด > 1

10. การปิดพลังงาน

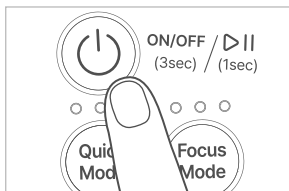

กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนตัวควบคุมค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แต่ส่วนของเก้าอี้นวดและเครื่องนวดจะย้ายกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น เมื่อการนวดสิ้นสุดลง ไฟ LED พลังงานจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง

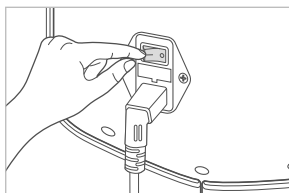

ปิดสวิตช์พลังงานหลักที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

11. การใช้งานลำโพง Bluetooth


ในการใช้งานลำโพง ให้เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผ่าน Bluetooth

- หากท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับผลิตภัณฑ์นี้ผ่าน Bluetooth โปรดค้นหา 'TH_COWAY_MC-C01_000001 (หมายเลขเรียล)'. (รหัสผ่าน: 9999)
- หากอุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth ของเก้าอี้นวด
- ลำโพงบลูทูธอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์บางรุ่นได้

1. วิธีทำความสะอาด

- อย่าลืมถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด
 - อย่านำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำหรือฉีดน้ำบนผลิตภัณฑ์
 - อย่าใช้สารละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์ ฯลฯ) น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคลอรีนหรือวัสดุผงขัดเพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
-


วิธีทำความสะอาดตัวเครื่อง

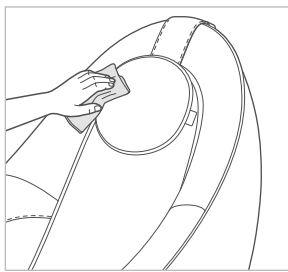

เช็ดภายนอกและผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง

- เมื่อพบคราบสกปรก ให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดสิ่งสกปรกออก
- อย่าลืมเช็ดน้ำที่หลงเหลือออกให้หมด
- อย่านำผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ไปซักในเครื่องซักผ้า อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่ารีดผ้าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยเตารีด อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

วิธีทำความสะอาดตัวควบคุม

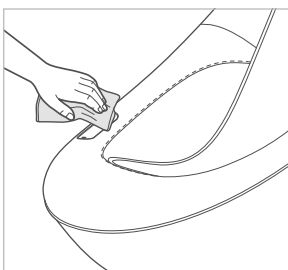

เช็ดแผงควบคุมด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง

- เมื่อพบคราบสกปรก ให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดสิ่งสกปรกออก
- อย่าลืมเช็ดน้ำที่หลงเหลือออกให้หมด
- ระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องชาร์จ USB

1. การแก้ไขปัญหา

อาการ	การตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
เสียงดัง	<ul style="list-style-type: none"> เกิดเสียงดังในขณะที่ฟังก์ชันนวดด้วยอุณหภูมิกำลังทำงาน เสียงเฟืองของมอเตอร์ดังเมื่อระบบนวดทำงาน เสียงสั่นเมื่อนวดแบบเคาะ เสียงสั่นในขณะที่ลูกกลิ้งนวดเสียดสีกัน 	เป็นเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานปกติของผลิตภัณฑ์
พลังงานไม่เข้าผลิตภัณฑ์	ไม่ได้เปิดสวิตช์พลังงานที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์	ให้เปิดสวิตช์พลังงานที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
	เสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไม่แน่น	เสียบปลั๊กพลังงานเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้อง
	ปลั๊กไฟเสียหาย	ติดต่อ Call Center
	เสียบปลั๊กพลังงานไม่ดี	ติดต่อ Call Center
	ยังไม่ได้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนแผงควบคุม	กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) บนแผงควบคุม
ผลิตภัณฑ์หยุดกะทันหันในระหว่างการนวด	ปิดสวิตช์พลังงานที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วรอประมาณ 1 นาที จากนั้นให้เปิดสวิตช์พลังงานอีกครั้ง กดปุ่มพลังงานบนแผงควบคุมค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดพลังงาน จากนั้นให้กดปุ่มพลังงานค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้งเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์	หากกดปุ่มพลังงานหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้ว และผลิตภัณฑ์ยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องให้หยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กพลังงานและติดต่อ Call Center
	ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดนวดใดก็ตาม พลังงานจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานเก้าอี้นวดเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง	กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) เพื่อเริ่มต้นใหม่
ลูกกลิ้งนวดหยุดทำงานกะทันหันในระหว่างการนวด	ท่านให้แรงกับลูกกลิ้งนวดมากเกินไปหรือไม่	โปรดหันร่างกายเล็กน้อย หากผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติ นี้แสดงว่าไม่ใช่ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ * หากผู้ใช้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กก. ขึ้นไปใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดระวัง เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์นี้ได้
ฟังก์ชันเอนพนักพิงไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางรอบๆ ผลิตภัณฑ์หรือไม่	เว้นระยะห่างหลังพนักพิงหลังให้เพียงพอเพื่อให้เอนพนักพิงได้
ในระหว่างผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ลูกกลิ้งนวดติดอยู่กับผ้าด้านในหรือลูกกลิ้งเด็งกลับ	แรงเสียดทานระหว่างลูกกลิ้งนวดและเบาะนั่ง	ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติของเครื่อง เนื่องจากเป็นอาการชั่วคราวที่เกิดจากการทำงานของลูกกลิ้งนวดระหว่างการนวด
อุณหภูมิตั้งไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าไฟ LED ความแรงของอุณหภูมิเปิดอยู่หรือไม่	ตรวจสอบว่าไฟ LED ความแรงของอุณหภูมิเปิดอยู่หรือไม่ การทำงานของอุณหภูมินั้นรวมอยู่ในการทำงานนวด และอุณหภูมิจะไม่ทำงานทันทีหลังจากกดปุ่มอุณหภูมิ

2. ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	โคเวย์ เอ็มซี-ซี01 (เพบเบิล) แก้อินเวดไฟฟ้า	
ชื่อรุ่น	MC-C01 (Pebble)	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220 - 240 V~, 50/60 Hz	
การใช้พลังงานไฟฟ้า	77 W	
ขนาด	ตอนตั้งขึ้น	1,015 มม. (ก) X 735 มม. (า) X 1,120 มม. (ส)
	ตอนปรับลง	1,120 มม. (ก) X 735 มม. (า) X 970 มม. (ส)
น้ำหนัก	ผลิตภัณฑ์: 45.5 กก, ที่พักขา: 4.5 กก.	
USB	DC 5 V 3 A	
ผู้จัดจำหน่าย	COWAY (THAILAND) CO., LTD.	

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

Dear Coway customers

Thank you for using the Coway Massage Chair

Please read this user manual carefully for the correct use maintenance of the product.

You can refer to the user manual to troubleshoot product issues while using it

Intended use: Helps temporarily relax specific muscles and help increase blood circulation temporary.

coway

Massage Chair MC-C01 (Pebble)
User Manual

III Please check before use!

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. Safety information | 3 |
| 2. Part name | 10 |
| 3. Check before use | 11 |

III Understand the correct usage and functions.

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1. Controller and main functions | 13 |
| 2. How to use | 16 |
| 3. Massage mode selection | 18 |
| 4. How to use additional functions | 21 |

III Learn how to clean and manage the product.

- | | |
|-----------------|----|
| 1. How to clean | 23 |
|-----------------|----|

III Familiarize yourself with information in advance for safe use.


- | | |
|--------------------|----|
| 1. Troubleshooting | 25 |
| 2. Specification | 26 |

1. Safety information


⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


Power

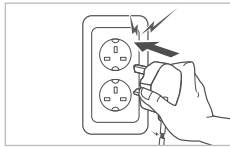


⚠ Do not use a damaged power plug or loose sockets.

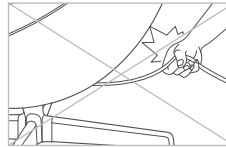


⚠ Do not pull on the power plug to move the product.
• There is a risk of electric shock or fire.

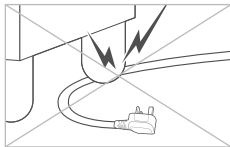


⚠ Do not bend the power plug excessively or put it under a heavy object to avoid damage deformation.
• There is a risk of electric shock or fire.

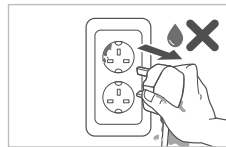


⚠ When the power area comes into contact with water, unplug the power plug and completely dry it prior to use.
• There is a risk of electric shock or fire.

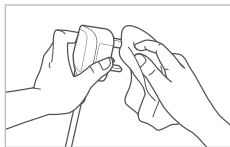


⚠ Completely wipe off dust, water, etc., on the power plug's pins and areas of contact with the pins.
• There is a risk of electric shock or fire.

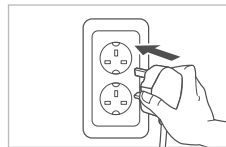

⚠ Be sure to insert the power plug into a 220 - 240 V~, 50/60 Hz outlet.
• There is a risk of electric shock or fire.

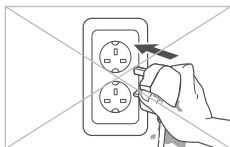


⚠ Do not touch the power plug with wet hands.
• There is a risk of electric shock or fire.

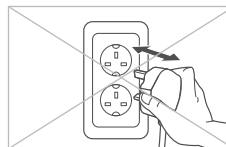

⚠ Do not plug or unplug the power plug repeatedly.
• There is a risk of electric shock or fire.




⚠ Be sure to unplug the power cord while repairing or inspecting the product or changing its parts.
• There is a risk of electric shock or fire.

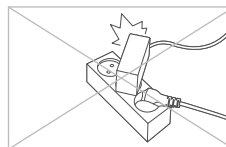


⚠ Do not connect multiple electronic devices to one power outlet. Always use a separate outlet for the product.
• There is a risk of electric shock or fire.


These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

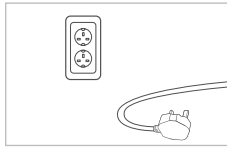


- !** If you don't use it for a long time, then disconnect the power adapter.
- There is a risk of electric shock or fire.

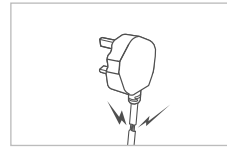


- !** If the power plug is damaged, do not attempt to replace the plug. Instead, contact the service center to replace it.
- There is a risk of electric shock or fire.

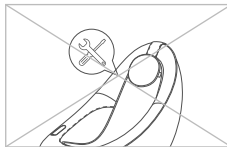


- !** Never arbitrarily disassemble, repair, or remodel the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

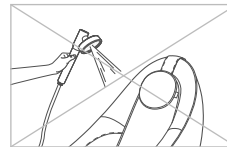


- !** Do not immerse the product in water or spray water over it.
- There is a risk of electric shock or fire.

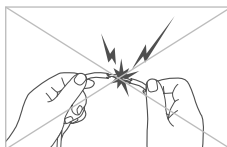


- !** Do not arbitrarily connect or modify the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.

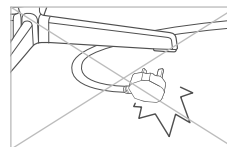

- !** Be careful not to let the power plug fall under the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

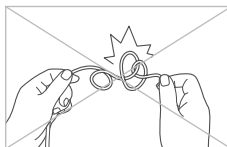

- !** Do not damage the power plug. Do not bring the product close to a heating device, or excessively bend, pull, tie, or twist it, or place a heavy object on the product.
- There is a risk of electric shock or fire.

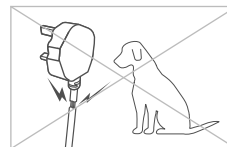


- !** Be careful not to let pets bite the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.

1. Safety information

⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.


⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.

Installation

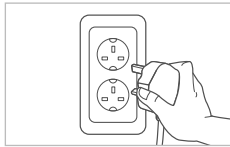


⚠ Before using the product, check if the power is securely connected.

- There is a risk of electric shock or fire.

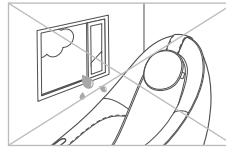

⚠ Do not install the product in a location that is highly humid, dusty, or exposed to splashes of water (rain).

- There is a risk of electric shock or fire.

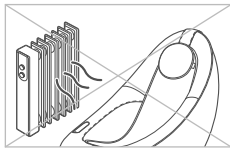

⚠ Do not install the product near an electric heating device.

- There is a risk of electric shock or fire.




⚠ Do not use or store flammable gas or substance near the product.

- There is a risk of fire.




⚠ Install the product in a place where the floor is flat.

- If the product is installed on a tilted surface, there is a risk of bodily harm or product damage.

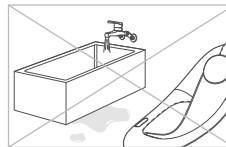

⚠ Do not install the product in a wet or humid place such as a swimming pool or bathroom.

- There is a risk of electric shock and short circuit.

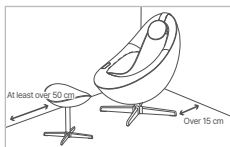

⚠ Install the rear part of the backrest at least 15 cm away from the wall and the front part of the leg massage part at least 50 cm away from the door.



⚠ After using the product, be sure to turn off the power button and unplug the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire.




⚠ Do not apply excessive force or shock on the product.

- There is a risk of product damage.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

During use by children (infants)

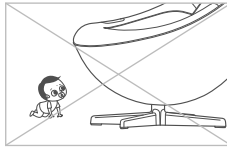


- ⚠** Be careful not to let children or pets get under the chair, into the rear part, or the leg control part.
- There is a risk of injury.




- ⚠** Instruct children, or people who cannot express themselves not to use the product alone. Also, keep it out of reach of children.
- There is a risk of bodily harm.



- ⚠** Please do not allow children to climb on or use the massage chair.
- There is a risk of injury.

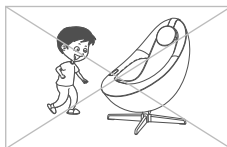

- ⚠** Children must not play with the appliance.
- There is a risk of rollover.

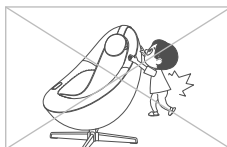


- ⚠** Do not cling to the device.
- There is a risk of rollover.


During use by elderly people (vulnerable group)



- ⚠** The following patients shall not use the product:
- People with sprain or symptoms of sudden contraction and disconnection of muscle.
 - Pregnant women in early pregnancy or immediately after giving birth.

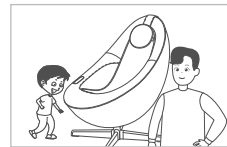

- ⚠** A person who lacks physical, sensory, or mental abilities (including children) need supervision or instruction when using the product.
- There is a risk of bodily harm and product failure.

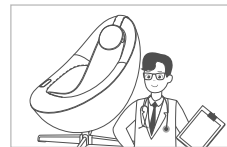

- ⚠** The following people should use the product after consulting a doctor. An accident may occur.
- Those who receive treatment from a doctor due to an accident or illness, or who have something wrong with the body
 - Users who have long-term hospital treatment or aftereffect

1. Safety information

⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


During use by general users




- ⚠** Do not use the heating function for a long time.
- There is a risk of burn.



- ⚠** If you feel something wrong with your body while using the product (pain, rash, seizure, itching, etc.), stop using it immediately and consult a doctor.
- There is a risk of bodily harm and health problem.

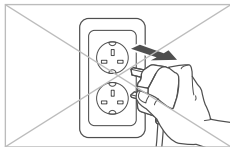


- ⚠** Do not pull out the power forcibly while the product is operating.
- There is a risk of electric shock or fire.

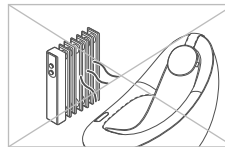


- ⚠** Do not place any appliance that generates heat or moisture near the product.
- There is a risk of electric shock or fire.




- ⚠** In case of product failure, malfunction, product immersion or exposure to moisture, contact the service center.
- There is a risk of fire.

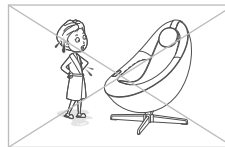


- ⚠** Do not use the product while your body is wet after taking a shower, or while your hair is wet after washing your hair.
- There is a risk of fire.

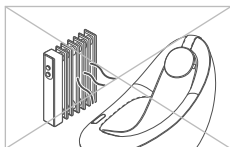


- ⚠** Do not place an electric blanket over the massage chair or use other heating devices together.
- There is a risk of electric shock or fire.

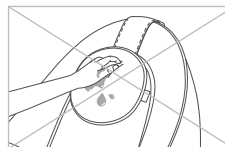

- ⚠** Do not touch the product with wet hands.
- There is a risk of electric shock.

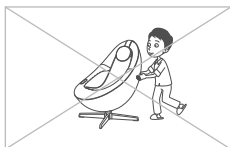


- ⚠** Do not move the massage chair while the product is operating.
- There is a risk of bodily harm, accident, and product failure.

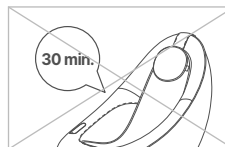

- ⚠** Do not use the massage chair for more than 30 minutes per time. Do not massage too much or massage a specific body area for more than 5 minutes.
- There is a risk of bodily harm and accident.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

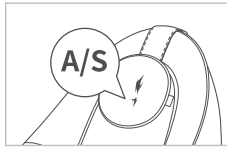


- ⚠️ If the sheet is torn, stop using it immediately and contact the service center.
 - There is a risk of bodily harm and accident.



- ⚠️ Do not sleep in the massage chair.
 - There is a risk of bodily harm and accident.




- ⚠️ Do not use the product other than massage purpose.
[sleeping, jumping & etc]
 - There is a risk of bodily harm and accident.

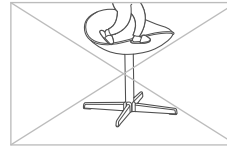

- ⚠️ Do not sit or climb on the leg rest.
 - There is a risk of bodily harm and product failure.




- ⚠️ Do not press the massage rollers directly with your hand or step on it with your feet.
 - There is a risk of bodily harm and accident.

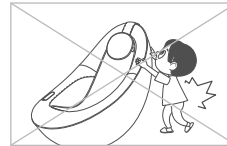

- ⚠️ Do not sit on, climb on, or cling to the backrest of the massage chair.
 - There is a risk of bodily harm and product failure.




- ⚠️ When massaging the area around your neck, pay attention to the movement of the massage rollers and refrain from massage with excessive force.
 - There is a risk of bodily harm.

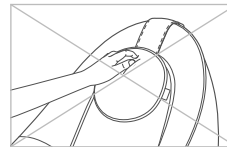

- ⚠️ Do not place your hand directly between the massage rollers while the product is operating.
 - There is a risk of bodily harm and product failure.



- ⚠️ When using the product, do not use the product while wearing clothes that are too thin, such as bare skin or underwear.
 - There is a risk of bodily harm.

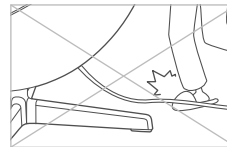

- ⚠️ Be careful not to get your feet caught by the product and the power plug.
 - There is a risk of bodily harm.

1. Safety information

⚠ Warning: Indicates a case that may result in serious injury or death when violating instructions.

⚠ Caution: Indicates a case that may result in minor injury or product damage when violating instructions.


During use by general users



⚠ The shoulder position may not be correct depending on the user's height.




⚠ The recommended user weight is 100 kg or less.

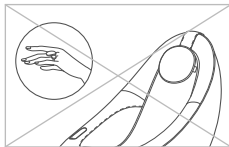

⚠ When using the product, remove accessories (bracelets, rings, watches, etc.) before use.

- There is a risk of bodily harm and accident.

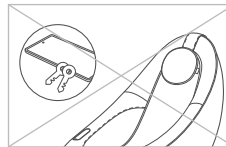

⚠ Empty your pockets (smartphone, wallet, keys, etc.) before using the product.

- There is a risk of bodily harm and accident.




⚠ Do not take in food or drink while using the product.

- There is a risk of bodily harm and accident.




⚠ Do not lean on the massage chair.

- There is a risk of bodily harm and accident.

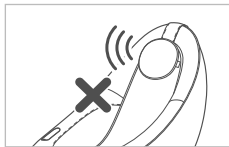

⚠ When using a Bluetooth speaker, do not use it with huge volume for a long time.

- It may cause hearing damage.

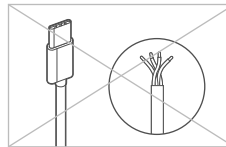

⚠ Use a shielded cable when charging using the USB charging terminal.


- It may cause electric shock, fire or failure.

* Shielded cable refers to a cable that is protected by wrapping aluminum foil around the wire or densely binding the wire with copper or steel in the form of a net to suppress noise coming from the outside/inside.

2. Part name

Adjust the headrest pad by hand.
You can recline or remove the headrest pad as needed.


Product exterior

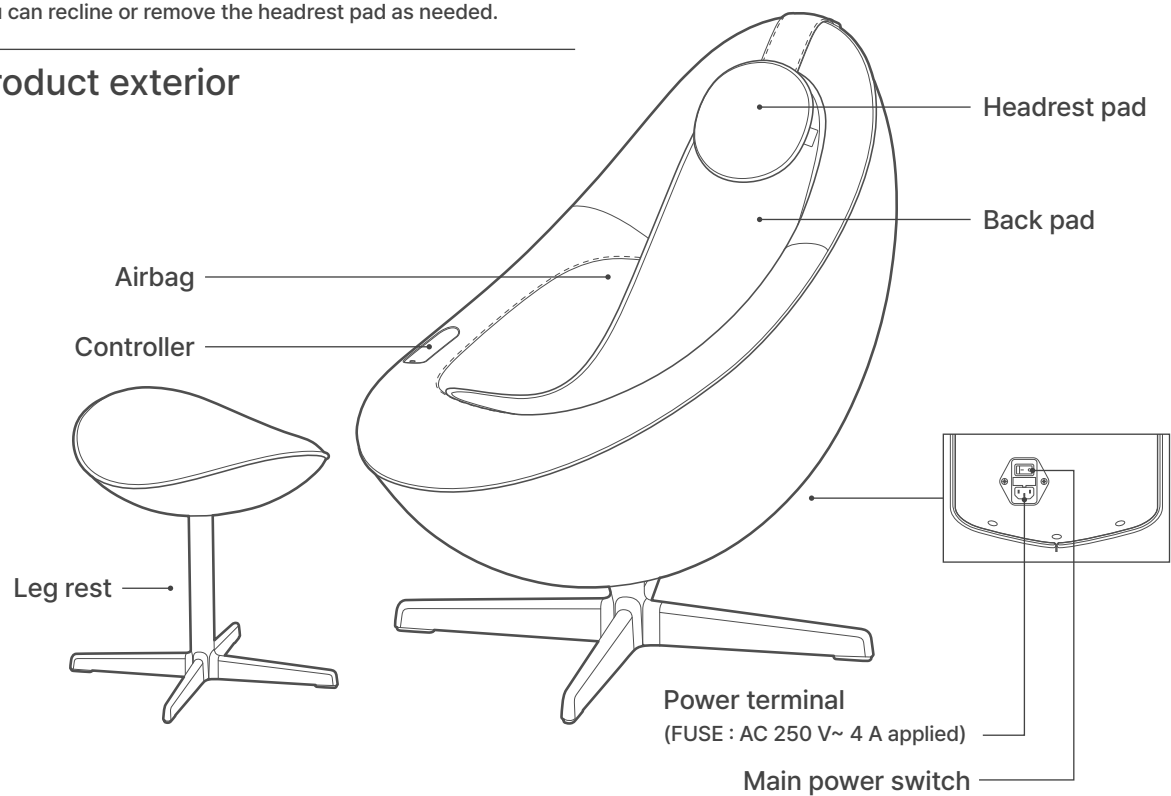


Other components



User Manual

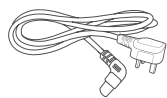

Power line

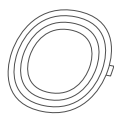

Cushion

3. Check before use

This product is for 220 - 240 V~, 50/60 Hz only. Be sure to connect the power plug to a grounded 220 - 240 V~, 50/60 Hz outlet. The massage chair operates normally only if the power is connected.

Warning

Patients who shall not use the product and users who need prescriptions

- **The following patients shall not use the product:**
 - ① Those who have been recognized as inappropriate to use the product by a doctor due to thrombosis, embolism, severe varicose vein, acute varicose vein, etc.
 - ② Those who are suspected of acute cervical sprain (whiplash)
 - ③ Those with sprain or symptom of sudden contraction and disconnection of sprain or muscle
 - ④ Those who are in early pregnancy or immediately after childbirth
 - ⑤ Those who have backbone (spine) abnormality due to an accident or disease in the past, or a person whose backbone is bent left and right
 - ⑥ Those with severe osteoporosis
 - ⑦ Those with acute intestinal disease, severe heart failure
 - ⑧ Those with severe seizure symptoms or psychogenic diseases (perception disorder)
 - ⑨ Those who use an implantable electronic medical device such as an implantable pacemaker
 - ⑩ Those who have been recognized as having a loss of thermal sense due to a high degree of peripheral circulatory disturbance due to diabetes, etc.
 - ⑪ Those who have or are concerned to have osteomyelitis
 - ⑫ Those who have limited expression and body movement
- **The following people shall use the product after consulting a doctor.**
 - ⑬ Those who may have side effects due to the use of the product, such as pregnant women
 - ⑭ Those whose body temperatures are higher than normal due to acute inflammation and chill
 - ⑮ Those who have with acute skin disease, malignant tumor, or other skin diseases
 - ⑯ Those who receive medical treatment and need stability accordingly
 - ⑰ Those who feel other body abnormalities

Precautions


Precautions before use

- If you have a disease for which you shall not use the product, check with your doctor as there is a concern about side effect caused by the use of the product.
- Check how to operate the product possible side effects.
- To use the product safely, start with a low-intensity massage.
- Check the location of the "Power" button before using the product.
- Check the duration of the massage session of the product.
- If the cover of the product is torn or peeled off, clothes or hair may get caught into the massage chair and cause accident. Check if there is any abnormality in the appearance of the product.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

Precautions during use

- If you feel any irritating pain or something wrong with your body, stop using the product immediately and see a doctor.
- Avoid direct skin contact with the heating part and motor moving part of the product.
- Monitor your usage time when performing a massage.
- When using the product, do not use it together with other vibrators or electric mats.
- More than 2 persons shall not use the product at the same time.
- Make sure not to damage the massage area of the product with accessories. (hair ornaments, necklaces, wristwatches, bracelets, rings, etc.)

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

 Precautions when a failure occurs

If a problem with the product occurs, please do not disassemble the product at your discretion.
Additional product defects and accidents may occur.

Before you contact the Careline, check the user manual to take an action. If the problem is not solved, please contact the Careline for further assistance.

 Precautions

Possible side effects when using the product

• **Be careful as the following side effects may occur due to the use of the product.**

- ① Abrasion, contusion, bruise, stab, cut, etc.
- ② Damage to muscles, tendons, nerves, spine and etc., due to excessive use and pressure of the product
- ③ Skin diseases and burns, etc.
- ④ Fracture and dislocation, sprain, etc.
- ⑤ Respiratory/digestive disorders and suffocation, etc.

Check before using the product.

- Check that there are no objects, people or pets around the product.
- Before use, check that the device operates normally by pressing all the switches according to this manual.

Coway Thailand is not responsible for the following:

- If you do not observe the use according to the user manual or failure to observe the precautions for use
- If a product is repaired or remodeled by a third party other than the Coway Careline, partner company, or designated engineer, thereby resulting in a failure or accident
- If a failure occurs due to natural disasters (fire, earthquake, flood, lightning, etc.)


Please keep this User Manual in a safe place.

When moving the product, do not arbitrarily move it and contact the Careline.

- It may cause damage such as scratch to the floor.

1. Controller and main functions

Controller

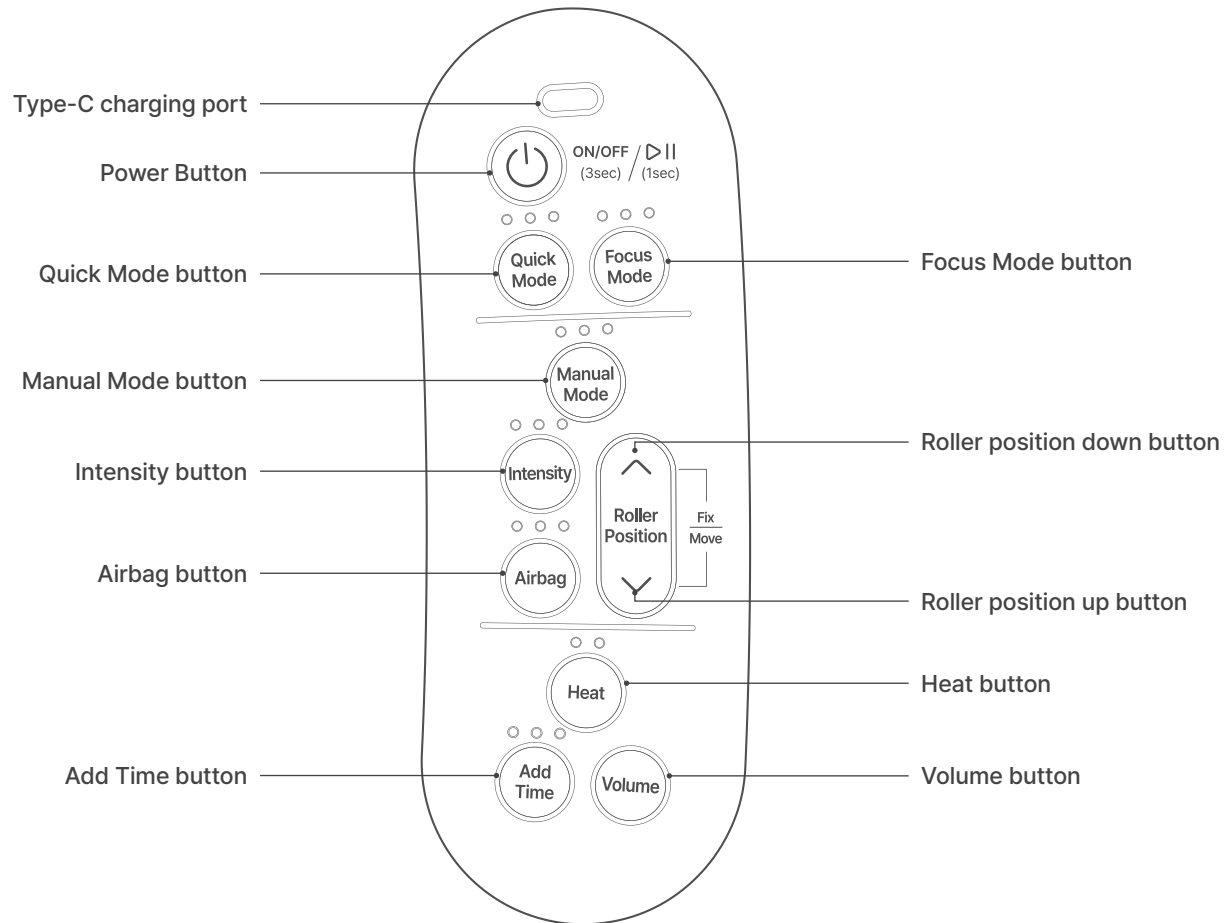

Controller




Power Button

- Press and hold the Power button for **about 3 seconds** to turn on or off the power of the massage chair. If you turn off the power, all functions are ended, and the chair and massage module return to their initial positions.
- To pause during massage operation, press the Power button for about 1 second. If you press the Power button for about 1 second in pause state, the massage operation is restarted.



Manual Mode button

- Press the button to select a massage mode.
 - ○ ○ Tapping
 - ● ○ Acupressure
 - ○ ● Kneading
 - ● ● Mixed
 - ● ● Rubbing

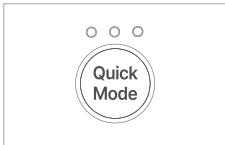


Quick Mode button

- Press the button to select 3 automatic massage modes.
 - ○ ○ Specialized 1 - Good morning course
 - ● ○ Specialized 2 - Good day course
 - ○ ● Specialized 3 - Good night course




Intensity button

- Press the button to select a massage intensity level.
- The initial intensity of the massage operation is level 1, and if you press the button, intensity level is selected in the order of 1 > 2 > 3 > 1.
 - ○ ○ Intensity 1
 - ● ○ Intensity 2
 - ● ● Intensity 3

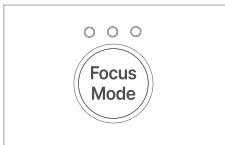

Focus Mode button

- Press the button to select 3 automatic massage modes.
 - ○ ○ Part 1 - Focus on neck & shoulders
 - ● ○ Part 2 - Focus on back & waist
 - ○ ● Part 3 - Focus on pelvis

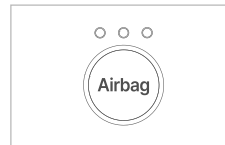


Airbag button

- Press the button to select airbag intensity.
- The initial intensity of the airbag operation is level 1, and if you press the button, the intensity level is selected in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.
 - ○ ○ Intensity 1
 - ● ○ Intensity 2
 - ● ● Intensity 3
 - ○ ○ OFF


1. Controller and main functions

Controller

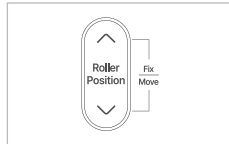


Roller Position up/down/Fix/Move button

- You can 'move' or 'fix/cancel' the position of the massage roller.
- You can move the position of the massage roller by pressing the roller position 'Up' or 'Down' button, and you can fix the massage roller by pressing the 'Up' and 'Down' buttons at the same time.
- If you press the 'Up' and 'Down' buttons at the same time or change the massage mode while the massage roller is fixed, the massage roller fix is 'canceled'.

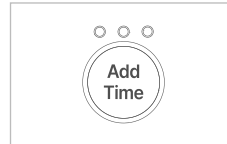

Add Time button

- Press the button to add massage time.
 - The default massage time is 20 mins. Each press of the button will add 20 mins massage time. (Max 60 mins massage time).
- ○ ○ 20 minutes
 - ● ○ 40 minutes
 - ● ● 60 minutes

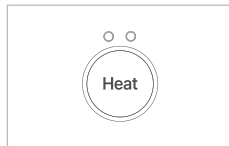

Heat button

- Turn on or off the power of the heating function.
- The initial state of the heating is OFF, and if you press the button, it operates in the order of level 1 > level 2 > OFF > level 1.

- ○ Level 1
- ● Level 2
- ○ OFF

- ⚠ Caution:
There is a risk of burns if the heating function is used for a long time.




Volume button


- Press the button to adjust the volume.
- The initial volume is level 1, and if you press the button, the volume is operated in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.

2. How to use


01. Turn on the power.

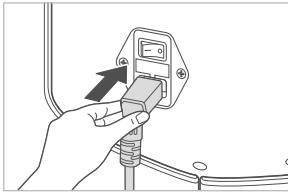

1. Insert the power plug in the massage chair.

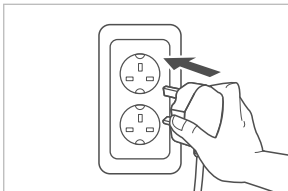


2. Insert the power plug into the outlet.

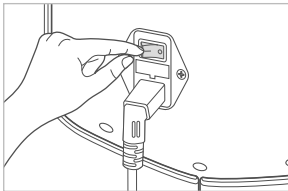

3. Turn on the main power switch on the back of the product.

2. How to use

01. Sit on the massage chair in an upright position.

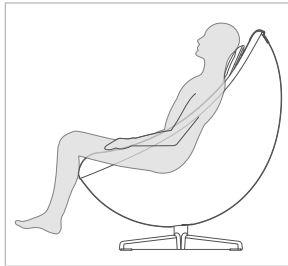


How to sit on a massage chair properly

Bring your buttocks and lower back as close as possible to the massage chair and sit on it.


- Do not forcibly get out of the massage chair while it is moving. This may apply the force to the product to cause a product failure and injury to the user.
- When using a Bluetooth speaker, set the volume appropriately. Loud volume may cause hearing loss.

02. Press the Power button on the controller

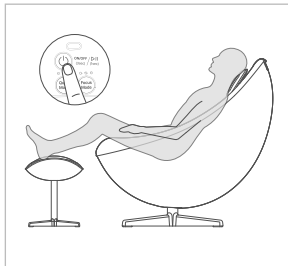

- If you press the power button for about 3 seconds, the power turns on. At this time, all LEDs except for the power LED blink twice.
- If you turn on the power, the power LED lights on in green and remains in standby mode.
- After this, if you press a massage mode you want, the power LED lights on in white, and the massage starts after the shoulders are detected.
- If the shoulders are not detected, the massage roller moves to the top and the massage starts.
- When you turn on the power, the massage rollers may move slightly.
- The type-C charging port can only be used when the power is turned on.


03. Adjusting the leg rest height

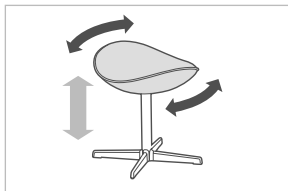

- Rotate the seat of the leg rest in both directions to adjust the height.

3. Massage mode selection


01. Quick Mode

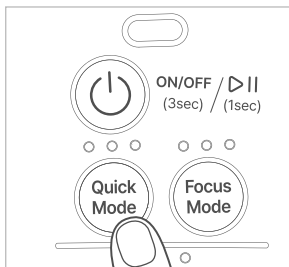

The Quick Mode operates automatically by combining massage modes such as massage and tapping with the air massage function. Press the Quick Mode button on the controller to select 3 courses.

- ○ ○ Specialized 1 - Good morning course
 - ● ○ Specialized 2 - Good day course
 - ○ ● Specialized 3 - Good night course
- If you press the button, the courses are selected in the order of Good morning > Good day > Good night > Good morning.
 - In Quick Mode, it is operated in heating level 2. If you do not want to use the heating function, press the Heating button to turn off the heating function.

02. Focus Mode

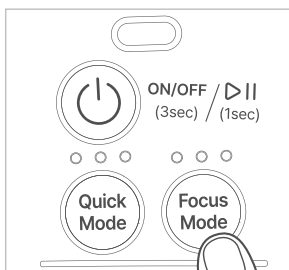


The Focus Mode massages a specific body area intensively by combining massage modes such as massage and tapping with the air massage function. Press the Focus Mode button on the controller to select 3 courses.

- ○ ○ Part 1 - Neck & shoulders
 - ● ○ Part 2 - Back & waist
 - ○ ● Part 3 - Pelvis
- If you press the button, the courses are selected in the order of Neck & shoulders > Back & waist > Pelvis > Neck & shoulders.

3. Massage mode selection

03. Manual Mode

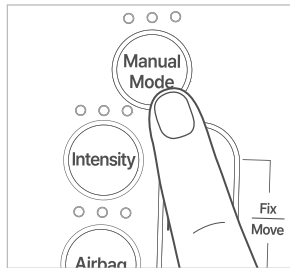

In the Manual Mode, the module moves up and down repeatedly and a user selects the massage mode manually. Press the Manual Mode button on the controller to select 5 courses.

- ○ ○ Tapping
- ● ○ Acupressure
- ○ ● Kneading
- ● ● Mixed
- ● ● Rubbing

- If you press the button, the courses are selected in the order of Tapping > Acupressure > Kneading > Mixed > Rubbing > Tapping.

Body type analysis

- Turn on the power and analyze body shape upon initial operation.
- If you want a massage right away without body shape analysis, press and hold the Volume button for about 3 seconds while analyzing the body shape.


Pause/restart massage

- To pause during massage operation, press the Power button for about 1 second.
- If you press the Power button for about 1 second in pause state, the massage operation is restarted.
- When paused, the power LED blinks • The massage function ends after 10 minutes pause time.

End massage

- To end massage, press and hold the Power button for about 3 seconds.
- The maximum time for one massage is 60 minutes, and the power turns off automatically after 60 minutes.
- When the massage is ended, the massage module returns to its initial position.
- When the massage is ended, the power LED lights up in red.


04. Adjusting the massage intensity

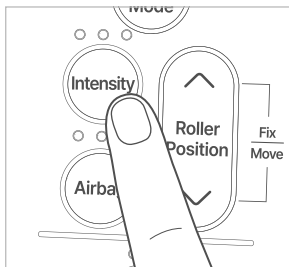

You can adjust the intensity of the massage roller.

- If you press the Intensity button on the controller, the intensity is selected in the order of 1 > 2 > 3 > 1.
- You can adjust the massage intensity during specialized massage, intensive body area message, or manual massage.

05. Adjusting the airbag intensity

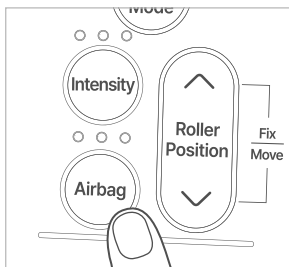


You can adjust the intensity level of airbag.

If you press the Airbag button on the controller, the intensity is selected in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.

- You can adjust the airbag intensity level during specialized massage and intensive body area message.


06. Adjusting the massage roller position

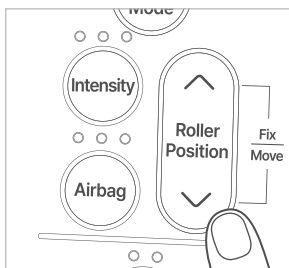

1. If you press the roller position up and down buttons simultaneously or press only one button during the massage operation, the ball position is fixed.
2. While pressing the roller position up button during intensive massage (massage roller fixed), the massage module moves upward.
3. While pressing the roller position down button during intensive massage (massage roller fixed), the massage module moves downward.
4. When the intensive massage operates in specialized massage or Focus Mode, the massage operation is repeated at the position.
5. When the intensive massage operates in Manual Mode, the selected manual mode is repeated at that position.
6. During intensive massage (massage roller fixed), press the roller position up and down buttons simultaneously to return to the previous massage mode.
7. If you enter a specialized massage or intensive body area message, the selected massage operate is operated and the massage roller is released.

4. How to use additional functions


07. Adding time

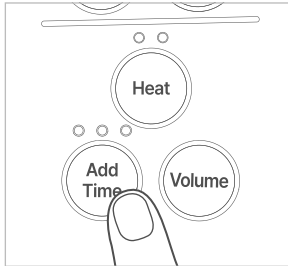

Press the Add Time button to add a massage time.
The default massage time is 20 mins. Each press on the button will add 20 mins massage time.

- ○ ○ 20 minutes
- ● ○ 40 minutes
- ● ● 60 minutes
- The maximum time for one massage is 60 minutes, and the power turns off automatically after 60 minutes.


08. Using the heat function

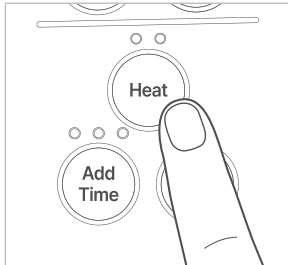

Turn on or off the power of the heat function.
If you press the Heat button, the function operates in the order of 1 > 2 > OFF > 1.


- ○ Heat 1
- ● Heat 2
- ○ OFF
- In Quick Mode, it is operated in heat level 2. If you do not want to use the heat function, press the Heat button to turn off the heat function.
- * Caution: There is a risk of burns if the heat function is used for a long time.

09. Setting the volume

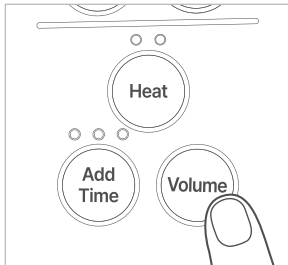


Adjust the volume level of voice guidance or turn it off.
If you press the Volume button, the volume operates in the order of 1 > 2 > 3 > OFF > 1.

10. Turning off the power

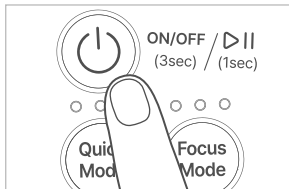

Press and hold the Power button on the controller for about 3 seconds.
Each part of the massage chair and the massage machine move to their initial position.
When the massage is ended, the power LED lights on in red.

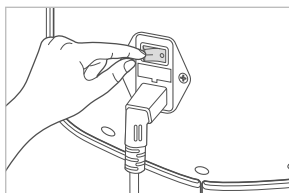

Turn off the main power switch on the back of the product.

11. Using a Bluetooth speaker


To use the speaker, connect the speaker to a smartphone, computer, etc. via Bluetooth.

- If you want to connect your device with the product via Bluetooth, please search 'TH_COWAY_MC-C01_000001 (serial number)'. (Password: 9999)
- If your device is already connected to another device, disconnect from that device to connect with the massage chair Bluetooth speaker.
- Bluetooth speakers may not be compatible with some device models.

1. How to clean

- Be sure to remove the power plug before cleaning.
 - Do not immerse the product in water or spray water over it.
 - Do not use organic solvents (thinner, etc.), bleach, or detergents containing chlorine or abrasives to clean the product.
-


How to clean the main body

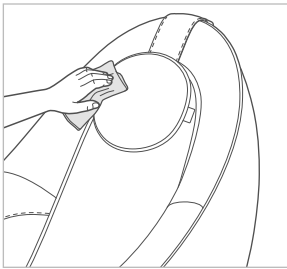

Wipe the exterior and cover of the product with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Do not wash the product cover in a washing machine. It may cause product damage.
- Do not iron the product cover with an iron. It may cause fire or product damage.

How to clean the controller

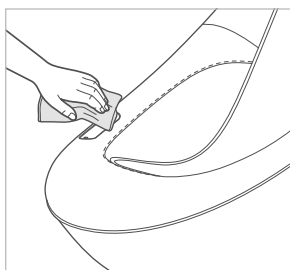

Wipe the controller with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Be careful not to allow foreign substances to enter the USB charging terminal.

1. Troubleshooting

Symptom	Check	Countermeasure
Noise is loud.	<ul style="list-style-type: none"> • Sound occurred while the air massage function is operating • Gear motor noise when the massage operates • Rattling noise when tapping • Rattling sound as the massage roller rub against each other 	It is a sound occurred during normal product operation.
Power does not turn on.	The power switch on the back of the product does not turn on.	Turn on the power switch on the back.
	Poor contact with the power plug socket	Insert the power plug and socket correctly.
	Power plug broken	Contact the Careline.
	Poor connection of the power plug	Contact the Careline.
	The Power button on the controller has not been pressed.	Press the Power button on the controller.
The product stops suddenly during the massage.	Turn off the power switch on the back of the product, wait about 1 minute, and then turn on the power switch again. Press the Controller power button for 3 seconds to turn it on, and then press the Power button again for 3 seconds to check the product again.	If the power button is pressed after taking the necessary measures and the product still does not function properly, stop using the product, unplug the power plug, and contact the Careline.
	Regardless of the massage mode, the power is automatically turned off when the massage chair is used for 1 hour.	Press the power button to restart.
The massage roller stops suddenly during the massage.	Did you apply more force than necessary to the massage roller?	Please turn your body slightly. If the product operates normally, it is not a product failure. * If a user whose weight is 100 kg or more uses the product, be careful. This may happen.
The reclining function does not operate.	Check if there are any disturbance substances around the product.	Have enough space behind the backrest to lie down.
During operation, the massage roller gets caught in the inner cloth or bounces.	Friction between massage rollers and seat	This is not a malfunction because it is a temporary symptom caused by the massage rollers during message.
The airbag does not operate.	Check if the airbag intensity LED is turned on.	Check if the airbag intensity LED is turned on. The airbag operation is included in the massage operation, and the airbag does not operate immediately with the Airbag button.

2. Specification

Product name	Coway MC-C01 (Pebble) Massage Chair	
Model name	MC-C01 (Pebble)	
Rated voltage	220 - 240 V~, 50/60 Hz	
Power consumption	77 W	
Size	When erected	1 015 mm (W) X 735 mm (D) X 1 120 mm (H)
	When laid down	1 120 mm (W) X 735 mm (D) X 970 mm (H)
Weight	Product: 45.5 kg Leg rest: 4.5 kg	
USB	DC 5 V 3 A	
Distributor	COWAY (THAILAND) CO., LTD.	

- There may be changes to the specifications to improve the product's performance.

3. Memo

3. Memo

|||| Preparation for use

|||| How to use

|||| Maintenance

|||| Others

coway

Massage Chair
MC-C01 (Pebble)
User Manual

COWAY (THAILAND) CO., LTD.

001

coway

เบาะนวด โคเวย์
คู่มือการใช้งาน

This product is for domestic use only. You cannot use the product overseas where different voltages are used. For your safety and proper use of the product, please read this user manual before use.

TH

เรียนลูกค้า Coway

ขอขอบคุณที่ใช้งานเบาะนอน Coway

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดเพื่อการใช้งานและเพื่อการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างเหมาะสม

ท่านสามารถอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้งาน

ข้อบ่งใช้: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ขั้วคราวและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ขั้วคราว

III โปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ข้อมูลความปลอดภัย | 4 |
| 2. ตรวจสอบก่อนใช้งาน | 6 |
| 3. ชื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม | 8 |

III ทำความเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้องและฟังก์ชันต่างๆ

- | | |
|------------------|---|
| 1. วิธีการใช้งาน | 9 |
|------------------|---|

III เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดและดูแลผลิตภัณฑ์

- | | |
|----------------------|----|
| 1. วิธีการบำรุงรักษา | 11 |
|----------------------|----|

III ทำความคุ้นเคยกับข้อมูลนี้ล่วงหน้าเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

- | | |
|------------------|----|
| 1. การแก้ไขปัญหา | 12 |
| 2. ข้อมูลจำเพาะ | 13 |

1. ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟหลักเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และห้ามใช้หากตัวเครื่องหรือสายไฟชำรุด
- ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระหว่างลูกกลิ้งขนาดและตัวเครื่อง
- ห้ามฉีดน้ำใส่ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- หากปลั๊กไฟชำรุด โปรดติดต่อ Call center เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- ห้ามใช้ความรุนแรงกับปลั๊กไฟ หรือผลิตภัณฑ์ หรือตัดปลั๊กไฟ
- อย่าใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร
- ถอดปลั๊กไฟหลังจากใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด
- อย่าใช้งานอุปกรณ์นี้หากตัวเครื่องหรือปลั๊กไฟชำรุด
- หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาระหว่างการใช้งาน ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์แล้วติดต่อ Call Center เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- อย่าใช้งานอุปกรณ์นี้หากท่านเมาหรือรู้สึกไม่สบาย
- อย่าใช้ความรุนแรงมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้
- บุคคลต่อไปนี้ควรไปปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
 - ผู้ใช้ที่กำลังรับการรักษาจากแพทย์เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้มีอาการเจ็บป่วย หรือผู้ที่มีร่างกายผิดปกติ
 - ผู้ใช้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
 - ผู้ใช้ที่มีอาการบาดเจ็บที่คอหรือเข้ารับการผ่าตัดไม่นานนี้

ข้อมูลความปลอดภัย

- บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้ หรือสติปัญญา (รวมถึงเด็ก) ต้องได้รับการกำกับดูแลหรือคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
- หากอะแดปเตอร์ไฟเสียหายหรือทำงานไม่ปกติ อย่าเปลี่ยนด้วยตัวท่านเอง โปรดติดต่อ Call Center เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- ห้ามสัมผัสปลั๊กด้วยมือที่เปียก
- เมื่อทำการเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ อย่าดึงสายไฟแรงเกินไป
- อย่าทำให้สายไฟเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงวงจรของอุปกรณ์นี้
- หากท่านพบปัญหาระหว่างการใช้งาน ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันที แล้วติดต่อ Call Center เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- หากท่านรู้สึกว่ามีคามผิดปกติกับร่างกายระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้หยุดใช้งานทันทีและปรึกษาแพทย์
- อย่านำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ร่วมกับหากฝาครอบเสียหาย
- ห้ามกดผลิตภัณฑ์แรงเกินไป หรือใช้แรงกดผลิตภัณฑ์กับร่างกายของท่านมากเกินไป และอย่าใช้วัตถุแข็งจับผลิตภัณฑ์ หรือเหยียบผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ หรือเปลี่ยนอะไหล่ตามอำเภอใจ
- อย่าตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ใกล้กับไฟหรือสสารติดไฟได้ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานล้มเหลว อันตราย การเสีรูปทรง สีเพี้ยน หรือเสียหาย
- หากท่านพบปัญหาระหว่างการใช้งาน ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีแล้วปิดเครื่อง
- ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือเป็นอัมพาตต้องใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การกำกับดูแลหรือหลังจากปรึกษาแพทย์

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

- อย่านำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง เช่นห้องน้ำ
- อย่านำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- อย่านำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อนจำนวนมาก

2. ตรวจสอบก่อนใช้งาน

⚠ คำเตือน

ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้และผู้ใช้ที่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์

• ผู้ป่วยต่อไปนี้ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:

- ① ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่เหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีภาวะล้มเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดอุดตัน เส้นเลือดอุดตันรุนแรง หรือเส้นเลือดอุดตันระยะเฉียบพลัน ฯลฯ
 - ② ผู้ที่สงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่คอแบบเฉียบพลัน
 - ③ บุคคลที่มีกล้ามเนื้อเนื้อฉีกขาดหรือมีอาการกล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลันและมีภาวะกล้ามเนื้อไม่เชื่อมต่อ
 - ④ ผู้ที่มีครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกหรือทันทีหลังจากคลอดบุตร
 - ⑤ ผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุหรือโรคในอดีต หรือผู้ที่มีกระดูกสันหลังกดไปด้านซ้ายหรือขวา
 - ⑥ ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนระดับรุนแรง
 - ⑦ ผู้ที่มีโรคทางลำไส้ระยะเฉียบพลันหรือภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง
 - ⑧ ผู้ที่มีอาการชักรุนแรงหรือโรคทางจิตเวช (ความผิดปกติทางการรับรู้)
 - ⑨ ผู้ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง
 - ⑩ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าสูญเสียความรู้สึกต่ออุณหภูมิ เนื่องจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดส่วนปลายระดับรุนแรงจากโรคเบาหวานเป็นต้น
 - ⑪ ผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคกระดูกอักเสบ
 - ⑫ ผู้ที่มีการแสดงออกและการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำกัด
- #### • บุคคลต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
- ① ผู้ที่อาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น หงุดหงิด ครรภ์
 - ② ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติเนื่องจากอาการอักเสบเฉียบพลันหรืออาการหนาวสั่น
 - ③ ผู้ที่เป็นโรคผิวหนังระยะเฉียบพลัน เนื่องจากมีเรื้อรัง หรือโรคผิวหนังอื่นๆ
 - ④ ผู้ที่กำลังรับการรักษาทางการแพทย์และจำเป็นต้องพักผ่อนร่างกายตามคำแนะนำ
 - ⑤ ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดปกติอื่นๆ ของร่างกาย รวมถึงการมีไข้สูง
 - ⑥ ผู้ป่วยที่มีร่างกายบาดเจ็บหรือโรคผิวหนัง
 - ⑦ เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี และผู้ที่มีข้อบกพร่องทางระบบประสาท
 - ⑧ ผู้ที่ตัวเปี้ยก
 - ⑨ ผู้ที่อ่อนไหวต่อความร้อน

⚠ ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังก่อนใช้งาน

- หากท่านมีโรคที่ทำให้ท่านไม่ควรใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดสอบถามแพทย์ของท่าน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ให้เริ่มด้วยการการนวดระดับเบา
- ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม “Stop” (หยุด) หรือ “End” (สิ้นสุดการนวด) ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบระยะเวลาการนวด
- หากผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ฉีกขาดหรือลอกออก เสื้อผ้าหรือผมอาจเข้าไปติดและทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติบนผลิตภัณฑ์หรือไม่

ข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน

- หากคุณรู้สึกเจ็บปวดระคายเคือง หรือมีความผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันทีและไปพบแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงกับส่วนที่ให้ความร้อนและชิ้นส่วนมอเตอร์ที่เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์
- ฝ้าสังเกตระยะเวลาการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน
- เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่าใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นวดแบบสั่นหรือแผ่นทำความร้อนไฟฟ้าอื่น
- ระมัดระวังอย่าทำให้บริเวณนวดของผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์เสริมเสียหาย (เก็บติดผม สร้อยคอ นาฬิกาข้อมือ กำไล แหวน ฯลฯ)
- ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุและตามส่วนของร่างกายที่กำหนดไว้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรุณาอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวังเมื่อเกิดความขัดข้อง

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาอย่าถอดชิ้นส่วนหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมหรืออุบัติเหตุได้ ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้ากรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานเพื่อดำเนินการเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เรายินดีให้บริการและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวัง

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

- **โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาการข้างเคียงต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้**
 - ① แผลถลอก แผลฟกช้ำ แผลเลือดคั่ง แผลถูกแกว แผลมีดบาด ฯลฯ
 - ② การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท กระดูกสันหลัง ฯลฯ เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มากเกินไปหรือความแรงเกินไป
 - ③ โรคผิวหนังและแผลไหม้ ฯลฯ
 - ④ กระดูกหักและข้อเคลื่อน ข้อแพลง ฯลฯ
 - ⑤ ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ/ระบบย่อยอาหาร และภาวะหายใจลำบาก ฯลฯ

ตรวจสอบก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติหรือไม่ โดยการกดสวิตช์ทั้งหมดตามลำดับที่ระบุในคู่มือฉบับนี้


Coway Thailand ไม่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือผู้ใช้หรือละเลยข้อควรระวังในการใช้งาน
- กรณีที่ผลิตภัณฑ์ ได้รับการซ่อมหรือดัดแปลงโดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ Coway บริษัทผู้ค้าหรือช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ
- หากเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ฯลฯ)


โปรดเก็บคู่มือผู้ใช้ไว้ในสถานที่ปลอดภัย

3. ชื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม

ด้านหน้า

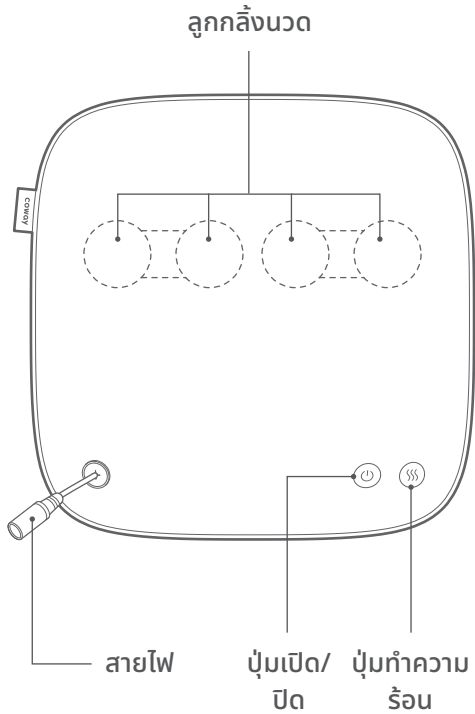


ด้านหลัง

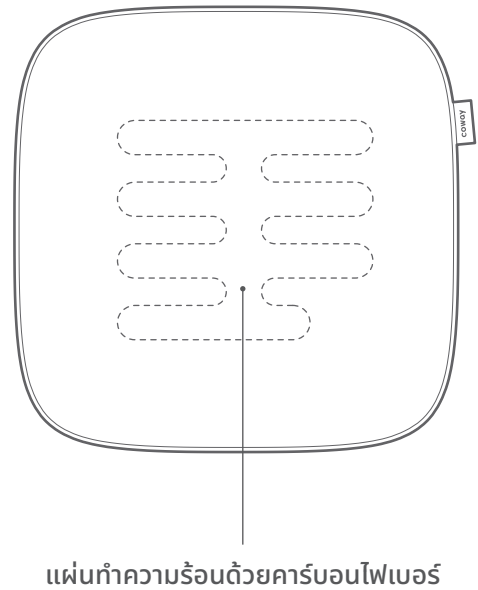

อุปกรณ์เสริม



คู่มือการใช้งาน

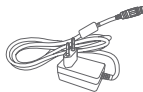


สายไฟ


1. วิธีการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลังงานด้วยแบตเตอรี่ และสามารถพกพาไปใช้งานแบบไร้สายได้ หรือใช้งานโดยเสียบสายไฟเข้ากับปลั๊กไฟ

01. การชาร์จ

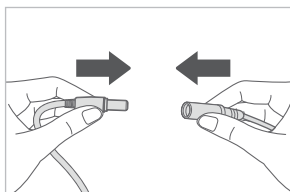


1. เชื่อมต่อแจ็กไฟเข้ากับเบาะนวด

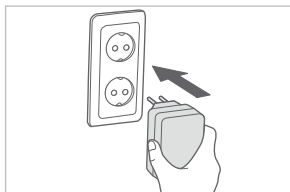

2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

หากท่านเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับในขณะที่ปิดพลังงาน ไฟตัวชี้บอกสีแดงบนปุ่มพลังงานจะเปิดขึ้น เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟตัวชี้บอกสีแดงบนปุ่มพลังงานจะดับลง


02. การเปิดเครื่อง

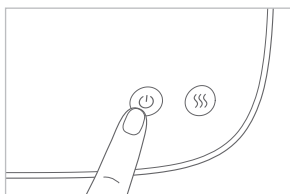

หากท่านกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เครื่องจะเปิด และลูกกลิ้งนวดจะทำงาน (โหมดเริ่มต้น: ความเร็วสูง)

- เปิดเครื่อง: ไฟแสดงสถานะสีเขียวที่ปุ่มเปิด/ปิดจะสว่างขึ้น

03. การปิดเครื่อง

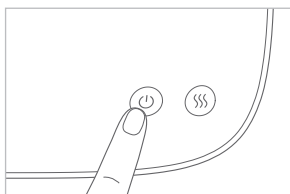


ระหว่างการใช้งาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

- ปิดเครื่อง: ไฟแสดงสถานะสีเขียวที่ปุ่มเปิด/ปิดจะดับลง


1. วิธีการใช้งาน

04. การปรับความเร็วในการนวด

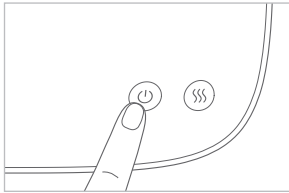

ขณะที่ลูกกลิ้งนวดยังทำงานอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ เพื่อปรับความเร็ว

05. การใช้ฟังก์ชันการทำความร้อน

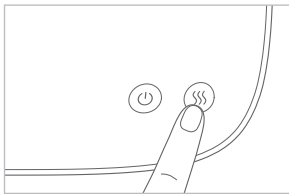

กดปุ่มทำความร้อนค้างไว้เพื่อเปิดฟังก์ชันการทำความร้อน

หากท่านกดปุ่มทำความร้อนค้างไว้อีกครั้ง ฟังก์ชันทำความร้อนจะถูกปิดลง

- การเปิดฟังก์ชันทำความร้อน: ไฟแสดงสถานะสีแดงที่ปุ่มทำความร้อนจะสว่างขึ้น
- การปิดฟังก์ชันทำความร้อน: ไฟแสดงสถานะสีแดงที่ปุ่มทำความร้อนจะดับลง


06. ระยะเวลาการทำงานต่อหนึ่งครั้ง

- ท่านสามารถเปิดฟังก์ชันการนวดและ ฟังก์ชันการทำความร้อนพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ และการทำงานแต่ละรอบจะใช้เวลา 15 นาที
- หากท่านเปิดฟังก์ชันการทำความร้อนในขณะที่กำลังใช้งานฟังก์ชันนวด ฟังก์ชันทำความร้อนจะปิดลงเมื่อใช้งานฟังก์ชันนวดจนครบเวลา
- หากท่านเปิดฟังก์ชันการนวดในขณะที่กำลังใช้งานฟังก์ชันทำความร้อน ฟังก์ชันนวดจะหยุดลงเมื่อใช้งานฟังก์ชันความร้อนจนครบเวลา

1. วิธีการบำรุงรักษา

- อย่าสัมผัสจุดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด
- อย่านำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำหรือจืดน้ำบนผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้สารละลายอินทรีย์ (เช่น กิเลนเนอร์ ฯลฯ) น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคลอรีนหรือวัสดุผงขัดในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการทำความสะอาด

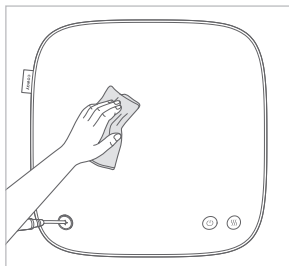

เช็ดด้านนอกและผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง

- เมื่อผลิตภัณฑ์สกปรก ให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ มาเช็ดสิ่งสกปรกออก
- ต้องแน่ใจว่าได้ซับน้ำส่วนที่เหลือออก
- อย่านำผ้าคลุมของผลิตภัณฑ์ไปซักในเครื่องซักผ้า อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่ารีดผ้าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยเตารีด อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

คำแนะนำในการจัดเก็บ


- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ตากแดดโดยตรงเป็นเวลานาน และอย่าตั้งไว้ใกล้กับไฟหรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
- หากจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่สะอาดและแห้ง
- หากผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงต่ำเนื่องจากการขนส่ง การเคลื่อนย้าย หรือเหตุผลอื่นๆ ให้วางผลิตภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเปิดใช้งาน
- อย่างวางผลิตภัณฑ์ไว้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่มีสารเช่น เชื้อรา ความชื้น หรือกำมะถัน มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได้

1. การแก้ไขปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟ	เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์
	ลูกกลิ้งนวดปิดโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานไป 15 นาที	กดสวิตช์เปิดเครื่องเพื่อเริ่มการใช้งานอีกครั้ง
	ใช้งานต่อเนื่อง 45 นาที (ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป)	ปิดเครื่องแล้วปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการใช้งานอีกครั้ง
	เกิดความเสียหายเนื่องจากใช้งานเกินกำลัง	โปรดใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์ร้อน	ฟังก์ชันทำความร้อนเปิดอยู่	กดปุ่มทำความร้อนค้างไว้เพื่อปิดฟังก์ชันการทำความร้อน
	หากท่านใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนานกว่า 45 นาที หรือใช้งานเกินกำลัง	ถอดปลั๊กไฟ รอ 1 ชั่วโมง แล้วจึงใช้งานอีกครั้ง
ข้างในผลิตภัณฑ์มีเสียงดัง	เป็นเหตุการณ์ปกติเนื่องจากโครงสร้างกลไกของผลิตภัณฑ์	เสียงนี้เป็นเสียงปกติ และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้เสียหายแต่อย่างใด

2. ข้อมูลจำเพาะ

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เบาะนวด โคอเวย์
ชื่อรุ่น	SM-C01
อัตราแรงดันไฟฟ้า	DC 12 V 
กำลังไฟฟ้า	12 W
ประเทศผู้ผลิต	ประเทศจีน
ผู้จัดจำหน่าย	COWAY (THAILAND) CO., LTD.
กระแสไฟฟ้าขาเข้าพิกัด	0.95 แอมป์

Dear Coway customers

Thank you for using the Coway Massage Cushion.

Please read this user manual carefully for the correct use and maintenance of the product.

You can refer to the user manual to troubleshoot product issues while using it.

Please keep this user manual in a safe place.

III Please check before use!

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Safety information | 4 |
| 2. Check before use | 6 |
| 3. Part names and accessories | 8 |

III Understand the correct usage and functions.

- | | |
|---------------|---|
| 1. How to use | 9 |
|---------------|---|

III Learn how to clean and manage the product.

- | | |
|------------------|----|
| 1. How to manage | 11 |
|------------------|----|

III Familiarize yourself with information in advance for safe use.

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Troubleshooting | 12 |
| 2. Specification | 13 |

1. Safety information

Precautions

- Check that the main power is suitable for the product, and do not use it if the case or power cable is damaged.
- Do not insert foreign objects between the massage roller and the case.
- Do not spray water over the product. An accident may occur due to short circuit.
- If the power plug is damaged, contact the Call Center for further assistance.
- Do not apply excessive force to the power plug or product, or cut it.
- Do not use parts or accessories other than recommended ones.
- Do not use the product outdoors.
- Do not use the product for 1 hour after the meal.
- Disconnect the power plug after use or before cleaning.
- Do not use this device while its case or power plug is damaged.
- If there is a problem with the product during use, stop using it and contact the Call Center for further assistance.
- Do not use this device if you are drunk or feel uncomfortable.
- Do not apply excessive force to avoid injury when using this device.
- The following people should use the product after consulting a doctor.
 - Users who receive treatment from a doctor due to an accident or illness, or who have something wrong with the body
 - Users who have long-term hospital treatment or aftereffect
 - Users who had a neck injury or surgery recently

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

Safety information

- A person who lacks physical, sensory, or mental abilities (including children) need supervision or instruction when using the product.
- Children shall not play with the appliance.
- If the power adapter is damaged or does not function well, do not replace it yourself and contact the Call Center for further assistance.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- When plugging in or unplugging the power plug, do not pull the wire with excessive force.
- Do not damage the wire or tamper with the circuits of this device.
- If you find a problem during use, stop using it immediately and contact the Call Center for further assistance.
- If you feel something wrong with your body while using the product, stop using it immediately and consult a doctor.
- Do not use the product if its cover is damaged.
- Do not press the product hard or apply pressure to it with your whole body, and do not touch it with a hard object or step on it.
- Do not modify the product or replace parts arbitrarily.
- Do not place the product near fire sources or flammable substances. It may cause failure, danger, deformation, discoloration, or damage.
- If you find a problem during use, stop using it immediately and turn off the power.
- Patients with mental illness or body paralysis shall use the product under supervision or after consulting a doctor.

Use environment

- Do not use the product in a place with high humidity including bathroom.
- Do not use the product in an environment with rapid temperature change.
- Do not use the product in an environment with lots of dusts or corrosive gases.

2. Check before use

Warning

Patients who shall not use the product and users who need prescriptions

- **The following patients shall not use the product:**
 - ① Those who have been recognized as inappropriate to use the product by a doctor due to thrombosis, embolism, severe varicose vein, acute varicose vein, etc.
 - ② Those who are suspected of acute cervical sprain (whiplash)
 - ③ Those with sprain or symptom of sudden contraction and disconnection of sprain or muscle
 - ④ Those who are in early pregnancy or immediately after childbirth
 - ⑤ Those who have backbone (spine) abnormality due to an accident or disease in the past, or a person whose backbone is bent left and right
 - ⑥ Those with severe osteoporosis
 - ⑦ Those with acute intestinal disease, severe heart failure
 - ⑧ Those with severe seizure symptoms or psychogenic diseases (perception disorder)
 - ⑨ Those who use an implantable electronic medical device such as an implantable pacemaker
 - ⑩ Those who have been recognized as having a loss of thermal sense due to a high degree of peripheral circulatory disturbance due to diabetes, etc.
 - ⑪ Those who have or are concerned to have osteomyelitis
 - ⑫ Those who have limited expression and body movement
- **The following people shall use the product after consulting a doctor.**
 - ① Those who may have side effects due to the use of the product, such as pregnant women
 - ② Those whose body temperatures are higher than normal due to acute inflammation and chill
 - ③ Those who have with acute skin disease, malignant tumor, or other skin diseases
 - ④ Those who receive medical treatment and need stability accordingly
 - ⑤ Those who feel other body abnormalities including high fever
 - ⑥ Patients who have body trauma or skin disease
 - ⑦ Children under 14 years of age and those who have neurological defects
 - ⑧ Those who have a wet body
 - ⑨ Those who are vulnerable to heat

Precautions

Precautions before use

- If you have a disease for which you shall not use the product, check with your doctor as there is a concern about side effect caused by the use of the product.
- To use the product safely, start with a low-intensity massage.
- Check the location of the “Stop” or “End” button before using the product.
- Check the massage duration.
- If the cover of the product is torn or peeled off, clothes or hair may get caught up and cause a serious accident. Check if there is any abnormality in the appearance of the product.

Precautions during use

- If you feel any irritating pain or something wrong with your body, stop using the product immediately and see a doctor.
- Avoid direct skin contact with the heating part and motor moving part of the product.
- Monitor your usage duration of the product.
- When using the product, do not use it together with other vibrators or electric mats.
- Make sure not to damage the massage area of the product with accessories. (hair ornaments, necklaces, wristwatches, bracelets, rings, etc.)
- Use the product according to its intended purpose and the part of the product area.

These instructions are to keep you safe and to prevent property damage.
Please carefully read the precautions and use the product correctly.

 Precautions when a failure occurs

If a problem with the product occurs, please do not disassemble the product at your discretion.

Additional product defects and accidents may occur.

Before you contact the Call Center, check the user manual to take an action. If the problem is not solved, please contact the Call Center for further assistance.

 Precautions

Possible side effects when using the product

- **Be careful as the following side effects may occur due to the use of the product.**

- ① Abrasion, contusion, bruise, stab, cut, etc.
- ② Damage to muscles, tendons, nerves, spine and etc., due to excessive use and pressure of the product
- ③ Skin diseases and burns, etc.
- ④ Fracture and dislocation, sprain, etc.
- ⑤ Respiratory/digestive disorders and suffocation, etc.

Check before using the product.

- Before use, check that the device operates normally by pressing all the switches in order according to this manual.


Coway Thailand is not responsible for the following:

- If you do not observe the use according to the user manual or failure to observe the precautions for use
- If a product is repaired or remodeled by a third party other than the Coway service center, partner company, or designated engineer, thereby resulting in a failure or accident
- If a failure occur due to natural disasters (fire, earthquake, flood, lightning, etc.)


Please keep this User Manual in a safe place.

3. Part names and accessories

Front

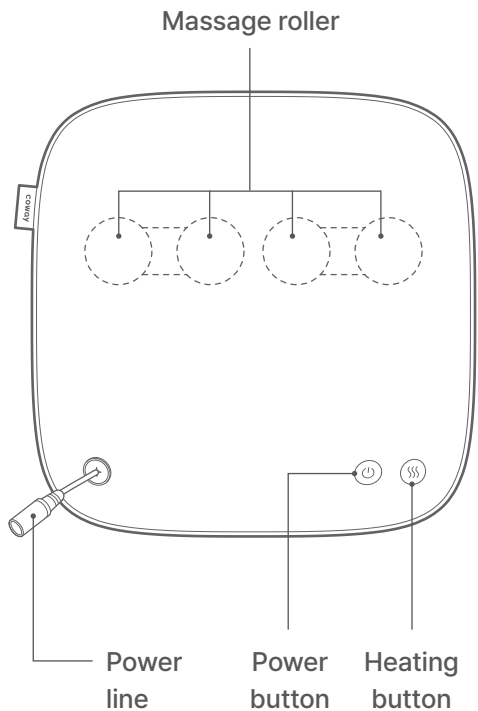


Back

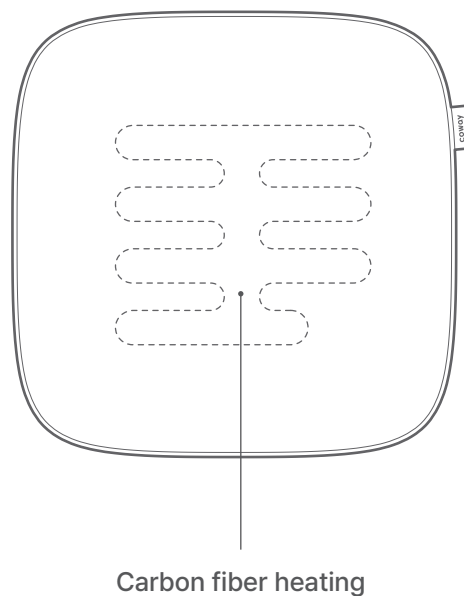

Accessories



User Manual

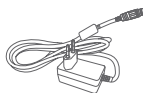


Power line


1. How to use

This product is powered by a battery and can be used wirelessly while being carried, or used on a wire by plugging in the power plug.

01. Charging

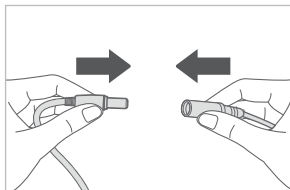


1. Connect the power jack to the massager.

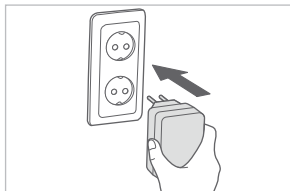

2. Insert the power plug into the outlet.

If you insert the power plug into an outlet while the power is off, the red indicator light on the power button turns on. When fully charged, the red indicator on the power button turns off.


02. Turning on power

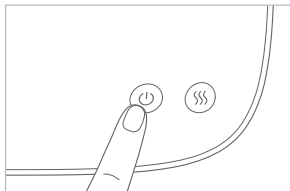

If you press and hold the power button, the power turns on and the massage roller operates. (Initial mode: high speed)

- Power on: The green indicator on the power button turns on.

03. Turning off the power

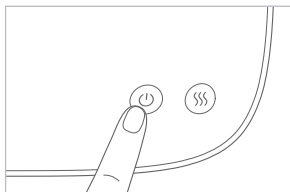


During operation, press and hold the Power button to turn off the power.

- Power off: The green indicator on the Power button turns off.


1. How to use

04. Adjusting the massage speed

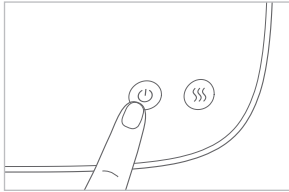

While the massage roller is operating, press the power button briefly to adjust the speed.

05. Using the heating function

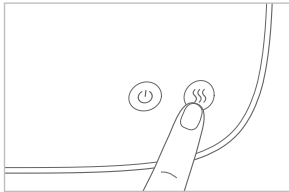

Press and hold the Heating button to turn on the heating function.

If you press and hold the Heating button, the heating function turns off.

- Rear heating function on: Red indicator on heating button turns on.
- Rear heating function off: Red indicator on heating button turns off.


06. Single operation time

- You can turn on the massage function and heating function simultaneously or separately, and each operation takes 15 minutes.
- If you turn on the heating function while using the massage function, the heating function turns off when the massage function time elapses and turns off.
- If you turn on the massage function while using the heating function, the massage function will stop when the time elapses and it turns off.

1. How to manage

- Be sure to remove the power plug before cleaning.
- Do not immerse the product in water or spray water over it.
- Do not use organic solvents (thinner, etc.), bleach, or detergents containing chlorine or abrasives to clean the product.

Cleaning instructions

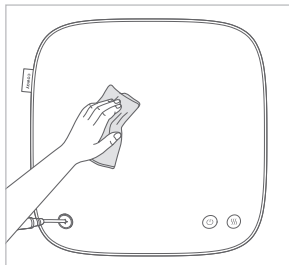

Wipe the exterior and cover of the product with a soft, dry cloth.

- When contaminated, wet a cloth slightly with water and wipe off the contaminant.
- Be sure to remove the remaining water.
- Do not wash the product cover in a washing machine. It may cause product damage.
- Do not iron the product cover with an iron. It may cause fire or product damage.

Storage instructions

- Do not expose the product to direct sunlight for extended periods, and do not place it near open flames or in high-temperature areas.
- If not used for an extended period, store the product in a clean and dry place.
- If the product has been stored in low temperatures due to transportation, movement, or other reasons, leave it at room temperature for 1 hour before turning it on.
- Do not place the product in a special environment which is vulnerable to substances like mold, humidity or sulfur. Otherwise, the product may be damaged.

1. Troubleshooting

Symptoms	Causes	How to solve
The product does not operate.	The power cable is not connected.	Connect the power plug to the product.
	Massage roller turns off automatically after 15 minutes of operation.	Press the power switch to turn it on.
	Continuous use of 45 minutes (overheating protection)	Turn off the power and let the product cool down for about 1 hour before use.
	Damage occurs under excessive load.	Please use the product in the correct way.
The product is hot.	The heating function turns on.	Press and hold the Heating button to turn off the heating function.
	If you use the product continuously for more than 45 minutes or if it is subjected to excessive load	Disconnect the power plug, wait for 1 hour, and then use it again.
There is noise in the product.	This is a normal phenomenon due to the mechanical structure of the product.	This sound is normal and does not mean a failure of the product.

2. Specification

- There may be slight changes in specifications for improving the product's performance.

Product name	COWAY MASSAGE CUSHION
Model name	SM-C01
Rated voltage	DC 12 V 
Rated input	12 W
Country of manufacture	Made in China
Distributor	COWAY (THAILAND) CO., LTD.
Rated input current	0.95 A

MEMO

MEMO

||| Preparation for use

||| How to use

||| Maintenance

||| Others



Massage Cushion SM-C01
User Manual

COWAY (THAILAND) CO., LTD.
